


**PHILIPS**

DiamondClean  
Smart

Elektriline hambahari  
HX9954/57  
KASUTUSJUHEND



**PHILIPS**  
**sonicare**

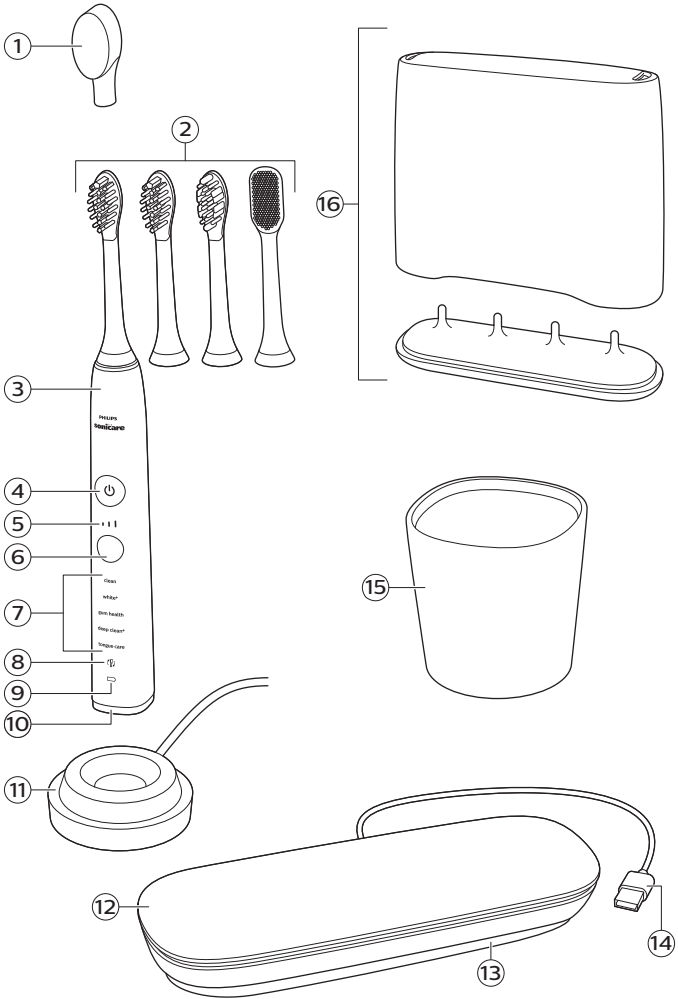

## Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** või Philips Sonicare'i rakenduses.

## Oluline

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

## Oht

- Ärge tehke laadijat märjaks. Ärge pange ega hoidke seda vee läheduses, näiteks vett täis vanni, pesukausi, valamü vms kohal. Ärge kunagi kastke laadijat vette ega mingisse muusse vedelikku. Pärast puhastamist veenduge, et laadija oleks täiesti kuiv enne voluvõrku ühendamist.

## Hoiatus

- Toitejuhe ei ole asendatav. Kui toitejuhe on kahjustatud, kõrvaldage laadija kasutusest.
- Ohtlike olukordade vältimiseks vahetage laadija alati välja originaali vastu.
- Ärge kasutage laadijat õues ega kuumade pindade läheduses.

- Kui seade (harjapea, käepide või laadija) on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine. Sellel seadmel pole ühtki hooldatavat osa. Kui seade on kahjustatud, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt ptk „Garantii ja tugi”).
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, meelet- või vaimse häirega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet puhastada ja hooldada, kui nad ei ole vähemalt 8 aastat vanad ja nad on järelevalveta.
- Philips Sonicare'i käepideme tõhusaks laadimiseks ärge asetage laadimisalust magnetilisele metallpinnale.

### **Ettevaatust**

- Ärge puhastage harjapead, käepidet ega laadijat nõudepesumasinas.

- Kui teil on olnud viimase kahe kuu jooksul suuõõne või igemete operatsioon, pidage enne hambaharja kasutamist hambaarstiga nõu.
- Võtke ühendust oma hambaarstiga, kui teil tekib pärast hambaharja kasutamist liigne verejooks või kui veritsemine jätkub pärast esimest kasutusnädalat. Kui te kogete Philips Sonicare'i kasutamisel valu või ebamugavust, konsulteerige oma hambaarstiga.
- Philips Sonicare'i hambahari vastab elektromagnetilistele seadmetele kehtestatud ohutusstandarditele. Juhul kui te kasutate südamestimulaatorit või mõnda muud meditsiinilist seadet, võtke enne hambaharja kasutamist ühendust oma arsti või siirdatud seadme tootjaga.
- Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne Philips Sonicare'i hambaharja kasutama hakkamist ühendust oma arstiga.

- See seade on loodud vaid hammaste, igemete ja keele puhastamiseks. Ärge kasutage seda teisteks otstarveteks. Kui kogete valu või ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga.
- Philips Sonicare'i hambahari on personaalne hügieenitarve ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks hambaravikabinetis või -asutuses.
- Ärge kasutage kõverdunud või paindunud harjastega harjapäid. Vahetage harjapäid iga kolme kuu tagant või varem – pärast seda kui ilmnevad kulumisnähud. Kasutage ainult neid harjapäid, mida tootja soovitab.
- Kui teie hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või bikarbonaati (levinud komponendid valgendavates hambapastades), peske harjapead pärast igit kasutuskorda põhjalikult seebi ja veega. Nii väldite plastikusse võimalike pragude tekkimist.

### **Elektromagnetväljad (EMF)**

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

## Raadioseadmete direktiiv

- Raadioseadmed selles tootes töötavad vahemikus 2401–2480 MHz
- Maksimaalne raadioseadmete poolt edastatav raadiosageduslik võim on +3 dBm

## Teie Philips Sonicare (joonis 1)

- 1 Hügieeniline reisivutlar
- 2 Harjapead
- 3 Käepide
- 4 Toitenupp
- 5 Tugevuse tuluke
- 6 Režiimi-/tugevusnupp
- 7 Režiimituluke
- 8 Harjapea asendamise meeldetuletuse tuluke
- 9 Aku märgutuli
- 10 Valgusrõngas
- 11 Laadimisalus
- 12 Reisikott
- 13 Kaablihoiundamiskamber
- 14 USB-kaabel (sisseehitatud)
- 15 Laadimistops
- 16 Harjapea hoidik

Märkus. Karbi sisu võib varieeruda vastavalt ostetud mudelile.

## Harjapead

Teie Philips Sonicare'iga on kaasas valik harjapäid, mis on konstrueeritud eesmärgiga pakkuda parimaid tulemusi teie suuhooldusvajaduste rahuldamiseks.

Harjapeade arv ja liik võib olla erinev, lähtudes sellest, millise hambaharja ostsite.



- 1 Premium Plaque Defense harjapea
- 2 Premium Gum Care harjapea
- 3 Premium White harjapea

#### 4 Tongue Care+ harjapea (ainult teatud mudelitel)

### Nutikas harjapea tuvastamine

Premium Plaque Defense, Premium Gum Care, Premium White ja Tongue Care+ harjapead on varustatud nutika harjapea tuvastamise tehnoloogiaga.

Harjapeas olev mikrokiip on ühenduses hambaharja käepidemega. Seega, kui ühendate harjapea, tuvastab käepide harjapea automaatselt ning valib soovitatud režiimi ja tugevustaseme, et parandada teie hammaste harjamise tulemust.


Tänu sellele funktsioonile jälgib hambahari ka teie kasutust ja edastab isiklike meeldetuletusi, kui peate oma harjapea parima suuhooldustulemuse saavutamiseks välja vahetama.

### Harjamisrežiimid

Teie elektrilisel hambaharjal on 5 eri režiimi, et rahuldada teie kõiki suuhooldusvajadusi (mõnel mudelil on ainult 4 harjamisrežiimi). Saadaval on järgmised režiimid:

#### Režiim Clean

Clean on 2-minutiline režiim, mida soovitame kasutada 3. tugevustasemel. See tagab hoolika ja täieliku puhastuse ning seda on soovitatav kasutada koos harjapeaga Premium Plaque Defense. Parima tulemuse saavutamiseks järgige allpool kirjeldatud samme.

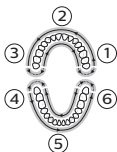


1

Alustage harjamist ülemistest parempoolsetest hammastest (1. segment) ja harjake 20 sekundit nii välis- kui ka sisepindu, enne kui ülemiste esihammaste (2. segmendini) juurde liigute. Jätkake segmentidega 3 kuni 6, veendudes, et harjate ühtlaselt kõiki 6 segmenti. Iga 20 sekundi järel kuulete piiksu, mis teatab, et peaksite järgmisse segmenti liikuma.

### Režiim White+


White+ on 2 minuti ja 40 sekundi pikkune režiim, mida soovitame kasutada 3. tugevustasemel ja harjapeaga Premium White. Parima tulemuse saavutamiseks järgige allpool kirjeldatud samme.

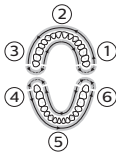

**1** Alustage harjamist ülemistest parempoolsetest hammastest (1. segment) ja harjake 20 sekundit, enne kui ülemiste esihammaste (2. segmendini) juurde liigute. Jätkake sama tegevusega segmentides 3 kuni 6, veendudes, et harjate kõiki 6 segmenti oma suus.


**2** Pärast kõigi nende 6 segmendi läbimist lülitub hambahari automaatselt poleerimisrežiimile.

**3** Hammaste poleerimiseks harjake oma ülemiste hammaste välispindu 20 sekundi jooksul (2. segment) ning seejärel harjake oma alumiste hammaste välispindu 20 sekundi jooksul (5. segment). Selles režiimiosas kasutatavad poleerimisliigutused tunduvad ja kõlavad režiimi esimesest kahest minutist erinevalt.

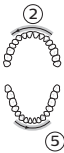

### Režiim Gum Health

Gum Health on 3 minuti ja 20 sekundi pikkune režiim, mida soovitame kasutada 3. tugevustasemel ja harjapeaga Premium Gum Care. Parima tulemuse saavutamiseks järgige allpool kirjeldatud samme.

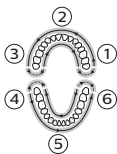


- 1 Alustage harjamist ülemistest parempoolsetest hammastest (1. segment) ja harjake 20 sekundit nii välis- kui ka sisepindu, enne kui ülemiste esihammaste (2. segmendini) juurde liigute. Jätkake sama tegevusega segmentides 3 kuni 6, veendudes, et harjate kõiki 6 suusegmenti.
- 2 Seejärel hoolitsege parimal viisil oma igemete eest, harjates ülemiste parempoolsete tagumiste hammaste välis- ja sisepindu 20 sekundi jooksul (1. segment) ning seejärel harjake oma ülemiste vasakpoolsete tagumiste hammaste välis- ja sisepindu 20 sekundi jooksul (3. segment).

Jätkake alumiste parempoolsete tagumiste hammaste välis- ja sisepindade harjamisega 20 sekundi jooksul (4. segment) ning seejärel harjake järgmise 20 sekundi jooksul oma alumiste vasakpoolsete tagumiste hammaste välis- ja sisepindu (6. segment). Selles režiimiosas kasutatavad harjamisliigutused tunduvad ja kõlavad režiimi esimesest kahest minutist erinevalt.

### Režiim DeepClean+


Režiimi DeepClean+ kestus sõltub sellest, kas käepide on rakendusega ühendatud või mitte. Ühendusrežiimis kestab režiim DeepClean+ kaks minutit ja annab BrushPaceri tagasiside iga 20 sekundi järel. Ühenduseta režiimis kestab režiim DeepClean+ kolm minutit ja annab BrushPaceri tagasiside iga 30 sekundi järel. Kui harjate ilma ühenduseta, siis järgige parima tulemuse saavutamiseks allpool toodud juhiseid.

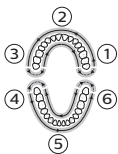

- Alustage harjamist ülemistest parempoolsetest hammastest (1. segment) ja harjake 30 sekundit nii välis- kui ka sisepindu, enne kui ülemiste esihammaste (2. segmendini) juurde liigute. Jätkake sama tegevusega segmentides 3 kuni 6, veendudes, et harjate kõiki 6 segmenti oma suus.

### Režiim Tongue Care (ainult teatud mudelitel)

Režiim Tongue Care kestab 20 sekundit ning soovime seda kasutada 1. tugevustasemel ja harjapeaga Tongue Care+. Parima tulemuse saavutamiseks järgige allpool kirjeldatud samme.

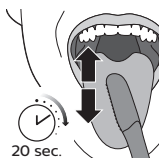


- 1 Niisutage mikroharjaseid ning harjake oma keelt edasi-tagasi liigutustega. Puhastage nii kaugelt kui tunnete end mugavalt.
- 2 Loputage suud ja korrake protseduuri veel kaks korda.

Lähtudes ühendatavast harjapeast, valitakse režiim automaatselt. Kui soovite käsitsi reguleerida režiimi või tugevust, saate seda teha, vajutades režiimi-/tugevusnappu. Režiimi muutmiseks vajutage enne harjamist režiimi-/tugevusnappu ning harjamise ajal vajutage sama nappu tugevuse muutmiseks. Käepide jätab teie valiku selle sama harjapea uuesti ühendamisel meelde. Kui soovite harjapea esialgsed soovitatud sätteid taastada, muutke need käsitsi allpool toodud soovitatud sätetele.

Märkus. Kui Philips Sonicare'i kasutatakse kliinilistes uuringutes, peab seda kasutama suure tugevusega režiimides Clean, White+, GumHealth või ühendamata režiimis DeepClean+, et saavutada tõhusaid katu ja plekkide eemaldamise ning igemetervise tulemusi või paremust (vastavalt soovile).


## Tugevussäte

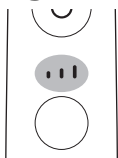


Elektriline hambahari võimaldab teil valida 3 erineva tugevussäate taseme vahel: nõrk, keskmine ja tugev. Lähtudes ühendatavast harjapeast, valitakse tugevus automaatselt. Kui soovite valida teistsuguse tugevuse, saate seda teha, vajutades harjamise ajal režiimi-/tugevusnuppu. Parima tulemuse tagamiseks on soovitatav kasutada automaatselt valitud tugevust. Tugevust ei saa muuta, kui käepide on välja lülitatud või peatatud.

## Philips Sonicare hambaharja kasutamine

### Harjamisjuhised

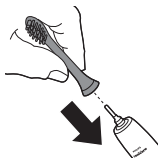


- 1 Ühendage oma harjapea. Pange harjapea kohakuti käepideme esiküljega ühes suunas osutavate harjastega.

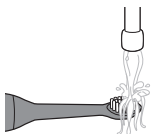

- 2 Tehke hambaharja harjased märjaks.



- 3 Pange neile väike kogus hambapastat.

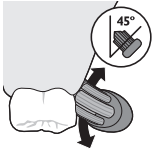

- 4 Pange harjased vastu hambaid nii, et need jääksid väikese nurga alla (45 kraadi), vajutades harjased kindlalt vastu igemeserva või sellest veidi allapoole. Vibratsiooni muutus (ja kerge helimuutus) ja valgusrõngas annavad märku, kui vajutate harjamisel liiga tugevasti.

Märkus. hoidke harja keskosa kogu aeg vastu hambaid.



- 5 Philips Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.



- 6 Selleks, et Philips Sonicare oleks tõhus, kasutage kergest survet. Puhastage oma hambaid lühikeste edasi-tagasi liigutustega nii, et pikemad harjased ulatuksid hambavahedesse. Jätkake seda liigutust kogu harjamistsükli jooksul.

Märkus. Harjased peaksid kergelt laiali minema. Ärge hõõruge.



- 7 Esihammaste sisemiste pindade puhastamiseks kallutage hambaharja käepide poolpüstisesse asendisse ja tehke igal hambal mitu vertikaalset kattuvat harjamisliigutust.

Teie Philips Sonicare sobib kasutamiseks:

- breketitel (harjapead kuluvad breketitel kasutamisel kiiremini);
- hambaparandustel (plommid, kroonid, laminaadid).

## Funktsioonid ja lisatarvikud

- a Rakendus
- b Surveandur

- c Harjapea asendamise meeldetuletus
- d BrushPacer
- e Easy-start
- f Reisikott (üksnes teatud mudelitel)
- g Harjapea hoidik (ainult teatud mudelid)

## a. Rakendus

Teie Philips Sonicare on varustatud *Bluetooth*iga ja võimaldab teil saavutada parima suutervise koos Philips Sonicare'i rakendusega.

Philips Sonicare'i rakenduse kasutamine aitab teil oma suuhoolduse harjumusi parandada. See annab harjamise ajal reaajas tagasiside, teavitab teid, kui jätate harjamisel mõne koha vahele, jälgib teie harjamistegevusi aja jooksul ning annab kasulikke näpunäiteid ja nippe teie suu parima tervise seisundi tagamiseks. Oma Philips Sonicare'i parimal viisil kasutamiseks soovime järgida järgmisi samme.

### Hambaharja ühendamine


- 1 Laadige alla Philips Sonicare rakendus Apple App Store'ist või Google Play Store'ist.
- 2 Veenduge enne rakenduse avamist, et *Bluetooth* on teie mobiilseadmel sisse lülitatud. *Bluetooth*i saab sisse lülitada mobiilseadme seadetes.
- 3 Avage Sonicare'i rakendus.
- 4 Hambaharja rakendusega ühendamiseks eemaldage käepide laadijast ja vajutage režiimi-/tugevusnuppu.
- 5 Järgige oma mobiilseadmel kuvatavaid Sonicare'i rakenduse juhiseid. Rakendus ühendub hambaharjaga automaatselt. Kui hambahari ei ühendu, järgige rakenduses kuvatavaid tõrkeotsingusamme.

Märkus. Parima andmeedastuse tagamiseks hoidke oma mobiiltelefoni harjamise ajal enda lähedal.

## b. Surveandur

Teie Philips Sonicare on varustatud kaasaegse anduriga, mis mõõdab survet, mida harjamisel kasutate. Kui vajutate liiga tugevasti, annab hambahari sellest kohe teada, et saaksite survet vähendada. Teavitamine toimub kahel viisil.


- 1 Tunnete vibratsiooni ja seega ka harjamise muutust.
- 2 Valgusrõnga surve hoiatustuli muutub lillaks. Kui saate hoiatuse, vähendage survet. Valgus kustub ja harjamise tunne muutub uuesti tavapäraseks.

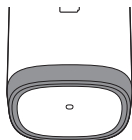

### Surveanduri sisse- või väljalülitamine

- 1 Pange käepide koos ühendatud harjapeaga vooluvõrgus olevasse laadijasse.
- 2 Surveandur lülitatakse sisse, kui laadijas oleku ajal hoitakse režiimi-/tugevusnuppu ning vajutakse toitenuppu kaks korda. Käepide teeb sisselülitatud oleku kinnitamiseks kaks piiksu.
- 3 Surveandur lülitatakse välja, kui laadijas oleku ajal hoitakse režiimi-/tugevusnuppu ning vajutakse toitenuppu kaks korda. Käepide teeb väljalülitatud oleku kinnitamiseks ühe piiksu.

## c. Harjapea asendamise meeldetuletus

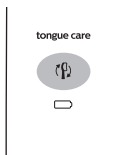

Teie Philips Sonicare on varustatud nutika funktsiooniga, mis jälgib harjapea kulumist. Sõltuvalt teie kasutatavast survest ja kasutusajast tuleb harjapea asendamise meeldetuletuse tuluke teile meelde, et peate harjapea välja vahetama. Harjapead on oluline õigel ajal

vahetada, et tagada teie hammaste parim puhastamine ja hooldamine.

Kui harjapea asendamise meeldetuletuse tuluks hakkab merevaigukollaselt vilkuma, peate harjapea välja vahetama.

### Harjapea asendamise meeldetuletuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Asetage käepide vooluvõrku ühendatud laadijasse.
- 2 Harjapea asendamise meeldetuletus lülitatakse sisse, kui laadijas oleku ajal hoitakse režiim-/tugevusnuppu ning vajutakse toitenuppu kolm korda. Käepide teeb sisselülitatud oleku kinnitamiseks kaks piiksu.
- 3 Harjapea asendamise meeldetuletus lülitatakse välja, kui laadijas oleku ajal hoitakse režiim-/tugevusnuppu ning vajutakse toitenuppu kolm korda. Käepide teeb väljalülitatud oleku kinnitamiseks ühe piiksu.

#### d. BrushPacer



BrushPacer on intervallitaimer, mis tuletab lühikese piiksatuse ja pausiga meelde suu eri osade harjamist. Sõltuvalt valitud (vaadake 'Harjamisrežiimid') harjamisrežiimist piiksub BrushPacer harjamistsükli ajal erinevate intervallide tagant.

#### e. Easy-start

Easy-start funktsioon suurendab õrnalt Philips Sonicare'i võimsust esimese 14 harjamiskorra jooksul, et aidata teil seadmega harjuda. Funktsioon Easy-start töötab kõigis režiimides, välja arvatud TongueCare+. Sellel Philips Sonicare'i mudelil on Easy-start funktsioon välja lülitatud.

### Easy-start-funktsiooni sisse- või väljalülitamine:

- 1 Asetage käepide vooluvõrku ühendatud laadijasse.
- 2 Easy-start lülitatakse sisse, kui laadijas oleku ajal hoitakse režiimi-/tugevusnuppu ning vajutakse toitenuppu üks kord. Käepide teeb sisselülitatud oleku kinnitamiseks kaks piiksu.
- 3 Easy-start lülitatakse välja, kui laadijas oleku ajal hoitakse režiimi-/tugevusnuppu ning vajutakse toitenuppu üks kord. Käepide teeb väljalülitatud oleku kinnitamiseks ühe piiksu.

Märkus. Easy-start funktsiooni kasutamise jätkamine pärast algset harjutamisperioodi pole soovitatav ja see vähendab Philips Sonicare'i võimekust hambakatu eemaldamisel.


Märkus. Easy-starti võimsuse suurendamise tsükli läbimiseks peab iga harjamine neljateistkümnest kestma vähemalt ühe minuti.

Märkus. Kliinilise efektiivsuse saavutamiseks peab Easy-start olema välja lülitatud.

### f. Reisikott (üksnes teatud mudelitel)

Teie Philips Sonicare'iga on kaasas reisikott, mis teeb elektrilise hambaharjaga reisimise mugavamaks. See on konstrueeritud nii, et sinna mahub elektriline hambahari ja kaks hambaharjapead. Mõni mudel on varustatud USB-laadijaga reisikotiga, mis ühendub teie sülearvutiga USB kaudu, võimaldades teil Philips Sonicare'i reisi ajal laadida. Teabe saamiseks Philips Sonicare'i laadimise kohta reisikoti abil vt jaotist "Aku olek ja laadimine".

## g. Harjapea hoidik (ainult teatud mudelid)

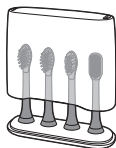

Harjapea hoidik on konstrueeritud harjapeade hoidmiseks ja säilitamiseks.

## Aku olek ja laadimine

### Laadimine topsiga (üksnes teatud mudelitel)

- 1 Sisestage laadimisalus seinakontakti.
- 2 Asetage laadimistops laadimisalusele ning asetage käepide topsi sisse.

Laadimise valge märgutuli vilgub, kuni hambahari on täis laaditud.

### Laadimine reisikotiga (üksnes teatud mudelitel)

- 1 Asetage käepide laadimisega reisikotti.
- 2 Ühendage laadimise reisikott sülearvutiga, USB-seinapistikuga või sobiva seinaadapteriga. USB-kaabel on ühendatud reisikotiga ja seda hoitakse kaablihoiundamiskambris.
- 3 Aku valge märgutuli vilgub, kuni hambahari on täis laaditud.

Oluline! Seinaadapter peab olema ohutu ülimaldala pingega toiteallikas, mis ühildub seadmele märgitud elektrinäitudega.

Oluline! Reisikotis saab laadida ainult hambaharja mudeleid HX993W, HX993B, HX993P, HX993S, HX993L. Teised tooted ja akud ei ühildu reisikotiga.

Märkus. Philips Sonicare'i täislaadimiseks kulub vähemalt 24 tundi. Käepidet ei pea enne esmakordset kasutamist täis laadima, sest see on juba esmakordse kasutamise jaoks laetud. Samas

on soovitatav see pärast esmakordset kasutamist täielikult laadida.


Märkus. See laadija on loodud korraga vaid ühe käepideme korralikuks laadimiseks. See laadija ei sobi kokku teiste Philips Sonicare'i mudelitega.

Märkus. Ärge pange reisikotti metalliesemeid, kuna see võib mõjutada käepideme laadimisprotsessi ja põhjustada laadija ülekuumenemist.

## Puhastamine

Märkus. Ärge puhastage harjapead, käepidet ega reisikotti nõudepesumasinas.

### Hambaharja käepide

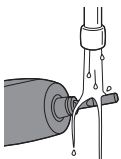


- 1 Eemaldage harjapea ja loputage metallist vart sooja veega. Veenduge, et olete eemaldanud järelejäänud hambapasta.

Ettevaatust! Ärge vajutage metallvarre kummitihendile terava esemega, kuna see võib tihendit kahjustada.

- 2 Pühkige kogu käepideme pinda niiske lapiga.

Märkus. Ärge kasutage käepideme puhastamiseks isopropüülalkoholi, äädikat ega valgendajat, sest see võib põhjustada värvimuutusi.

### Harjapea

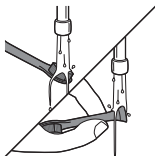

- 1 Loputage harjapead ja harjaseid pärast iga kasutamist.
- 2 Võtke vähemalt kord nädalas harjapea käepideme küljest lahti ja loputage ühenduskohta sooja veega.

### Laadija ja reisikott

- 1 Võtke alati laadija ja reisikott enne puhastamist elektrivõrgust välja.

- 2 Pühkige laadija ja reisikott niiske lapiga puhtaks.

## Tops ja harjapea hoidik

- 1 Puhastage topsi ja harjapea hoidikut vees, millele on lisatud natuke õrnatoimelist seepi.
  - 2 Kuivatage need pehme käterätikuga.
- Topsi ja harjapea hoidikut võib pesta nõudepesumasinas.

## Hoiundamine

Kui te ei kavatse oma Philips Sonicare'i pikemat aega kasutada, eemaldage laadija seinakontaktist, puhastage see ning pange hoiule jahedasse ja kuiva kohta, eemale otsesest päikesevalgusest.

## Mudelinumbri asukoht

Mudelinumbri (HX992W, HX992B, HX992P, HX992S, HX992L, HX993W, HX993B, HX993P, HX993S, HX993L) leiате Philips Sonicare'i hambaharja käepideme alt.

## Ringlussevõtt



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).



- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ). Me soovime teil oma toode via Philipsi ametlikku kogumispunkti või hoolduskeskusesse, et akupatarei professionaalil eemaldada lasta.


- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Laetava aku eemaldamine

Hoiatus. Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui seadme kasutusest kõrvaldate. Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiesti tühi.


Akupatarei eemaldamiseks vajate rätikut või riiet, haamrit ja lapiku peaga peaga (tavalist) kruvikeerajat. Järgige allkirjeldatud toimingute läbiviimisel elementaarseid ohutusnõudeid. Ärge unustage kaitsta oma silmi, käsi, sõrmi ja töötamiseks kasutatavat pinda.

- 1 Akupatarei laengutest täielikuks tühendamiseks eemaldage laadija küljest käepide, lülitage Philips Sonicare sisse ja laske sellel seiskumiseni töötada. Korrake seda sammu, kuni te enam ei saa Philips Sonicare'i sisse lülitada.
- 2 Eemaldage harjapea ja visake see minema. Katke terve käepide käteräti või riidega.

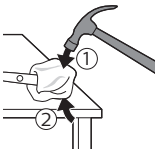


- 3 Hoidke ühe käega käepideme ülemisest osast ja lööge vastu käepideme korpust 0,5 tolli kaugusel põhjast. Otsakatte vabastamiseks lööge haamriga tugevalt vastu kõiki nelja külge.


Märkus. Võib-olla peate sisemiste plöskslambrite vabastamiseks lööma otsale mitmeid kordi.

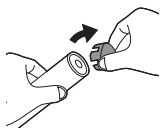


- 4 Eemaldage hambaharja käepideme küljest otsakate. Kui otsakate ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni otsakate lahtitulekuni.

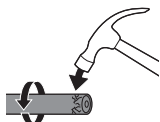


- 5 Hoidke käepidet alusega ülespoole ning vajutage vart vastu kõva pinda. Kui sisemised komponendid ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni need lahti tulevad.

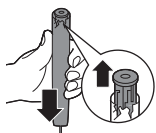


- 6 Eemaldage kummist akupesa kate.

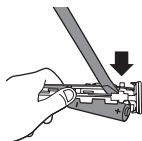

- 7 Kiiluge kruvikeeraja aku ja sisemiste komponentide allosas oleva musta raami vahele. Seejärel kangutage kruvikeerajat aku küljest eemale, et musta raami põhi lõhkuda.

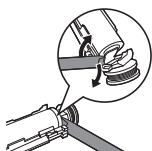


- 8 Akut ja rohelist trükkplaati ühendava metallklemmi vabastamiseks sisestage kruvikeeraja aku alumise osa ja musta raami vahele. Nii tuleb aku alumine osa raami küljest lahti.

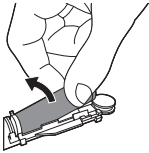

- 9 Haarake akust ja tõmmake see teise metallist akuklemmi vabastamiseks sisemiste komponentide küljest eemale.

**Ettevaatust! Sõrmevigastuste vältimiseks võtke teadmiseks, et akuklemmide servad on teravad.**

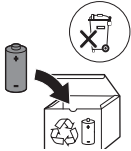

- 10 Katke akukontaktid teibiga, et vältida lühise teket aku jääklaengust. Laetavat akut saab nüüd ümber töödelda ja ülejäänud toote nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldada.

## Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või lugege läbi üleilmne garantiileht.

## Garantiipiirangud

Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantiiaeg:

- Harjapead
- Tootja poolt mittelubatud asendusosade kasutamisest tingitud kahjustused.
- Kahju, mille põhjuseks on seadme väär või halb kasutamine, hooldamata jätmine, kohandamine või lubamatu parandamine;
- Normaalne kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimud, hõõrdumine, värvimuutused või luitumine.