



PHILIPS

sonicare

9900 Prestige



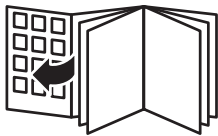

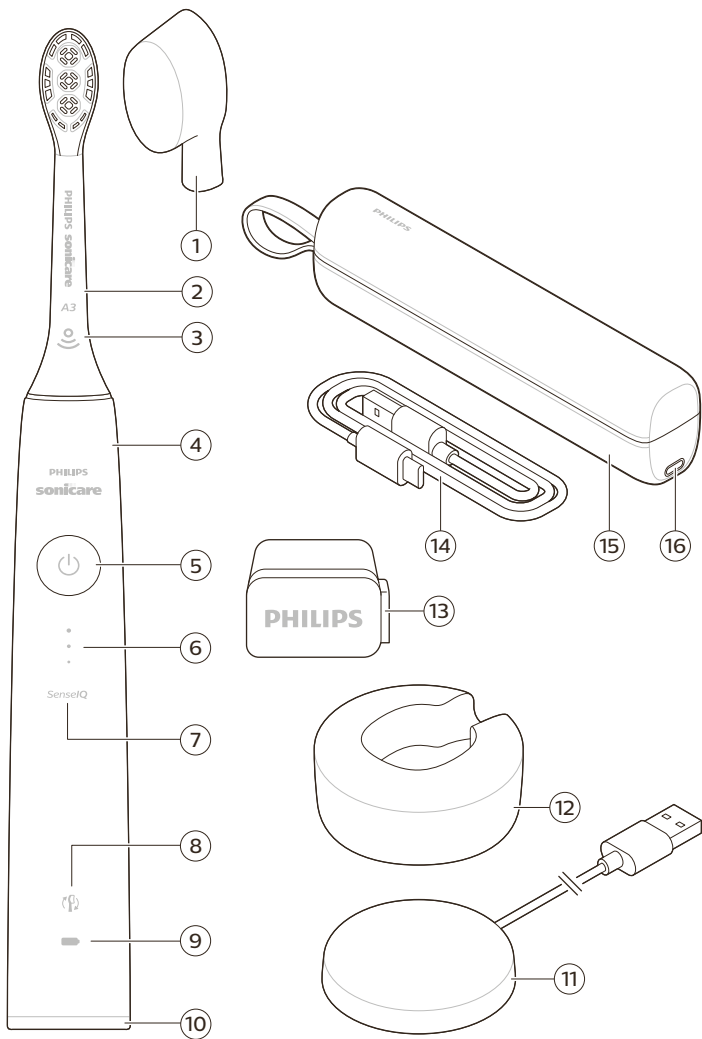

Ievads



Apsveicam ar jaunas Philips Sonicare elektriskās zobu suku iegādi! Lieliska aplikuma noņemšana, baltāki zobi un veselīgākas smaganas rokas stiepiena attālumā. Izmantojot Sonicare maigās Sonic tehnoloģijas kombināciju ar klīniski izstrādātām un apstiprinātām funkcijām, jūs varat būt pārliecināts, ka ikreiz saņemat vislabāko zobu tīrīšanu.

Turpmāka atbalsta saņemšanai un produkta reģistrācijai izmantojiet šo tīmekļa vietni:

www.philips.com/Prestige-Get-Started

Sveicināti Philips Sonicare saimē!

Svarīga informācija par drošību

Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta un tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus.

Brīdinājumi

- Sargiet lādētāju no ūdens!
- Pēc tīrīšanas pārliecinieties, vai lādētājs ir pilnībā sauss, pirms pievienojat to sienas kontaktligzdai.
- Šo ierīci var izmantot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai palīgmateriālus. Izmantojiet tikai to lādētāju, kas nodrošināts kopā ar piegādāto izstrādājumu. Ja komplektācijā ietilpst, izmantojiet tikai oriģinālo USB kabeli un USB barošanas bloku.

- Šai ierīcei nav daļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Ja ierīce ir bojāta, pārtrauciet to lietot un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī (sk. 'Garantija un atbalsts'). Ja vads ir bojāts, nomainiet lādētāju pret jaunu.
- Neizmantojiet lādētāju ārpus telpām vai karstu virsmu tuvumā.
- Nemazgājiet nevienu izstrādājuma daļu trauku mazgājamajā mašīnā.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai zobu, smaganu un mēles tīrīšanai.
- Pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar savu zobārstu/ārstu, ja pēc lietošanas rodas pārmērīga asiņošana, ja pēc 1 lietošanas nedēļas turpinās asiņošana vai ja Jums rodas diskomforts vai sāpes.
- Ja pēdējo divu mēnešu laikā jums ir bijušas mutes vai smaganu operācijas, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.
- Ja jums ir elektrokardiostimulators vai cita implantēta ierīce, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai implantētās ierīces ražotāju.
- Ja jums radušās medicīniska rakstura šaubas, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Šī ir personīgās higiēnas ierīce, un tā nav paredzēta lietošanai vairākiem pacientiem zobārstniecības praksē vai iestādē.
- Pārtrauciet lietot suku uzgali, ja tās sari ir saspiesti vai saliekti. Nomainiet suku uzgali ik pēc 3 mēnešiem vai agrāk, ja tam ir redzamas nolietojuma pazīmes.
- Ja jūsu zobu pastas sastāvā ir ūdeņraža pārskābe, cepamā soda vai bikarbonāts (bieži sastopams balinošajās zobu pastās), rūpīgi iztīriet suku uzgali ar ziepēm un ūdeni pēc katras lietošanas reizes. Tā novērsīsiet iespējamu plastmasas saplaisāšanu.
- Nepieļaujiet tiešu saskari ar izstrādājumiem, kas satur ēteriskās eļļas vai kokosriekstu eļļu. Saskare ar eļļu var sekmēt sariņu izkrišanu.

- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai produkta komplektācijā iekļauto USB sienas adapteri, uzlādes pamatni un uzlādes futrāli. WAA1001, WAA2001, HX9200 vai HX9200/B, un TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 vai CBB2001. Neizmantojiet pagarinātāju.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet izstrādājumu temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.
- Nenovietojiet produktu un baterijas uguns tuvumā, kā arī nepakļaujiet tos tiešu saules staru vai augstas temperatūras iedarbībai.
- Ja produkts pārlietu sakarst vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet produkta lietošanu un uzlādi, un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.
- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītim.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet izstrādājumu vai bateriju, lai novērstu bateriju sakaršanu vai indīgu vai bīstamu vielu noplūdi. Neizraisiet īsslēgumu, nepārlādējiet baterijas vai neveiciet to atgriezenisku uzlādi.
- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Radioiekārtu direktīva

Ar šo Philips paziņo, ka elektriskās zobu birstes, kas aprīkotas ar radiofrekvenci saskarni (Bluetooth vai BrushSync) atbilst direktīvai 2014/53/ES.

- Bluetooth pārraidītais signāls: 2,4 GHz
- Maksimālā Bluetooth pārraidītā signāla jauda: 3 dBm
- NFC pārraidītais signāls: 13,56 MHz
- Maksimālā NFC pārraidītā signāla jauda: 30,16 dBm

ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šeit: www.philips.com/support

Paredzētā lietošana

Sonicare Prestige elektriskās zobu birstes ir paredzētas, lai noņemtu no zobiem aplikumu un pārtikas atliekas, lai mazinātu zobu bojāšanos un uzlabotu un uzturētu mutes dobuma veselību. Prestige elektriskās zobu birstes ir paredzētas lietošanai patērētājiem mājās apstākļos. Bērniem tās jālieto pieaugušo uzraudzībā.


Jūsu Philips Sonicare

- 1 Higiēnisks ceļojuma vāciņš
- 2 Daudzfunkcionālais Premium birstes uzgalis (A3)
- 3 BrushSync simbols
- 4 Rokturis
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 6 Intensitātes indikators un slēptā poga
- 7 SenseIQ indikators
- 8 Birstes uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators
- 9 Akumulatora indikators
- 10 Tīrīšanas indikatora gaisma
- 11 Uzlādes pamatne
- 12 Uzlādes statīvs
- 13 USB-A sienas adapteris
- 14 USB-C kabelis
- 15 Uzlādes ceļojumu ietvars
- 16 USB-C pieslēgvietā

Piezīme. Iepakojuma saturs var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Uz izstrādājuma var parādīties šādi simboli:
Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



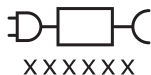

Noņemama barošanas avota daļa: “xxxxxx” norāda izmantoto apstiprināto lādētāju modeļa numuru.

Sonicare lietotne – darba sākšana

Sonicare lietojumprogramma savienojas pārī ar jūsu zobu suku, lai nodrošinātu jums pārbaudītu pieredzi. Saistot zobu suku ar savu Sonicare lietojumprogrammas kontu, jūs varēsiet:

- Pielāgojiet Sonicare zobu birstes iestatījumus atbilstoši vēlamajiem režīmiem, intensitātei un zobu birstes darbībai.
- Pārtrauciet tīrīšanas progresu.
- Saņemiet personalizētus padomus un praktiskus ieteikumus, kā uzlabot mutes veselību.
- Piekļūstiet plašam priekšrocību klāstam un saņemiet pastāvīgus jauninājumus Prestige lietošanā.



Lietojumprogramma ir saderīga ar plašu iPhone un Android™ viedtālrunu klāstu. Plašāka informācija ir pieejama vietnē **www.philips.com/Prestige-Get-Started**

Lai sāktu izmantot Sonicare lietojumprogrammu:



- 1 Lejupielādējiet lietotni Sonicare savā tālrunī.
- 2 Pārliecinieties, ka tālruna Bluetooth režīms ir ieslēgts.
- 3 Paņemiet zobu birsti, lai pārliecinātos, ka tā ir aktivizēta (iedegas indikators).
- 4 Atveriet lietotni un izpildiet norādījumus.
- 5 Savienojiet pārī zobu birsti un lietotni.
- 6 Izveidojiet savu kontu, izmantojot lietotni, ja tiek pieprasīts, pilnībā atjauniniet programmaparatūru, lai piekļūtu jaunākajiem uzlabojumiem un funkcijām;

- 7 Regulāri tīriet zobus. Jūs esat gatavs sākt savienojumu. Regulāri sinhronizējot zobu birsti ar lietotni, varat saņemt atjauninājumus, kas palīdzēs uzlabot mutes veselību.
- 8 Regulāri sinhronizējiet.
- **Manuāla sinhronizēšana:** savienojiet pārī / savienojiet zobu birsti ar lietotni ik pēc pāris nedēļām, lai izmantotu lietotnes funkcijas/iespējas.
 - **Automātiska sinhronizēšana:** lietotnes iestatīšanas laikā apstipriniet atrašanās vietas noteikšanas atļauju. Apstiprinot atrašanās vietas noteikšanas atļaujas, tālrunis zina, kad tas atrodas jūsu zobu birstes savienojuma diapazonā, un var atjaunināt jūsu birstes datus lietotnē, lai sniegtu jaunākos ieskatus un ieteikumus.

Piezīme. Izmantojot lietotni, pārliecinieties, vai tālruņa Bluetooth režīms ir ieslēgts, lai zobu birste varētu pārsūtīt un atjaunināt jūsu birstes datus lietotnē. Ja jums ir jautājumi par to, kādēļ tiek iegūti jūsu zobu tīrīšanas dati, pārskatiet Sonicare konfidencialitātes ziņojumu, kas pieejams lietojumprogrammas iestatīšanas procesā.


Lietotne – funkcijas


Sonicare lietotne zobu birstei nodrošina pielāgojamus iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm, tostarp tālāk norādītos.

- Intensitātes iestatījumi
- Vadības režīmi
- Adaptīvās intensitātes iespējošana un atspējošana
- Beršanas atgriezeniskās saites iespējošana un atspējošana

Birstes uzgalis

Sonicare Prestige elektriskā zobu birste ir aprīkota ar jauno "Daudzfunkcionālo Premium suku uzgali" (A3). Šis birstes uzgalis ir īpaši izstrādāts, lai nodrošinātu izcilu aplikuma noņemšanu, balināšanu (traipu noņemšanu) un smaganu veselību.

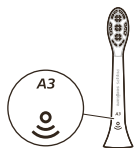

Daudzfunkcionāliem Premium birstes uzgaļi ir aprīkoti ar BrushSync tehnoloģiju (skat. aprakstu zemāk), kā to norāda simbols  sukas uzgaļa apakšdaļā.

Lai izpētītu visu mūsu birstes uzgaļu klāstu, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni, lai iegūtu vairāk informācijas: www.philips.com/toothbrush-heads

Philips Sonicare lietošana

Zobu tīrīšanas norādījumi

- 1 Stingri uzbīdīet sukas uzgaļu rokturim.



Piezīme. Parasti ir redzama neliela atstarpe starp sukas uzgaļu un rokturi. Tā ļauj sukas uzgaļim brīvi vibrēt.


- 2 Samitriniet sarus un uzklājiet mazliet zobu pastas.

- 3 Novietojiet zobu birstes sarus pret zobiem nelielā leņķī (45 grādi). Viegli piespiediet, lai sariņi sasniegtu smaganu līniju vai nedaudz aiz smaganu līnijas.


Piezīme. Visu laiku saglabājiet sukas galviņu saskarē ar zobiem.



- 4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci Philips Sonicare.

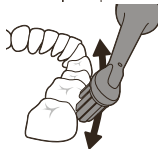


- 5 Mazliet uzspiediet, lai palielinātu Philips Sonicare efektivitāti, un ļaujiet Philips Sonicare zobu birstei tīrīt zobus jūsu vietā.

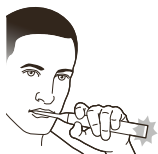

Piezīme. Sariem jābūt nedaudz ieliektiem. Neberziet. Ja izdarīsiet pārāk lielu spiedienu, mainīsies roktura vibrācija un sukas atgriezeniskās saites gaismas indikators mirgos violetā krāsā, lai jūs brīdinātu.

Saudzīgi un lēni virziet sukas uzgali gar zobiem, veicot nelielas kustības uz priekšu un atpakaļ, lai garākie sari aizsniegtos starp zobiem. Turpiniet šo kustību visā zobu tīrīšanas ciklā.

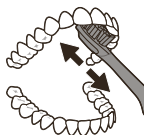

- 6 Lai iztīrītu priekšzobu iekšējās virsmas, daļēji paceliet birstes rokturi uz augšu un veiciet vairākas vertikālas tīrīšanas kustības uz katra zoba.



- 7 BrushPacer sadala tīrīšanas laiku sešos vienādos segmentos un norāda, kad jāpāriet uz nākamo zonu. Segmenti tiek norādīti ar īsu vibrācijas pausi. Zobu birste automātiski apstājas, kad tīrīšanas sesija ir beigusies.



Piezīme. Philips Sonicare zobu birsti var droši izmantot, ja jums ir breketes, dentālās modifikācijas vai ir veikta zobu rekonstrukcija (plombas, kroņi, venīri)


Zobu tīrīšanas režīmi

Elektriskā zobu birste ir iepriekš iestatīta tīrīšanai daudzfunkcionālā uzgaļa režīmā, kas nodrošina zobārstu ieteikto 2 minūšu un sešu segmentu tīrīšanu.

Lai personalizētu tīrīšanas režīmu, varat pielāgot elektriskās zobu birstes iestatījumus Sonicare lietotnē (sk. 'Sonicare lietotne – darba sākšana').

Piezīme. Lai gan režīms netiek parādīts uz zobu birstes roktura, režīmu jebkurā laikā varat atjaunināt Sonicare lietotnē, un jūsu izvēle tiks saglabāta.

Intensitātes iestatījumi

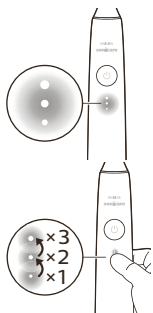


Jūsu elektriskā zobu suka ir aprīkota ar 3 dažādiem intensitātes iestatījumiem:

- Liela intensitāte (trīs indikatori)
- Vidēja intensitāte (divi indikatori)
- Zema intensitāte (viens indikators)

Lai manuāli izvēlētos vēlamo intensitāti, nospiediet intensitātes indikatora gaismas uz roktura, lai izvēlētos opcijas. Intensitātes iestatījumu var mainīt pirms tīrīšanas, tās laikā vai pēc tās.

Piezīme. Intensitātes iestatījumu var pielāgot arī Sonicare lietotnē.

BrushSync tehnoloģija

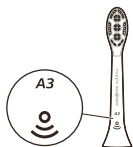

BrushSync tehnoloģija nodrošina suku uzgaļu saziņu ar rokturi, izmantojot mikroshēmu. ☺ simbols birstes uzgaļa apakšdaļā norāda, ka birstes uzgalis ir aprīkots ar šo tehnoloģiju.


BrushSync tehnoloģija nodrošina tālāk norādīto.

- Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators
- BrushSync režīma savienošana pārī (Tongue Care birstes uzgaļiem)

Funkcijas

- SenseIQ
- Spiediena sensora atgriezeniskā saite
- Adaptīvā intensitāte
- Beršanas atgriezeniskā saite
- BrushPacer
- Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators

SenseIQ

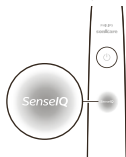

Sonicare ir aprīkota ar SenseIQ tehnoloģiju, ko veido viedās funkcijas, kas novēro jūsu zobu tīrīšanas paradumus (piemēram, kustības, ieradumus, birstes uzgaļa izvēli) un sniedz personalizētu atgriezenisko saiti un ieteikumus.

SenseIQ funkcijas ietver tālāk norādīto.

- Adaptīvā intensitāte
 - Reāllaika atgriezeniskā saite:
 - Beršanas atgriezeniskā saite
 - Spiediena sensora atgriezeniskā saite
 - Personalizēti ieteikumi lietotnē
 - Atgriezeniskā saite lietotnē attiecībā uz tīrīšanu
- SenseIQ ikona uz roktura iedegsies, kad viedās funkcijas būs aktīvas:
- tīrīšanas laikā;
 - lai apstiprinātu iestatījumu iespējošanu un atspējošanu.

Spiediena sensora atgriezeniskā saite

Sonicare zobu birste mēra spiedienu, ko lietojat tīrīšanas laikā, lai pasargātu smaganas un zobus no bojājumiem.

Ja piemērosiet pārlietu lielu spiedienu, rokturis mainīs vibrēšanas veidu un roktura apakšdaļā sāks mirgot (violetā krāsā) birstes atgriezeniskās saites indikators, līdz jūs samazināsiet spiedienu.

Piezīme. Iegādājoties šo produktu, spiediena sensora funkcija ir aktivizēta. Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet nodaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".



Adaptīvā intensitāte

Sonicare zobu birste ir aprīkota ar adaptīvās intensitātes tehnoloģiju, lai pasargātu jūsu smaganas. Ja jūs ilgstoši pielietojat pārāk daudz spiediena, zobu birste automātiski pazemina intensitātes iestatījumu par 1 līmeni. Jūs sajutīsiet nelielu pauzi spiediena atgriezeniskās saites darbībā, un tad intensitāte tiks noregulēta uz zemāku līmeni.

Piezīme. Jūsu produkts tiks piegādāts ar aktivizētu adaptīvo intensitāti. Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet nodaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".

Piezīme. Katrā jaunajā tīrīšanas ciklā tiks atjaunots iepriekš atlasītais intensitātes iestatījums.

Beršanas atgriezeniskā saite

Sonicare zobu birste tīrīšanas laikā mēra kustības, lai noteiktu beršanas paradumus (optimālai metodei skatiet tīrīšanas instrukcijas). Ja tīrīšanas laikā regulāri arī berzīsiet zobus, lietotne ieteiks iespējot beršanas atgriezenisko saiti.

Kad ir aktivizēta beršanas atgriezeniskā saite, roktura apakšā esošais tīrīšanas atgriezeniskās saites indikators iedegas dzintarkrāsā un rokturis maina vibrēšanas veidu, lai atgādinātu, ka jāpārtrauc beršana. Beršanas atgriezeniskās saites indikators izslēgsies, kad pārtrauksiet beršanu.

Piezīme. Pēc noklusējuma beršanas atgriezeniskās saites funkcija ir atspējota. Lai aktivizētu šo funkciju, skatiet sadaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".



BrushPacer




BrushPacer sadala tīrīšanas laiku sešos vienādos segmentos un norāda, kad jāpāriet uz nākamo zonu. Segmenti tiek norādīti ar īsu vibrācijas pausi. Zobu birste automātiski apstājas, kad tīrīšanas sesija ir beigusies.

Piezīme. Izmantojot White+ vai Gum Health režīmus, var tikt pievienoti papildu segmenti. Režīmu aprakstus skatiet Sonicare lietotnē.

Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators

Sonicare zobu birste uzraudzīs jūsu viedās suku uzgaļa nodilumu, izmantojot BrushSync tehnoloģiju, lai izmērītu:

- kopējo spiedienu, ko jūs lietojat zobu tīrīšanas laikā;

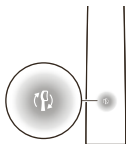

- kopējo laiku, kad esat tīrījis zobus ar suku uzgali. Kad jūsu birstes uzgalis vairs nebūs efektīvs, birstes uzgala maiņas atgādinājuma indikators mirgos dzeltenā krāsā, un rokturis atskaņos signālus dažādā biežumā un tonī, lai norādītu, ka ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgali.

Piezīme. Iegādājoties šo produktu, suku galviņas nomaiņas atgādinājums ir aktivizēts. Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet nodaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".

Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt tālāk norādītās zobu suku funkcijas.

- Adaptīvā intensitāte
- Spiediena sensora atgriezeniskā saite
- Beršanas atgriezeniskā saite
- Suku uzgala maiņas atgādinājuma indikators

Piezīme. Ja deaktivizēsiet spiediena sensoru, arī adaptīvā intensitāte tiks deaktivizēta.

Lietotnē

Lietotnē Sonicare var aktivizēt vai deaktivizēt tālāk norādītās funkcijas.

- Adaptīvā intensitāte
- Beršanas atgriezeniskā saite

Norādījumi, kā izveidot savienojumu ar lietotni (sk. 'Sonicare lietotne – darba sākšana').

Ar rokturi

1. solis: novietojiet rokturi uz lādēšanas statīva.



2. solis: nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu:

Adaptīvā
intensitāte

Sukas uzgaļa
maiņas
atgādinājuma
indikators

Spiediena sensora
atgriezeniskā saite

līdz 3 sekundēm

Līdz
5 sekundēm

Līdz 7 sekundēm



3. solis: atļaidiet ieslēgšanas pogu, kad izdzirdat

1 skaņas signālu

1 un pēc tam
2 skaņas
signālus

1 skaņas signālu,
2 skaņas signālus un
pēc tam 3 skaņas
signālus




SenseIQ
indikators deg 3
sekundes

Birstes uzgaļa
maiņas
atgādinājuma
indikators deg 3
sekundes


SenseIQ indikators un
gaismas gredzens 3
sekundes deg violetā
krāsā

Kopā ar

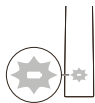

Ja redzat, ka akumulatora indikators mirgo 3 reizes un dzirdat 3 toņus no zema līdz augstam, funkcija ir aktivizēta.


VAI

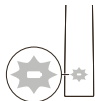


Ja redzat, ka akumulatora indikators 3 reizes mirgo dzeltenā krāsā un dzirdat 3 toņus no augsta līdz zepam, funkcija ir deaktivizēta.

Akumulatora statuss un uzlādēšana


Uzlādēšana lādētāja pamatnē

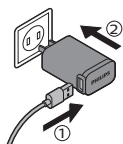

- 1 Pievienojiet uzlādes pamatnes USB vadu sienas USB adapterim un ievietojiet sienas adapteri elektrības kontaktligzdā.

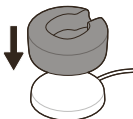

- 2 Novietojiet uzlādes stātvu (caurspīdīgs vāciņš) uz uzlādes pamatnes.

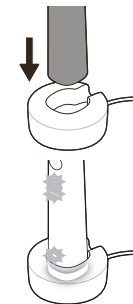


- 3 Novietojiet zobu suku rokturi uz lādētāja.

- a Lai norādītu, ka uzlāde ir veiksmīgi sākta, zobu suka divreiz iepīkstas un gaismas iedegas virzienā uz augšu.
- b Uzlādes laikā akumulatora indikators mirgo baltā krāsā.




- 4 Atstājiet zobu suku uz lādētāja, līdz tā ir pilnībā uzlādēta. Akumulatora indikators nodzisis (beigs mirgot), kad rokturis būs pilnībā uzlādēts.

Piezīme. Sonicare zobu suku pilns uzlādes cikls var ilgt līdz pat 16 stundas.

Uzlāde ar ceļojuma futrāli

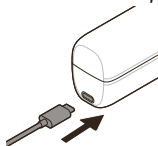

- 1 Iespraudiet USB kabeli ceļojuma futrālī un USB sienas adapterī.
- 2 Pievienojiet sienas adapteri elektrības kontaktligzdaī.

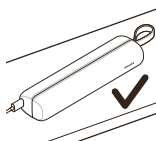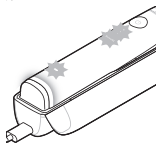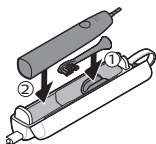

3 Ievietojiet zobu birsti ceļojuma futrālī.

- a Lai norādītu, ka uzlāde ir veiksmīgi sākusies, zobu birste atskaņos divus signālus un indikatori iedegsies secībā no apakšas uz augšu.
- b Lādēšanas laikā akumulatora indikators mirgo baltā krāsā.

4 Atstājiet ceļojuma futrālī pieslēgtu, līdz zobu birste ir pilnībā uzlādēta. Baterijas indikators nodzisis (beigs mirgot), kad rokturis būs uzlādēts.

Piezīme. Lai nodrošinātu labāku stabilitāti, pārliecinieties, ka ceļojuma futrālis ir novietots uz sāniem.

Akumulatora statuss (kad rokturis atrodas uz pieslēgta lādētāja vai ceļojuma futrālī)

Kad rokturis ir novietots lādētājā vai ceļojuma futrālī, akumulatora indikators paziņo akumulatora līmeni.

Akumulatora statuss	Baterijas rādījumi
Uzlāde	Mirgo baltā krāsā
Uzlādēts	Mirgo baltā krāsā 30 sekundes un tad izslēdzas.

Akumulatora statuss (kad rokturis nav novietots uz lādētāja)

Kad zobu birste ir ieslēgta, akumulatora indikators roktura apakšā norāda akumulatora statusu.

Akumulatora statuss	Baterijas rādījumi	Skaņa
---------------------	--------------------	-------


Uzlādēts	ledegas baltā krāsā	-
Daļēji uzlādēts	Mirgo baltā krāsā	-
Reti	Mirgo dzintara krāsā	Pēc tīrīšanas birstes rokturis atskaņo 3 signālus
Tukšs	Mirgo dzintara krāsā	Pēc tīrīšanas birstes rokturis atskaņo 2 signālus

Tīrīšana


Zobu birstes uzgalis un rokturis

Birstes uzgaļus un rokturi var notīrīt, noskalojot tos ar siltu ūdeni.

- 1 Noņemiet zobu suku uzgali no roktura un rūpīgi noskalojiet to.

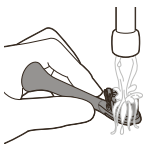


- 2 Noskalojiet visu rokturi, jo īpaši birstes uzgaļa savienojumu. Uzmanīgi notīriet apkārt gumijas blīvei. Vismaz reizi nedēļā.

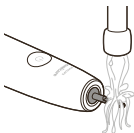

Piezīme. Nespiediet gumijas blīvējumu roktura augšdaļā.

Uzlādes futrālis un lādētājs

- 1 Pirms tīrīšanas atvienojiet lādētāju un ceļojuma futrāli.
- 2 Notīriet lādētāja un ceļojuma futrāļa virsmu ar mitru drānu.

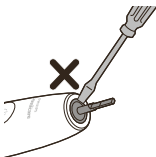

Bīstami! Pirms tīrīšanas atvienojiet USB sienas adapteri un lādētājus.

Brīdinājumi!

- Nemazgājiet produktu vai piederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
- Produkta vai tā piederumu tīrīšanai nelietojiet izopropilspirtu, etiķi, balinātāju vai citus mājas tīrīšanas līdzekļus, jo tas var izraisīt krāsas maiņu.
- Pirms ievietošanas ceļojuma futrālī pārliedzinieties, ka birstes uzgalis un zobu birste ir sausi.
- Nelietojiet ēteriskās eļļas birstes uzgaļa, produkta vai piederumu tīrīšanai, jo tas var izraisīt bojājumus

Glabāšana

Ja negrasāties izmantot ierīci ilgāku laika periodu, atvienojiet to no elektriskās strāvas, notīriet un uzglabājiet to vēsā un sausā vietā, kas nav pakļauta tiešas saules gaismas iedarbībai.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Es nevaru pilnībā piestiprināt birstes uzgali. Starp birstes uzgali un rokturi ir sprauga.		Šāda sprauga tur ir paredzēta, lai birstes uzgalis varētu atbilstoši vibrēt.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Philips Sonicare zobu birstes vibrācija nav tik spēcīga kā iepriekš.	Adaptīvās intensitātes funkcija ir aktivizēta, spiediena sensors ir aktivizēts (sk. 'Spiediena sensora atgriezeniskā saite') vai intensitāte nejauši tikusi mainīta.	Izslēdziet adaptīvās intensitātes un/vai spiediena sensora funkciju (sk. 'Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana') un/vai paaugstiniet intensitātes līmeni, spiežot intensitātes indikatoru, līdz sasniegts vēlamais līmenis (sk. 'Intensitātes iestatījumi').
Manai Philips Sonicare zobu birstei trūkst daļu.	Trūkstošās daļas iegādātajam modelim nav paredzētas.	Piederumi un birstes uzgaļu stiprinājumu skaits ir atkarīgs no iegādātā modeļa numura. Lai noteiktu, kam jābūt iekļautam jūsu roktura komplektā, skatiet HX modeļa numuru roktura apakšā.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Kad izstrādājums tiek likvidēts, iebūvētais uzlādējamais akumulators jāizņem kvalificētam speciālistam. Norādījumus par iebūvēto uzlādējamo akumulatoru izņemšanu var atrast vietnē

www.philips.com/support.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Garantijas ierobežojumi

Starptautiskās garantijas nosacījumi nesedz tālāk minēto.

- Sugas uzgaļi.
- Bojājumi, ko izraisījusi neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas, ļaunprātīgas lietošanas, nolaidības, pārveidojumu vai neatļauta remonta dēļ.
- Parastās darbības radīts nodilums un bojājumi, piemēram, robi, skrāpējumi, švīkas, nolupusi vai izbalējusi krāsa.

EAC

www.philips.com/Sonicare

© 2020 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

© and TMs owned by Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Download on the App Store.

GET IT ON Google Play.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by KPNV is under license.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

D000639649 (22/3/2021)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé