


beurer

MG 202




LT Shiatsu masažo sėdynė
Naudojimo instrukcija

CE

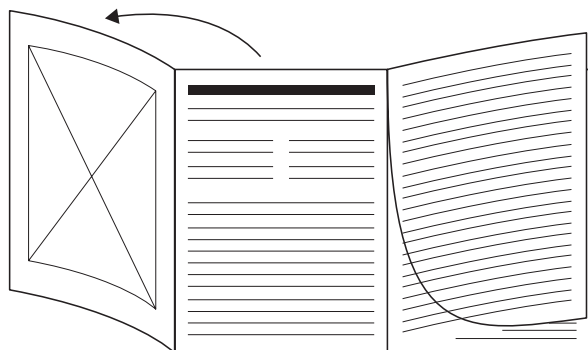

Prieš skaitydami naudojimo instrukcijas, atlenkite 3 puslapį.

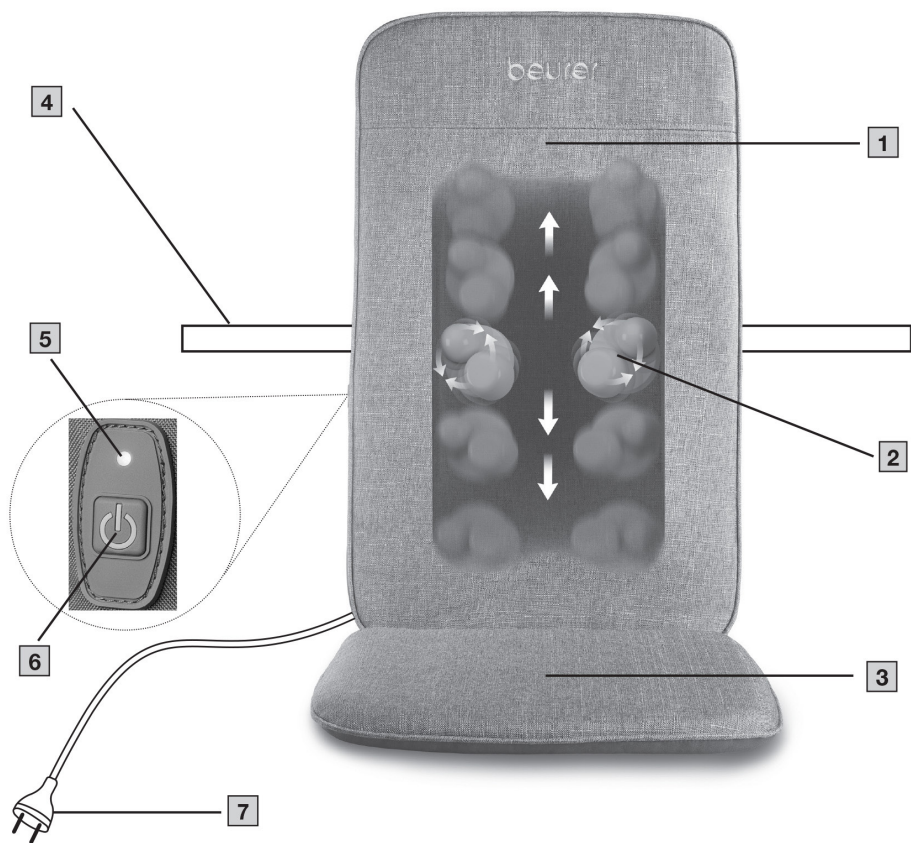



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir laikykitės saugos nurodymų. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Užtikrinkite, kad naudojimo instrukcija būtų prieinama kitiems naudotojams. Perduodami prietaisą kitiems naudotojams kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.



ĮSPĖJIMAS

- Prietaisas skirtas tik buitiniam/ asmeniniam naudojimui, o ne komerciniam naudojimui.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir žmonės su susilpnėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams valyti prietaisą ir atlikti priežiūros darbus, nebent jie yra prižiūrimi.
- Jei prietaiso maitinimo kabelis pažeistas, reikia pakeisti kabelį. Jei kabelio negalima nuimti ir pakeisti, reikia išmesti prietaisą.
- Nedėkite jokių daiktų į prietaiso angas ir besisukančias dalis. Įsitinkinkite, kad judančios dalys galės laisvai judėti.
- Jokiu būdu neardykite prietaiso, nebandykite jo taisyti savarankiškai, nes tokiu atveju negarantuojamas nepriekaištingas prietaiso veikimas. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, galite prarasti teisę į garantinį aptarnavimą.

Turinys

1. Pakuotės turinys	5	8. Ką daryti iškilus problemai?	9
2. Simbolių paaiškinimas	5	9. Utilizavimas.....	9
3. Naudojimas pagal paskirtį.....	6	10. Techniniai duomenys	9
4. Įspėjimai ir saugos pastabos	6	11. Garantija / aptarnavimas	9
5. Prietaiso aprašymas	7		
6. Naudojimas	7		
7. Valymas ir priežiūra	8		

1. Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar nebuvo pažeista įrenginio pakuotė ir įsitikinkite, kad nieko netrūksta.

Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad nėra matomų įrenginio ar jo priedų pažeidimų, pašalin-ta visa pakavimo medžiaga. Jei turite kokių nors abejonių, nesinaudokite įrenginiu ir susisieki-te su pardavėju arba nurodytu klientų aptarnavimo centru.

1 x Shiatsu masažo sėdynė

1 x naudojimo instrukcija

2. Simbolių paaiškinimas

Naudojimo instrukcijoje ar tipinėje lentelėje naudojami šie simboliai:

 ĮSPĖJIMAS
Nurodo galimą pavojų. Kyla pavojus sunkiai susižaloti ar net patirti mirtiną traumą.
 DĖMESIO
Įspėja apie galimą pavojų patirti traumą.
PASTABA
Įspėja apie galimybę patirti materialinę žalą

	Informacija apie gaminį Nurodoma svarbi informacija.
	Perskaitykite naudojimosi instrukciją.
	Naudoti tik patalpoje.
	Utilizuokite pakuotės medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu.
	Ženklinimas pakavimo medžiagai identifikuoti. A = medžiagos santrumpa, B = medžiagos numeris: 1–7 = plastikas, 20–22 = popierius ir kartonas
	JK atitikties ženklas
	Pašalinkite pakuotę ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.
	Prietaisą utilizuokite vadovaudamiesi EC direktyvos reikalavimais dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Gamintojas

	CE ženklas užtikrina, kad šis gaminys atitinka ES ir nacionalines direktyvas.
	Gaminiai akivaizdžiai atitinka EAES Techninių reglamentų reikalavimus.
	Įrenginys turi dvigubą apsaugą ir atitinka 2 apsaugos klasę.
	Importuotojo simbolis

3. Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas išskirtinai nugaros masažui. Jis negali pakeisti medicininio gydymo. Ne-naudokite prietaiso, jei jums galioja vienas ar keli iš toliau išvardintų įspėjimų.



ĮSPĖJIMAS

NENAUDOKITE masažo prietaiso:

- jei turite sveikatos sutrikimų arba sužalojimų masažuojamoje kūno vietoje (pvz., stuburo išvaržų, neužgijusių žaizdų).
- jei esate nėščia,
- miegodami,
- transporto priemonėje,
- gyvūnų masažui,
- dirbdami, jei nenuspėjama reakcija gali būti pavojinga,
- pavartojus medžiagų, kurios riboja jautrumą (pvz., vaistų nuo skausmo, alkoholio),
- ilgiau nei 15 minučių (perkaitimo pavojus), leiskite prietaisui atvėsti bent 15 minučių ir tik tuomet vėl jį naudokite.
- Jei nesate tikri, ar masažuoklis jums tinka, pasitarkite su gydytoju.
- Prieš naudodami Shiatsu masažuoklį turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju, jei:
 - sergate sunkia liga arba neseniai Jums buvo atlikta viršutinės kūno dalies operacija,
 - turite implantuotą širdies stimuliatorių, implantą ar kitą medicinos prietaisą,
 - sergate tromboze,
 - sergate cukriniu diabetu,
 - kenčiate skausmą, kurio priežastis nežinoma.

Įrenginys skirtas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytam tikslui. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar neatsargaus įrenginio naudojimo.

4. Įspėjimai ir saugos pastabos

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas. Nesilaikant toliau pateiktos informacijos, galite susižaloti ar patirti materialinę žalą.



ĮSPĖJIMAS

Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis. Galimas uždusimo pavojus.

Elektros smūgio pavojus



ĮSPĖJIMAS

Kaip ir kiekvieną elektros įrenginį, šį masažuoklį naudokite atsargiai, kad išvengtumėte pavojaus nukentėti nuo elektros iškrovos. Todėl vadovaukitės šiomis naudojimo instrukcijomis:

- Šią masažo sėdynęjunkite tik į prietaiso specifikacijoje nurodytą elektros tinklą.
 - Niekada nenaudokite prietaiso, jei ant jo ar jo priedų yra matomi pažeidimai.
 - Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu.
- Atsiradus smulkiems gedimams ar veikimo sutrikimams, nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Norėdami išjungti prietaisą iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio ar prietaiso. Niekada nelaikykite ir neneškite prietaiso už maitinimo kabelio.

Neleiskite maitinimo kabeliui liestis su karštais paviršiais. Neprispauskite, nelankstykite ir nepersukite kabelio. Nekiškite į jį adatų ar kitų aštrių daiktų.

Stebėkite, kad masažo sėdynė, valdymo pultelis ir maitinimo kabelis neturėtų kontakto su vandeniu, garais ar kitais skysčiais.

Todėl naudokite prietaisą:

- tik sausose patalpose (pvz., niekada nenaudokite vonioje ar saunoje).
- tik sausomis rankomis.

Niekada neimkite į vandenį įkritusio prietaiso. Nedelsdami ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Nenumeskite prietaiso, saugokite jį nuo smūgių.

Remontas

ĮSPĖJIMAS

- Elektros įrenginius gali remontuoti tik specialistai. Netinkamai atliktas remontas gali sukelti pavojų naudotojams. Jei įrenginiui reikalingas remontas, susisiekitė su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliotuoju pardavėju.
- Draudžiama atidaryti vidinį masažinės sėdynės užtrauktuką - užsegimą. Jis naudojamas tik techniniams tikslams.

Gaisro pavojus

ĮSPĖJIMAS

Jei įrenginys naudojamas netinkamai arba nesilaikant šioje naudojimosi instrukcijoje pateiktais nurodymais, kyla gaisro pavojus! Todėl:

- veikiančio prietaiso neuždenkite antklode, pagalve ir pan.
- niekada nenaudokite prietaiso šalia talpyklų su benzinu ar kitomis degiomis medžiagomis.

Aptarnavimas

PASTABA

Kiekvieną kartą pasinaudoję įrenginiu ar prieš jį valydami, išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo elektros tinklo.

- Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas ar besisukančias dalis. Užtikrinkite, kad

judančios dalys galėtų laisvai judėti.

- Nesėskite, negulkite ir nesistokite visu svoriu ant judančių prietaiso dalių, nedėkite ant prietaiso jokių daiktų.
- Saugokite įrenginį nuo aukštos temperatūros poveikio.

5. Prietaiso aprašymas

Susijusius paveikslėlius žr. 3 puslapyje.

Shiatsu masažo sėdynė

- 1 Nugaros atlošas
- 2 Masažo galvutės
- 3 Sėdynė
- 4 Tvirtinimo dirželiai
- 5 Būsenos šviesos diodas
- 6 ĮJUNG./ IŠJUNG./ intensyvumo mygtukas
- 7 Maitinimo kištukas

6. Naudojimas

6.1 Shiatsu masažo sėdynės padėjimas

1. Uždėkite masažo sėdynę vertikaliai ant tinkamo baldų su atlošu (kėdės, sofos ir pan.). Įsitikinkite, kad sėdynė **3** ir nugaros atlošas **1** yra prigludę prie sėdimojo paviršiaus.
2. Jei reikia, masažo prietaisą pritvirtinkite tvirtinimo dirželiais **4** su „velcro“ užsegimais.
3. Elektros tinklo kabelį nutieskite taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti. Maitinimo kištuką **7** įkiškite į tinkamą kištukinį lizdą.

6.2 Naudojimo pradžia

DĖMESIO

Tarp besisukančių masažo galvutėlių **2** ir jų laikiklių nesprauskite jokių kūno dalių, ypač pirštų.



Pirmiausia švelniai prispauskite nugarą prie masažo prietaiso. Įsitikinkite, kad masažo padėtis jums yra maloni, tada lėtai perkeltkite savo kūno svorį į masažo prietaisą. Masažas visada turi būti atpalaiduojantis ir malonus. Jei masažas sukelia diskomfortą ar skausmą, nutraukite masažą, pakeiskite kūno padėtį ar spaudimo intensyvumą.

- Sėdynės padėties parinkimas:** patogiai atsiremkite į shiatsu masažo sėdynę. Būtina sėdėti per vidurį, kad masažo galvutės [2] galėtų judėti į kairę ir į dešinę.
- Prietaiso prijungimas:** įkiškite elektros tinklo kištuką į tinkamą lizdą. Būsenos indikatorius pradės mirksėti žaliai. Dabar prietaisas veikia budėjimo režimu.
- Prietaiso įjungimas:** Paspauskite JUNG. /IŠJUNG./ intensyvumas mygtuką [6]. Būsenos šviesos diodas [5] pradeda šviesti žaliai. Besisukančios masažo galvutės [2] iš pradinės padėties, žemiausioje nugaros dalyje, lėtai juda į viršų, o tada juda aukštyrą ir žemyn nugaros atloše [1].
- Intensyvumo lygio nustatymas:** prietaisas turi du intensyvumo lygius. Norėdami masažo metu persijungti tarp dviejų intensyvumo lygių, paspauskite JUNG. /IŠJUNG./ intensyvumo mygtuką [6]. [5] Žalias būsenos šviesos diodas = mažas intensyvumas
[5] Mėlynas būsenos šviesos diodas = didelis intensyvumas
- Prietaiso išjungimas:** norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite JUNG. /IŠJUNG./ intensyvumo mygtuką [6]. Būsenos indikatorius [5] mirksi žaliai. Masažo galvutės lėtai grįžta į pradinę padėtį.

Priklausomai nuo masažo galvutėlių padėties, grįžimas į pradinę padėtį gali užtrukti kelias sekundes. Palaukite, kol masažo galvutės pasiekia pradinę padėtį. Tik tada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Niekada neišjunkite veikiančio shiatsu masažuoklio. Pirmiausia išjunkite prietaisą ir palaukite, kol masažo galvutės pasiekia pradinę padėtį.



Maksimalus veikimo laikas / automatinis išsijungimas: įjungus shiatsu masažuoklį, automatinis išsijungimas (pagal nutylėjimą) nustatytas po 15 minučių.

PASTABA

Kūno masažuoklį naudokite ne ilgiau kaip 15 minučių. Pasinaudoję prietaisu, leiskite jam atvėsti. Pernelyg stiprus ir ilgai trunkantis raumenų stimuliavimas gali sukelti ne raumenų atsipalaidavimą, o įtampą. Masažą galima bet kada sustabdyti paspaudus JUNG. /IŠJUNG./ intensyvumo mygtuką [6].

7. Valymas ir priežiūra

Valymas



DĖMESIO

- Prieš kiekvieną valymą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Prietaisą valykite tik nurodytu būdu. Nelieskite skysčiams patekti į prietaiso vidų ar jo priedus.
- Nedidelės dėmės galima išvalyti šluoste arba drėgna kempinėle ir, jei reikia, su šiek tiek skysto skalbinių ploviklio. Nenaudokite valymo priemonių su tirpikliais.
- Nenaudokite įrenginio, kol jis visiškai neišdžius.

Priežiūra

Jei neplanuojate prietaiso naudoti ilgą laiką, rekomenduojame jį laikyti originalioje pakuotėje sausoje vietoje, neužkraunant ant jo papildomų daiktų.

8. Ką daryti iškilus problemai?

Problema	Priežastis	Sprendimas
Masažo galvutės  sukasi per lėtai.	Masažo galvutė apkrova yra per didelė.	Sumažinkite spaudimą savo kūnu.
Masažo galvutės  nejuda.	Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo.	Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
	Prietaisas neįjungtas.	Įjunkite prietaisą paspausdami ON / ĮJUNG. / intensyvumo mygtuką  .
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo funkcija.	Kreipkitės į pardavėją ar nurodytą klientų aptarnavimo tarnybą.

8. Utilizavimas

Nebenaudojamą įrenginį neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Įrenginį perduokite į buitinės technikos surinkimo arba perdirbimo punktą. Nebenaudojamą įrenginį išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva). Jei turite klausimų, kreipkitės į vietos komunalinę tarnybą, atsakingą už atliekų tvarkymą.



9. Techniniai duomenys

Maitinimas:	100-240 V~, 50/60 Hz, 18 W
Matmenys:	atlošas: 70,0 x 42,5 x 4,0 cm sėdynė: 40,5 x 43,0 x 3,0 cm
Svoris:	Apie 2,6 kg

10. Garantija/ aptarnavimas

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantijos sąlygas rasite pateiktame garantijos lankstinuke.

