

beurer

SC11BLUE
Green Planet*


Laste elektriline hambahari
Kasutusjuhend




*Rohkem teavet
Beurer Green
Planeti kohta
leiate siit:




CE

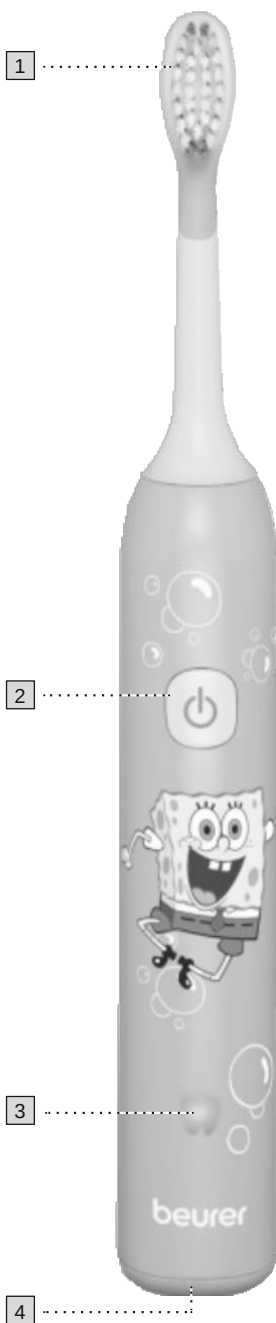


A

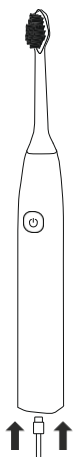


B

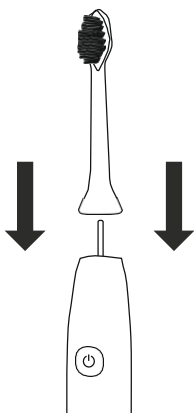


C

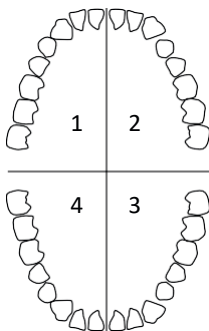

D

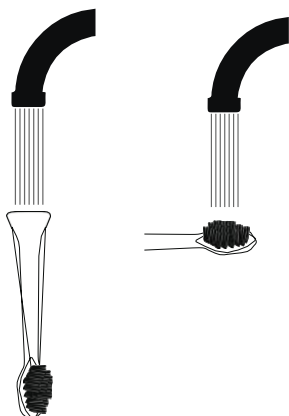

E

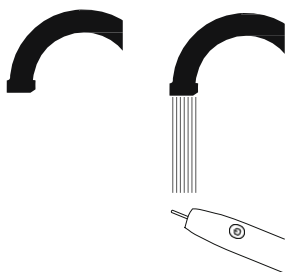

Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles.

Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Seadme edasiandmisel kellelegi teisele tuleb kaasa anda ka kasutusjuhend.

1. HOIATUSED JA OHUTUS- MÄRKUSED

⚠ OHT!

- Hoidke seade ja laadimisjuhe eemal veest ja muust vedelikust.
- Ärge asetage seadet kraanikausi ega veega täidetud vanni lähedale.
- Lapsed (vähemalt 3-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed

või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või kui seadmel on märke kahjustusest või seadme töös esineb tõrkeid. Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.
- Kui toitejuhe läheb katki, tuleb see kasutuselt kõrvaldada.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat ametlikku USB-C laadimisjuhet.
- Ärge kasutage seadet koos toiteadapteriga kraanikausi, vanni, duši ega muude vett või muud vedelikku sisaldavate anumate läheduses – elektrilöögi oht.
- Seadet tohib laadida vaid toiteadapteriga (ei kuulu seadme komplekti), millel on ohutu eriti madal- 5 V ja kuni 1 A.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

Märkused patareide kasutamise kohta

▲ HOIATUS!

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Plahvatusoht! Ärge visake patareisid tulle.
- Patarei lekkimise korral puhastage akusahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid.

⚠ ETTEVAATUST!

- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadijat.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt „Kasutamiseks ettevalmistamine“).
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

2. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Elektriline hambahari
- 2 harjapead
- USB-C laadimisjuhe
- Kasutusjuhend

3. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

**OHT!**

Tähistab võimalikku peatset ohtu.

Selle eiramisel võib tulemus olla surm või raske vigastus.

**HOIATUS!**

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

**ETTEVAATUST!**

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.

**Tooteteave**

Tähtis teave.



Lugege kasutusjuhiseid.



Elektroonilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka



Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka



Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele.

	Sõltumatu sertifitseerimisstandard ringlussevõetud sisuga toodetele
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele
	Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali kood, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp
	Nõuetekohasuse hinnang Ühendkuningriigile
	Kaitseklass III
	Importija sümbol
	Tootja
	Kaitstud ajutise sukeldamise eest. Seadme võib kasta 1 meetri sügavusse vette kuni 30 minutiks
	USB/ Micro-USB ühendus
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Alalisvool
	Pakend on valmistatud ümbertöödeldud materjalist

4. KASUTUSOTSTARVE

Kasutage seadet ainult inimeste hammaste puhastamiseks. Ärge kasutage seda seadet loomadel! Seade ei sobi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 2.

- 1 Harjapea
- 2 Sisse-välja lülitamise / režiiminupp
- 3 LED-ekraan
 - 2 režiimi
 - Aku laetuse tase
- 4 USB-C laadimisjuhe

6. KASUTAMINE

6.1 Ettevalmistused kasutamiseks

Elektrilise hambaharja laadimine **A**

Enne esimest kasutuskorda laadige seade täiesti täis. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Ühendage USB-C laadimisjuhe seadmega.

Ühendage USB-C laadimisjuhe USB-porti või sobivasse pessa, kasutades kaasasolevat adapterit.

2. Laadimise ajal pulseerib LED-tuli punasena. Kui seade on täis laetud, lähevad LED-tuled püsivalt rohelisena põlema.

Harjapea paigaldamine **B**

Asetage harjapea **1** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale. Veenduge, et harjapea **1** on samas suunas kui sisse-välja lülitamise / režiimi nupp **2**.



Indikaatorharjased

Indikaatorharjased kaotavad aja jooksul oma värvi. See sõltub kasutussagedusest ja värvi muutnud harjased tähendavad, et on soovitatav vahetada harjapead **1**.

Soovitame vahetada harjapead **1** iga 3 kuu järel.

Kui harjapea harjased on kulunud, võib harjapead vahetada varem.

6.2 Kasutamise alustamine

1. Elektriline hambahari on lukustatud transpordilukuga, mille peate enne esimest kasutuskorda desaktiveerima. Transpordiluku aktiveerimiseks vajutage sisse-välja / lülitamise nupp **2** alla 5 sekundiks.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage korra sisse-välja lülitamise / režiimi nuppu **2**. Elektriline hambahari vibreerib iga 30 sekundi tagant tuletamaks meelde, et kõiki suu nelja sektorit tuleb puhastada ühekaupa. Elektrilisel hambaharjal on automaatne taimer ja see vibreerib 3 korda iga 2 minuti tagant. **C**. Seade lülitub automaatselt välja 6 minuti pärast.
3. Soovitud režiimi saate valida sisse-välja lülitamise / režiimi nupust **2**. Hetkel valitud režiim kuvatakse vastava režiimi LED-tulega. Saadaval on järgmised režiimid:

Režiim 1 (sinine LED-tuli)	44 000 liigutust minutis
Režiim 2 (lilla LED-tuli)	65 000 liigutust minutis

4. Seadme kasutamise enneaegselt lõpetamiseks vajutage korra sisse-välja lülitamise / režiimi nuppu **2**.

6.3 Transpordilukk

Transpordilukk takistab seadet juhuslikult sisse lülitamast (nt kotis kandes).

Transpordiluku aktiveerimiseks vajutage sisse-välja lülitamise / režiimi nupp **2** alla 5 sekundiks.

Aktiveerimise ajal vilgub LED-tuli 5 korda.

1. Kui seade on lukus ja vajutate korra sisse-välja lülitamise / režiimi nuppu **2**, hakkab LED-tuli samuti rohelisena
2. Transpordiluku desaktiveerimiseks vajutage sisse-välja / lülitamise nupp **2** alla 5 sekundiks. Desaktiveerimise ajal põlevad LED-tuled püsivalt rohelisena. LED-ekraani kustub kohe, kui transpordilukk on desaktiveeritud. Seade on nüüd kasutusvalmis.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Puhastage seadet ja harjapead 13 pärast igat

kasutuskorda. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Tõmmake harjapead **1** üles ja välja.
2. Peske harjapead **1** voolava vee all. Puhastage kindlasti ka harjapea **D** sisemus.
3. Puhastage seadet voolava vee all. Ärge asetage seadet vette. Vesi võib sattuda seadmesse ja seda kahjustada. **E**

8. TARVIKUD JA VARUOSAD

Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest.

Otstarve	Toote number ja/või tellimisnumber
Lainelised pehmed harjapead (3-aastastele ja vanematele) 4 tk	107.38
Lainelised harjapead (6-aastastele ja vanematele) 4 tk	107.39

9. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju.



Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda. Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:

Pb = sisaldab pliid,
Cd = sisaldab kaadmiumit,
Hg = sisaldab elavhõbedat.



Aku eemaldamine

1. Keerake seade kruvikeerajaga lahti. Sisestage kruvikeeraja USB-C porti.
2. Avaldage veidi survet ja keerake vastupäeva. Nüüd saate eemaldada hambaharja otsakatte.
3. Voltige seadme põhi küljele.
4. Tõmmake sisekorpus seadmest välja.
5. Võtke akud korpusest välja.
6. Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

10. TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

Tüüp	SC 11
Mõõtmed	Hambahari: 122 x 27 x 29 mm Reisivutlar: 196 x 28 x 31 mm

Kaal	Seade: 81 g (hambahari + 2 harjapead), reisivutlar: 25 g
Aku: Mahutavus Nimipinge Tüübimääratlus	600 mAh 3,7 V Liitiumioonpatarei
Toiteallikas	5 V  1 A, 5 W
Seadme voolutarve väljalülitatud režiimis	0,1 W

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

11. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400,
klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH
Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Ühendkuningriik:
Beurer UK Ltd.,
Suite 16,
Stonecross Place,
Stonecross Lane North,
WA3 2SH Lowton,
United Kingdom



Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda võidakse muuta ilma etteteatamiseta.

107.37_SC11aquablue-GP_2025-10-23_01_IM1_BEU