

Näonaha koorija

Kasutusjuhend



CE



**Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.**

## **HOIATUS!**

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Seade ei sobi alla 18-aastastele lastele.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Äрге võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

## Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärk esindab kvaliteetseid põhjalikult katsetatud tooteid, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamise, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž, ilutooted, beebikaubad ja ventilatsioon.

Parimate soovidega

Beurer

## Seadme tundmaõppimine

Seadmel FC 76 on mikrodermaabrasiooni tehnoloogia, mis võimaldab nägu professionaalselt koorida.

Kvaliteetse safiirkattega eemaldatakse õrnalt surnud naharakud ning moodne imitehnoloogia parendab märgatavalt naha tekstuuri ja vereringet. Samuti stimuleerib seadme kasutamine rakkude uuenemist, nii et tulemus on peenem ja siledam nahk.










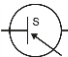

## 1. Seadme komplekti kuuluvad esemed

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Seade FC 76
- Peen otsak
- Jäme otsak
- Peen tarvik
- 20 ühekordset filtrit
- Toiteadapter
- See kasutusjuhend

## 2. Märgid ja sümbolid

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid.

	<b>Hoiatus!</b> Hoiatus, mis märgib kehavigastuse või tervisekahjustuse ohtu		Tootja
	<b>Oluline teave!</b> Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada		<b>Tooteteave</b> Märkus olulise teabe kohta
	<b>Oht!</b> Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikausis, duši all või vannis) – elektrilöögi oht		Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Lugege kasutusjuhiseid		Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
	<b>II kaitseklassi seade</b> Seadmel on topelkaitse		<b>CE-märgistus</b> Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile		Kasutada ainult sisetingimustes
<b>IP20</b>	Kaitstud tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm või suurem		DC vooluühenduse polaarsus
	Toiteadapter, lülitisrežim; lülitisrežiimiga toiteadapter; SMPS		Turvaisolatsiooniga muundur; lühisekaitse

### 3. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanud inimese näol (v.a silmaümbruse piirkond ja suu). Ärge kasutage seda seadet loomadel!

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

### 4. Hoiatused ja ohutusmärkused

#### HOIATUS!

- Pakendimaterjalidest tulenev lämbumisoht. Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Hoidke toiteadapter veest eemal.



#### OHT!

Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikaasis, duši all või vannis) – elektrilöögi oht!

#### HOIATUS!

**ÄRGE** kasutage seadet

- katkisel nahal,
- lahtistel haavadel,
- silmapiirkonnas või suus,
- ühelgi muul kehaosal peale näo (v.a silmapiirkond ja suu),
- kui teil on nahahaigus (nt herpes, südame-veresoonkonna haigused või nahaasvuga seonduvad),
- kui teil on nahavähk,
- kui teil on nahaärritus,
- vahetult pärast päevitamist või päikesepõletuse korral,
- kui tarvitate steroide sisaldavat ravimit,
- kui võtate verd vedeldavaid ravimeid,
- kui teil on hulgiskleroos, diabeet või autoimmuunsüsteemi haigus.

#### HOIATUS!

Seadet tohib kasutada ainult sellega kaasas oleva toiteallikaga ja toiteallikal märgitud pingevahemikus.


## **OLULINE TEAVE!**

Elektriseadmeid tohivad remontida ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see remontida sertifitseeritud töökojas.

## **HOIATUS!**

- Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides (MITTE vannitoas, saunas jms).
- Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pesast välja.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.
- Ärge kinnitage juhett klambritega ega suruge seda millegi vahele.
- Toitejuhe ja -adapter ei tohi puutuda kokku vedeliku ega auruga.

## 5. Seadme kirjeldus

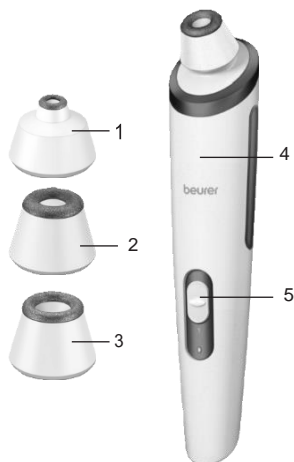

1. Peene safiirkattega peen tarvik sobib väikeste alade (nt ninapiirkond) täpseks hooldamiseks
2. Peene safiirkattega peen otsak, sobib tundlikule nahale
3. Jämeda safiirkattega jäme otsak, sobib probleemsete alade intensiivseks hooldamiseks
4. Käsiseade
5. Sisse-välja lülitamise ja intensiivsustaste 1-2 reguleerimise nupp

## 6. Esmakordne kasutamine

### **Märkus**

Enne seadme kasutamist veenduge, et nägu on puhas, kuiv ja ilma puudri-, kreemi või meigitoodete jääkideta.

## 6.1 Nahatesti tegemine

Tehke nahatest 24 tundi enne seadme kasutamist. Katsetage seadet kõige madalama intensiivsuseastmega väikesel varjatud kaelapiirkonnal. Kui 24 tunni pärast on see piirkond punane või valulik, siis ärge kasutage seadet.

### HOIATUS!


- Ärge kasutage seadet rohkem kui üks kord nädalas.
- Vahetult pärast kasutamist võib nahk olla veidi punane ja väga harvadel juhtudel võivad naha alla tekida väikesed veritsevad täpid.
- Päev enne ja pärast seadme kasutamist hoiduge tegevustest, mis võivad põhjustada higistamist (saun, solaarium ja päevitamine).

### Märkus


Mittetundlikul probleemsel nahal võib seadet kasutada ka kaks korda nädalas (kasutuskordade vahele peab jääma vähemalt 48 tundi).

## 7. Kasutamine


1. Ühendage toiteadapter seadmega ja seejärel pistikupessa.

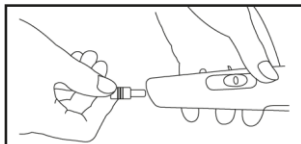


2. Sisestage ühekordne filter seadme otsa.

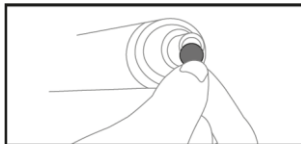

3. Pange tarvik, mida kasutada soovite, käsiseadme otsale.

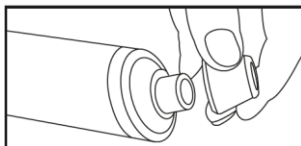

4. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp soovitud intensiivsustasemele.

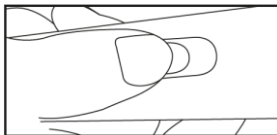


5. Asetage käsiseade oma näo peale ja liigutage seda üle naha. Veenduge, et te ei liiguta käsiseadet üle sama näopiirkonna rohkem kui üks kord. Täpsemat teavet seadme kasutamise kohta saate punktist "6.3 Kasutusosalad".

### **i** Märkus

**Avaldage seadmele survet nii, et tunnete end mugavalt. Pärast kasutamist võib nahk olla veidi punane.**

6. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage see sisse-välja lülitamise nupust välja ja ühendage toiteadapter pistikupesast lahti.
7. Vahetage ühekordset filtrit pärast igat kasutuskorda. Selleks tõmmake tarvik ülaosast välja. Eemaldage pintsettide abil filter.

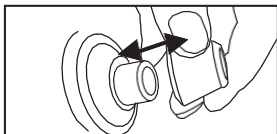


## Kasutusosalad

### **i** Märkus

**Veenduge, et näonahk, millel seadet kasutate, on pingul.** Näonaha saate pingule tõmmata oma vaba käega, külje suunas või allapoole.

### Laup:

Liigutage käsiseadet aeglaselt ja ühtlaselt lauba keskest väljapoole. Veenduge, et te ei kasuta seadet üheski nahapiirkonnas rohkem kui ühe korra.

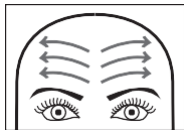

### **Meelekohad:**

Liigutage käsiseadet väljapoole juuksepiiri suunas. Korrake seda nina vasakul ja paremal küljel. Veenduge, et seade on silmadest vähemalt 1 cm kaugusel.



### **Nina:**

Liigutage käsiseadet ninakaare pealt allapoole. Korrake seda nina vasakul ja paremal küljel.



### **Põsed:**

Liigutage käsiseadet väljapoole põskede suunas.



### **Suuümbrus:**

Liigutage käsiseadet mööda ülahuult keskosast vasakule ja paremale. Liigutage käsiseadet ülahuulest ülespoole vasakule ja paremale. Jälgige, et te ei puutuks vastu huuli.



## **8. Puhastamine ja hooldustööd**

- Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku.
- Desinfitseerige tarvikuid pärast igat kasutuskorda tavapärase desinfitseerimisvahendiga.
- Vahetage ühekordset filtrit pärast igat kasutuskorda.
- Puhastage seadet kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Kaitske seadet löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste ja soojusallikate (ahjud, radiaatorid) eest.



## 9. Tarvikud ja varuosad

Varuosad ja kuluvad osad on saadaval veeblehel [www.beurer.com](http://www.beurer.com) või klienditeeninduskeskuses (aadressi leiata kaasasolevast nimekirjast).

Varuosi ja kuluvaid osi saate osta ka seadme müüja käest.

Varuosa	Toote number ja/või tellimisnumber
10 ühekordset filtrit	163.660
Peen otsak	163.767
Jäme otsak	163.766
Suur otsak	163.765

## 10. Mida teha probleemide tekkimisel?

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse.	Sisse-välja lülitamise nupp on katki.	Võtke ühendust klienditeeninduse või edasimüüjaga.
Vool puudub.	Toiteadapter ei ole korralikult vooluvõrku ühendatud.	Ühendage toiteadapter korralikult vooluvõrku.
Vool puudub.	Toiteadaper on rikkis.	Võtke ühendust klienditeeninduse või edasimüüjaga.
Seade ei ima korralikult.	Filter on blokeeritud / pump on rikkis.	Vahetage vana filter uue vastu.
Tarvikud ei koori enam.	Safiirkate on kulunud.	Pöörduge klienditeenindusse või edasimüüja poole, et saada uusi tarvikuid.

## 11. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



## 12.

## 13. Tehnilised andmed

Toiteseadme ping	Sisend: 100 – 240 V AC / 50/60 Hz Väljund: 5 V DC / 1 A / 5 W
Mõõtmed	190 x 40 x 39 mm
Kaal	~ 128 g
Keskmine aktiivne tõhusus	≥ 77,32%
Voolutarve seisurežiimis	≤ 0,049 W

## 14. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Soflinger StraRe 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimusi ja mis hõlmab järgmist.

**Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.**

**Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid**

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostanud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.

Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja nendele garantiitingimustele.

**Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekiri.**

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisataori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist ( teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.

---

**Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),

Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918