

# beurer

## Klaaskaal

**GS27, GS28, GS37 GS210, GS211, GS10, GS120  
(763.03, 763.05, 766.01, 766.05, 766.08, 743.03,  
756.40, 756.49, 756.30)**

## Kasutusjuhend

## Lugupeetud klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kõrgväärtuslikud ja põhjalikult testitud kvaliteettooted, mis soojendavad, mõõdavad kehakaalu, vererõhku, kehatemperatuuri ja pulssi, samuti seadmed kehahoolduseks, massaažiks ning õhuniiskuse reguleerimiseks ja mõõtmiseks.

Palun lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saaksid.

Lugupidamisega

Teie Beureri meeskond

### 1. Huvitavaid fakte

Korrektne kaalumine.

Võrreldavate tulemuste saamiseks kaaluge ennast võimalusel alati ühel ja samal kellaajal (soovitavalt hommikul), pärast tualetis käimist, tühja kõhuga ja ilma riieteta.



### 2. Oluline info – hoidke hilisemaks kasutamiseks alles

#### Ettevaatust!

- Tähelepanu! Ärge astuge kaalule märgade jalgadega või ajal, kui kaalu pind on niiske! Vastasel korral võite libiseda.
- Kaitske kaalu põrutuste, niiskuse, tolmu, kemikaalide ja suurte temperatuurikõikumiste eest ning hoidke seda soojusallikatest (nt ahjudest ja radiaatoritest) kaugemal.
- Seadet tohivad remontida ainult Beureri klienditeeninduse või meie volitatud edasimüüjate tehnikud. Enne kaebuse esitamist veenduge, et patareid pole tühjaks saanud.
- Kõik kaalud vastavad EÜ direktiivis 2004/108/EÜ ja selle lisades esitatud nõuetele. Kui Teil on seadme kasutamise kohta täiendavaid küsimusi, siis võtke palun ühendust Beureri klienditeenindusega või Teie seadme maaletoojaga.
- Aeg-ajalt tuleks kaalu niiske lapiga puhastada. Ärge kasutage puhastamiseks kangeid puhastuslahuseid ega kastke kaalu vette.
- Kaal on mõeldud koduseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada haiglates ega ärilistel eesmärkidel.
- Algselt on kaalu mõõtühikuks seatud kg. Kaalu taga asuva lüliti abil saate seadistust muuta nii, et kaalu näidataks naeltes (pounds, lb) või kivides (=14 naela, stones, Sb).
- Ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid viige see vastavalt direktiivile 2002/96/EÜ – WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) loodud kogumispunkti. Küsimuste tekkimise korral võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavate ametnikega.



### 3. Kasutamine

Seda kaalu tohib kasutada vaid inimeste kaalumiseks. Kaalu maksimumnäit on 150 kilogrammi (330 naela).

#### 3.1 Patareid


Eemaldage patareikambri katte isoleerriba ja patarei kaitsekile (kui vaja) ning sisestage patarei, järgides skeemil näidatud polaarsust. Kui kaal ei hakka tööle, siis võtke patarei



välja ja sisestage uuesti. Kui patarei hakkab tühjaks saama, siis ilmub ekraanile kiri „Lo“ ja kaal lülitub automaatselt välja. Sel juhul tuleb patarei välja vahetada (1 x 3V liitiumpatarei CR2032).

Kasutatud ja vedelikust täielikult tühjenenud laetavad patareid tuleb viia vastava erimärgistusega ohtlike jäätmete konteinerisse, kogumispunkti või kasutatud patareisid vastu võtvate elektriseadmete müüjate kätte. Patareide olmejäätmete hulka viskamine on seadusega keelatud.

**Märkus:** Keskkonda kahjustavaid aineid sisaldavatel patareidel kasutatakse järgmisi tähisteid: Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.

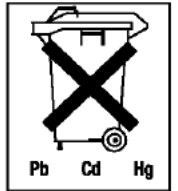

Asetage kaal kindlale siledale pinnale; kindel ja tugev põrandakate on täpsete kaalumistulemuste olulisimaks eelduseks.

### 3.2 Kaalumine

Asetage kaal tugevale tasapinnalisele (ilma vaipkatteta) põrandale; tugev aluspind on täpsete mõõtmistulemuste saamise huvides väga oluline.

Kaalu vibreerimissensori aktiveerimiseks astuge korraks tugeva sammuga kaalu peale. Ekraanile (joonis 1) ilmub kiri „0.0“ (joonis 2), mis tähistab ühtlasi ka seda, et kaal on automaatselt oma mõõtmistäpsust kontrollinud.

Nüüd on kaal kaalumiseks valmis. Seiske kaalul liikumatult nii, et Teie keharaskus oleks jalgade vahel ühtlaselt jaotunud. Kaal alustab kaalumist koheselt. Kaal lülitub välja 10 sekundit pärast seda, kui olete sellelt maha astunud. Kuni välja lülitumiseni jääb kaalumistulemus ekraanile. Enne kaalule astumist lülitage kaal alati sisse ja oodake kuni ekraanil kuvatakse kiri „0.0“ (joonis 2).



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3

Maaletooja : Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918, EESTI