





LV Dienas gaismas terapijas lampa
Lietošanas norādījumi 4

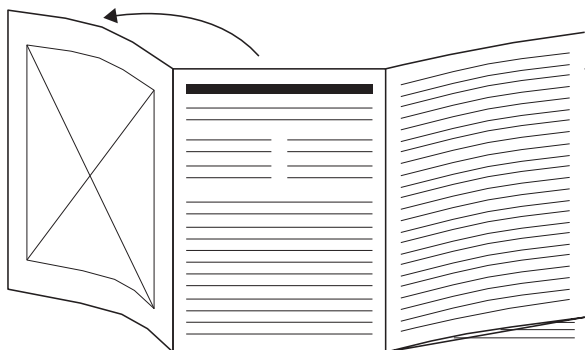

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiet 3. lappusi.

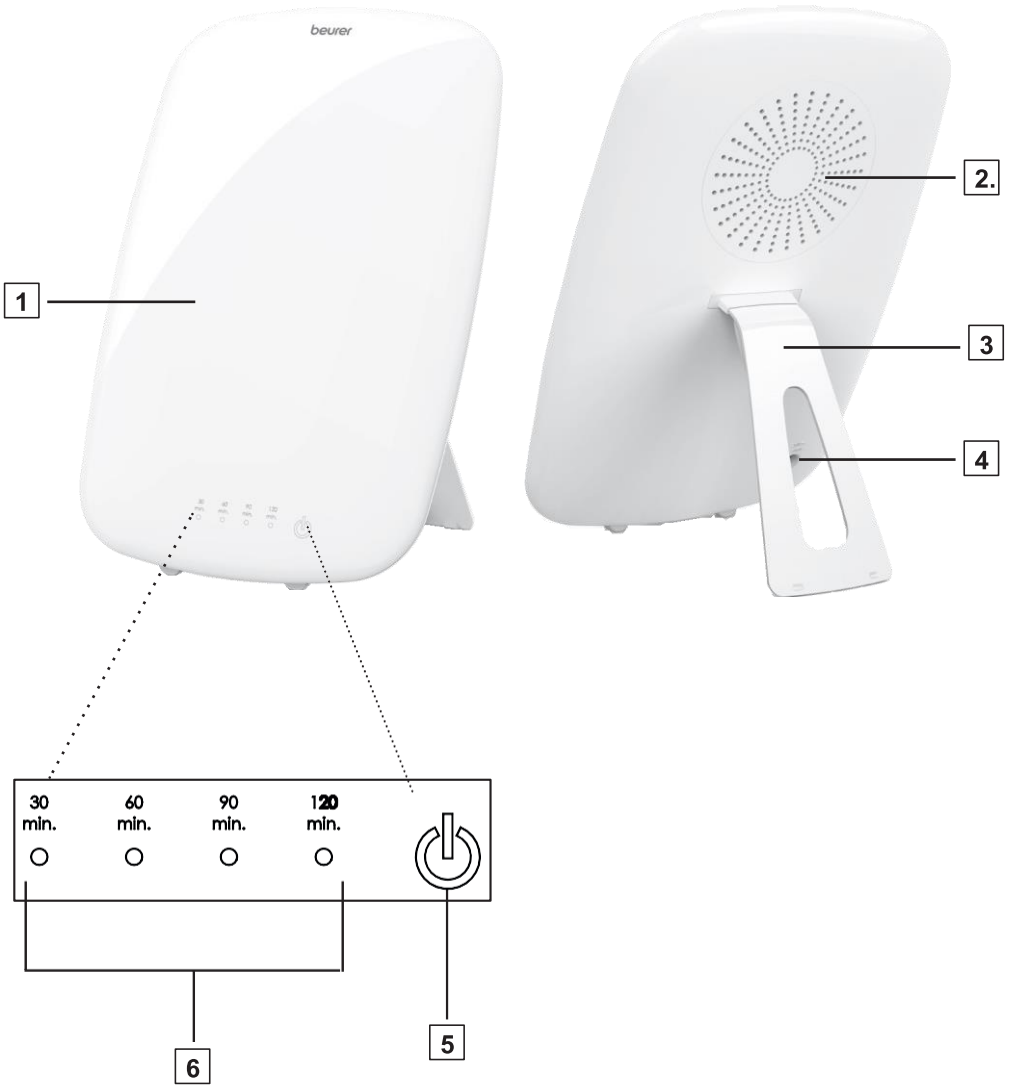



Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Padariet lietošanas instrukcijas pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.

Saturs

1. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI	5
2. PAREDZĒTAIS MĒRĶIS	6
3. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	6
4. KOMPLEKTĀCIJA	8
5. IERĪCES APRAKSTS.....	8
6. SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA.....	8
7. LIETOŠANA.....	9

8. TĪRĪŠANA UN APKOPE	10
9. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS	10
10. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?	11
11. UTILIZĀCIJA.....	12
12. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	13
13. GARANTIJA.....	14

Kāpēc izmantot dienas gaismas terapijas lampu?

Kad rudenī dienasgaismas stundas kļūst ievērojami īsākas un ziemā cilvēki arvien biežāk uzturas telpās, var parādīties gaismas trūkuma sekas. To bieži vien dēvē par "ziemas depresiju". Simptomi var izpausties dažādos veidos:

- Nelīdzsvarotība - Nepieciešamība vairāk gulēt
- Nomākts noskaņojums - Apēdītes zudums
- Enerģijas trūkums un apātiskums - Grūtības koncentrēties
- Vispārēja slikta pašsajūta

Šo simptomu cēlonis ir fakts, ka gaisma, jo īpaši saules gaisma, ir dzīvībai nepieciešama un tieši ietekmē cilvēka organismu. Saules gaisma netieši kontrolē melatonīna veidošanos, kas nonāk asinīs tikai tumsas laikā. Šis hormons parāda organismam, ka ir pienācis laiks gulēt. Tāpēc mēnešos, kad ir mazāk saules gaismas, veidojas vairāk melatonīna, tāpēc no rītiem ir grūti piecelties, jo organisma funkcijas ir samazinātas. Lietojiet dienas gaismas terapijas lampu uzreiz pēc pamošanās (t. i., pēc iespējas agrāk), lai apturētu melatonīna veidošanos un uzlabotu garastāvokli.

Gaismas trūkums arī kavē laimes hormona serotonīna, kas būtiski ietekmē mūsu pašsajūtu, veidošanos. Tādējādi gaismas iedarbība rada kvantitatīvas izmaiņas smadzeņu hormonos un neiromediatoros, kas ietekmē mūsu aktivitātes līmeni, sajūtas un pašsajūtu. Lai kompensētu šādu hormonālo nelīdzsvarotību, dienas gaismas terapijas lampas var radīt piemērotu dabiskās saules gaismas aizstājēju.

Medicīnā dienas gaismas terapijas lampas tiek izmantotas, lai novērstu gaismas trūkuma ietekmi. Dienas gaismas terapijas lampas imitē dienas gaismu, kas pārsniedz 10 000 luksu. Šī gaisma var ietekmēt cilvēka organismu, un to var izmantot kā ārstēšanas vai profilakses līdzekli. Tomēr ar parasto elektrisko gaismu nepietiek, lai ietekmētu hormonālo līdzsvaru. Tas ir tāpēc, ka labi apgaismotā birojā gaismas intensitāte ir, piemēram, tikai 500 luksu.

1. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	BRĪDINĀJUMS Brīdinājums par traumas vai kaitējuma veselībai risku.		CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.
	SVARĪGI Drošības norādījums, kas liecina par iespējamu ierīces/piederuma bojājuma risku.	 Uzglabāšan	Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra un mitrums
	Informācija par produktu Svarīga informācija	 Ekspluatācija	Pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra un mitrums
	Ievērojiet lietošanas norādījumus Pirms darba uzsākšanas un/vai ierīču vai iekārtu lietošanas izlasiet instrukcijas.	IP21	Aizsargāts pret cietiem 12,5 mm diametra un lielākiem priekšmetiem, kā arī pret vertikāli krītošiem ūdens pilieniem.
		IP24	Aizsardzība pret cietiem priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm, un pret ūdens šļakatām no visiem virzieniem.
	Ražotājs		Sērijas numurs
	II aizsardzības klases ierīce Ierīcei ir dubultā izolācija, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei.		Iznīciniet iepakojumu videi draudzīgā veidā
	IESL/IZSL		Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla kods, B = materiāla numurs: 1-7-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons
	Medicīniska prece		Paredzēti lietošanai tikai iekšējās
	Piederuma numurs		Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Ražošanas datums		Importētāja simbols
	Atmosfēras spiediena ierobežojums		Unikāls ierīces identifikators (UDI) unikālai produkta identifikācijai.
	Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEIA		Līdzstrāva Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu
	Partijas kods		Veids
	Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.		Pilnvarotais pārstāvis Šveicē

2. PAREDZĒTAIS MĒRĶIS

Mērķis

Dienas gaismas terapijas lampa ir paredzēta, lai kompensētu gaismas trūkuma, jo īpaši saules gaismas, ietekmi un atvieglotu ziemas sezonālos afektīvos traucējumus, garstāvokļa traucējumus un diennakts fāzes miega traucējumus.

Pacientu populācija

Pieaugušais un bērns vecāks par 3 gadiem.

Paredzētie lietotāji

Ierīces lietošanai nav nepieciešamas īpašas zināšanas vai profesionālas iemaņas. Pacients ir operators, izņemot gadījumus, kad pacientam nepieciešama īpaša palīdzība.

Indikācijas

Ierīce imitē dienas gaismu, lai atvieglotu sezonālo vai garstāvokļa traucējumus.

3. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



BRĪDINĀJUMS

- Dienas gaismas terapijas lampa ir paredzēta tikai cilvēka ķermeņa apstarošanai.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.
- Pārliecinieties, ka dienas gaismas terapijas lampa ir novietota uz stabila pamata.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādām tīkla spriegumam, kas norādīts uz tipa plāksnītes.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī un nelietojiet to vannas istabā.
- Nelietojiet dienas gaismas terapijas lampu dzīvniekiem!
- Nelietojiet ierīci, ja pacients lieto fotosensibilizējošus medikamentus vai augus.
- Neizmantojiet ierīci:
 - bērniem līdz 3 gadu vecumam,
 - cilvēkiem, kas nejutīgi pret karstumu,
 - cilvēkiem ar slimības izraisītiem ādas bojājumiem,
 - cilvēkiem, kuriem ir stāvoklis, kas var padarīt viņu acis jutīgākas pret fototoksicitāti,
 - cilvēkiem, kam ir gaismjūtīga āda.
- Uzglabāt iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā - pastāv nosmakšanas risks!
- Ja ierīce ir silta, neaizsedziet to, neiesaiņojiet un nenovietojiet glabāšanā.
- Pirms pieskaršanās ierīcei vienmēr atvienojiet strāvas adapteri un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām, kad tā ir pieslēgta pie tīkla, un nepakļaujiet ierīci ūdens šļakatām. Darbiniet ierīci tikai tad, ja tā ir pilnīgi sausa.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla adapteri ievietojat un izņemat tikai ar sausām rokām un ka ieslēgšanas/izslēgšanas pogu nospiežat tikai ar sausām rokām.
- Turiet strāvas kabeli tālu no karstiem priekšmetiem un atklātas liesmas.
- Aizsargājiet ierīci no spēcīgiem triecieniem.
- Neizvelciet strāvas adapteri no kontaktligzdas, turot aiz vada.
- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojājumu pazīmes vai tā nedarbojas pareizi. Šādos gadījumos sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.
- Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma kabelis ir bojāts, kabelis ir jānūnina. Ja tas nav noņemams kabelis, ierīce ir jānūnina.
- Atvienošana no barošanas tīkla tiek garantēta tikai tad, ja tīkla adapteris ir atvienots no tīkla.

- Neizmantojiet ierīci uzliesmojošas anestēzijas gāzes savienojumu ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta, lai izvairītos no ugunsgrēka vai apdegumu riska.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz trīs gadu vecumam. Bērni, kas jaunāki par trim gadiem, ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespējās ar ierīci, lai izvairītos no ugunsgrēka un apdegumu riska.
- Ja ierīces barošanai izmantotajai sienas kontaktligzdai ir slikti savienojumi, ierīces kontaktdakša kļūst karsta. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta pareizi uzstādītā sienas kontaktligzdā, lai izvairītos no ugunsgrēka un apdegumu riska.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, lai novērstu lampas bojājumu risku.
- Šai ierīcei nav jāveic kalibrēšana, profilaktiskās pārbaudes vai apkope.
- Jūs nevarat remontēt šo ierīci. Ierīcē nav detaļu, ko jūs varat salabot.
- Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē bez ražotāja atļaujas.
- Ja ierīcei ir veiktas modifikācijas, jāveic rūpīgas pārbaudes un testi, lai nodrošinātu ierīces turpmāku drošu lietošanu.
- Lai izvairītos no nosmakšanas un sapņšanās, turiet kabeli maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai pašam pacientam. Ierīce un piederumi jālieto saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.

Vispārīgas piezīmes



BRĪDINĀJUMS

- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar smagu depresiju vai cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai cilvēki, kam trūkst pieredzes vai zināšanu.
- Diabēta slimniekiem un cilvēkiem, kuri slimo ar tīklenes slimībām, pirms dienas gaismas terapijas lampas lietošanas jāpārbaudās pie acu ārsta.
- Neizmantojiet ierīci, ja ciešat no acu slimībām, piemēram, kataraktas, glaukomas, redzes nerva slimībām vai stiklveida ķermeņa iekaisuma.
- Lūdzu, nelietojiet ierīci, ja nesēn veikta acu operācija vai diagnosticēta acu slimība, kuras dēļ ārsts ir ieteicis izvairīties no spilgtas gaismas.
- Ierīci nedrīkst lietot cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem līdz 3 gadu vecumam vai cilvēkiem ar samazinātu jutību pret karstumu (cilvēkiem ar ādas izmaiņām slimības dēļ).
- Smagi SAD gadījumi jebkurā gadījumā ir rūpīgi jāuzrauga ārstam.
- Pirms dienas gaismas terapijas lampas lietošanas vienmēr konsultējieties ar ārstu, ja lietojat medikamentus, piemēram, pretsāpju zāles, medikamentus augsta asinsspiediena mazināšanai vai antidepresantus.
- Ja jums ir kādas bažas par veselību, konsultējieties ar savu ģimenes ārstu!
- Pirms ierīces lietošanas noņemiet visu iepakojuma materiālu.
- Garantija neattiecas uz gaismas avotiem.
- Ja ierīce ir glabāta vai nesēn transportēta, pirms lietošanas ļaujiet tai vismaz divas stundas nostāvēties istabas temperatūrā.
- Tīkla adapteris ir daļa no ME aprīkojuma.
- Pārbaudiet, vai pēc ieslēgšanas nerodas gaismas mirgošana, tumši laukumi/ēnas un citas anomālijas. Ja ir kādas novirzes, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas informācijas līniju.
- Šīs ierīces lietošanas laikā pacientam nevar veikt magnētiskās rezonanses skenēšanu.
- Ziņojiet par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar ierīci, vietējai kompetentajai iestādei un ražotājam vai Eiropas pilnvarotajam pārstāvim (EK REP) Vigilances kontaktpunktam: <https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts>.
- KTR ir Ķīnas Tautas Republikas saīsinājums.

Remonta instrukcija

SVARĪGI!

- Neatveriet ierīci. Nekad nemēģiniet labot ierīci saviem spēkiem! Tas var izraisīt nopietnas traumas. Šo norādījumu neievērošana anulē garantiju.
- Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirgotāju.

4. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārlicinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

- 1 dienas gaismas terapijas lampa
- 1 statīvs
- 1x lietošanas instrukcijas komplekts
- 1 strāvas adapteris

5. IERĪCES APRAKSTS

Atbilstošie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

 1 Fluorescējošais ekrāns

 4 Tīkla adaptera savienotājs

 2 Ierīces korpuss

 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

 3 Aizmugurējā daļa Statīvs

 6 Taimera iestatījums

6. SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

Izņemiet ierīci no plastmasas iepakojuma. Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Ja uz ierīces pamanāt bojājumus vai defektus, nelietojiet to un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai savu piegādātāju.

Pievienojiet statīvu

Pievienojiet statīvu  ierīces korpuss aizmugurē.

Ierīces iestatīšana

Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Atrāšanās vieta jāizvēlas tā, lai attālums starp lietotāju un ierīci būtu no 25 cm līdz 45 cm. Šajā attālumā lampa ir visefektīvākā.

Strāvas savienojums

- Lai novērstu iespējamus ierīces bojājumus, dienas gaismas terapijas lampu drīkst lietot tikai kopā ar šeit aprakstīto tīkla adapteri.
- Ievietojiet strāvas adapteri šim nolūkam paredzētajā savienotajā dienas gaismas terapijas lampas aizmugurē. Tīkla adapteri drīkst pieslēgt tikai tādām tīkla spriegumam, kas norādīts uz tipa plāksnītes.
- Pēc dienas gaismas terapijas lampas lietošanas vispirms atvienojiet strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas un pēc tam atvienojiet to no dienas gaismas terapijas lampas.

Piezīme:

Pārlicinieties, ka uzstādīšanas zonas tuvumā ir elektriskā tīkla kontaktligzda. Izvietojiet tīkla kabeli tā, lai neviens uz tā neuzkāptu.

7. LIETOŠANA

1	ievietojiet tīkla adapteri savienotājā.										
2.	Lampas ieslēgšana Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu [5]. Nākamreiz ieslēdzot ierīci, tā sāks darboties ar saglabāto spilgtuma līmeni un darbības laiku.										
3	LED displejs / taimeris TL 85 dienas gaismas terapijas lampa ar 4 gaismas diodēm norāda pašreizējo darbības laiku. Darbības laiku var iestatīt šādos 4 līmeņos. Taimera funkcija nav aktīva, kad lampa tiek ieslēgta pirmo reizi. Lampa darbojas, līdz tā atkal tiek izslēgta vai tiek iestatīts darbības laiks (taimeris = 0 min). Lai izmantotu taimeri, iestatiet vēlamo līmeni no 1 līdz 4, īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu [5]. 1. līmenī noteikts 30 minūšu darbības laiks. Pārējie līmeņi ir šādi: <table border="1"><thead><tr><th>Darbības laiks</th><th>Līmenis (iedegto LED skaits)</th></tr></thead><tbody><tr><td>30 minūtes</td><td>1</td></tr><tr><td>60 minūtes</td><td>2</td></tr><tr><td>90 minūtes</td><td>3</td></tr><tr><td>120 minūtes</td><td>4</td></tr></tbody></table> <p>Pēc šī darbības laika lampa automātiski izslēdzas, pakāpeniski kļūstot tumšāka. Lai deaktivizētu taimera funkciju, uz īsu brīdi pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai [5], līdz LED indikatorā nodziest.</p>	Darbības laiks	Līmenis (iedegto LED skaits)	30 minūtes	1	60 minūtes	2	90 minūtes	3	120 minūtes	4
Darbības laiks	Līmenis (iedegto LED skaits)										
30 minūtes	1										
60 minūtes	2										
90 minūtes	3										
120 minūtes	4										
4	Gaismas baudīšana Atrodieties pēc iespējas tuvāk lampai, no 25 cm līdz 45 cm attālumā. Terapijas laikā varat turpināt veikt ikdienas aktivitātes, tostarp lasīt, raksīt, zvanīt pa tālruni utt. <ul style="list-style-type: none">• Īsu brīdi skatieties tieši gaismā, jo tā tiek absorbēta un iedarbojas caur acīm/redzes tīklieni.• Izmantojiet dienas gaismas terapijas lampu tik bieži, cik vēlaties. Tomēr terapija ir visefektīvākā, ja gaismas terapiju veicat vismaz 7 dienas pēc kārtas saskaņā ar norādītajiem laikiem.• Visefektīvākais dienas laiks, kad jāveic procedūra, ir no 6.00 līdz 20.00, un mēs iesakām lietot ierīci 2 stundas dienā.• Tomēr visu darbības laiku neskatieties tieši gaismā, jo tas var izraisīt pārmērīgu tīklenes stimulāciju.• Sāciet ar īsāku terapijas laiku un nedēļas laikā pakāpeniski palieliniet tās ilgumu. <p>i Piezīme Pēc pirmajām lietošanas reizēm var rasties sāpes acīs un galvassāpes. Šīm sāpēm vajadzētu izzust turpmāko seansu laikā, kad nervu sistēma pierod pie jaunajiem stimuliem.</p>										

5 Kas jāņem vērā

Mēs iesakām lietošanas laikā no sejas līdz lampai ievērot 25 līdz 45 cm attālumu. Terapijas laiks ir atkarīgs no attāluma:

Luksi	Attālums	Darbības laiks
10,000	Apt. 25 cm	30 minūtes
5000	Apt. 35 cm	1 stunda
2,500	Apt. 45 cm	2 stundas

Principā:

Jo tuvāk esat gaismas avotam, jo īsāks ir terapijas laiks.


6 Īpaši spilgta gaisma

Šī dienas gaismas terapijas lampa ir īpaši spilgta (14 000 luksu aptuveni 20 cm attālumā).

7 Gaismas baudišana ilgāku laiku

Atkarībā no jūsu individuālajām vajadzībām atkārtojiet procedūru vismaz 7 dienas pēc kārtas tumšākos gada periodos vai ilgāk. Ja iespējams, procedūra jāveic no rīta.

8 Lampas izslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Izslēdzas gaismas diodes. Atvienojiet strāvas adapteri no elektrotīkla.



SVARĪGI!

Pēc lietošanas lampa ir karsta. Pirms lampas novietošanas un/vai iesaiņošanas ļaujiet tai pietiekami atdzist.

8. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Ierīce laiku pa laikam jānotīra.



SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka ierīcē nenokļūst ūdens!
Pirms tīrīšanas ierīce katru reizi jāizslēdz, jāatvieno no elektrotīkla un jāļauj tai atdzist.
- Netīriet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā. Ierīces tīrīšanai izmantojiet nedaudz mitru drānu.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām, kad tā ir pieslēgta pie tīkla, un nepakļaujiet ierīci ūdens šļakatām. Darbiniet ierīci tikai tad, ja tā ir pilnīgi sausa.

Uzglabāšana

Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet, atvienojiet to un uzglabājiet sausā vietā, bērniem nepieejamā vietā. Ievērojiet glabāšanas norādījumus, kas sniegti nodaļā "Tehniskās specifikācijas".

9. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS

Lai iegādātos piederumus un rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar servisa adresi savā valstī (skatiet servisa adrešu sarakstu). Piederumi un rezerves daļas ir pieejamas arī mazumtirgotāju veikalos.

10. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?




Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīces apgaismojums neiedegas.	Izslēgta ieslēgšanas/izslēgšanas poga <input type="checkbox"/>	Ieslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
	Nepienāk strāva	Pareizi pievienojiet tīkla adapteri.
	Nepienāk strāva	Ir bojāts strāvas adapteris. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai mazumtirdzotāju.
LED ir beidzies to kalpošanas laiks. Bojātas LED diodes.		Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirdzotāju.

11. UTILIZĀCIJA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu iznīcināšanu. Lūdzu, utilizējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm. Veco ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu var noskaidrot, piemēram, vietējās vai pašvaldības iestādēs, vietējos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos vai pie sava mazumtirgotāja.

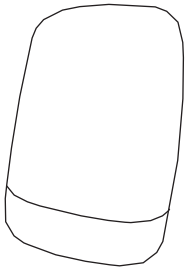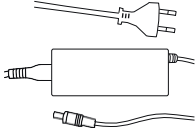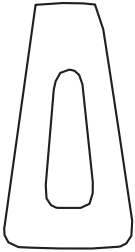

Komponents	Utilizācija Apraksts	Foto
Ierīce	Sastāvdaļas galvenokārt ir PC un ABS. Tās visas atbilst RoHS un REACH prasībām, un tās visas var droši iznīcināt.	
Strāvas adapteris	Adapteris galvenokārt ietver plastmasas un elektriskās detaļas, Tās visas atbilst RoHS un REACH prasībām, un visas tās var droši iznīcināt.	
Piederumi	Tās visas atbilst RoHS un REACH prasībām, un tās visas var droši iznīcināt. Tās visas atbilst RoHS un REACH prasībām, un tās visas var droši iznīcināt.	

12. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Veids	GCE504
Modeļa Nr.	TL 85
Izmēri (G x P x A)	30 x 23.5 x 45.2 cm
Svars	Apt. 1340 g
Gaisma	LED diodes
Izejas jauda	maks. 60 vati
CRI	Vismaz 90
Zema intensitāte	10.000 luksu (aptuveni 25 cm attālumā)
Starojums	Starojums ārpus redzamā diapazona (infrasarkanais un UV starojums) ir pietiekami zems, lai neradītu acu vai ādas bojājumus.
Ekspluatācijas apstākļi	0°C līdz +35°C, 15 - 90% relatīvais mitrums, 700 - 1060 hPa apkārtējais spiediens.
Transportēšanas un glabāšanas apstākļi	-20°C līdz +60°C, 15 - 90% relatīvais mitrums, 700 - 1060 hPa apkārtējais spiediens.
Produktu klasifikācija	Aizsardzības klase II, IP21
Piederumi	Tīkla adapteris, lietošanas instrukcija, statīvs
LED gaismas diodes krāsu temperatūra	6500K +/-400 Kelvinu
Īso viļņu garuma sliekšnis	460 – 670 Nm
Maksimālā gaismas jauda	52,27 W / m ²
Paredzamais ierīces kalpošanas laiks	10.000 stundas

TL 85 maksimālā spožuma jauda

Starojuma jauda	Riska grupa klasificēta saskaņā ar IEC 62471	Maksimālā vērtība
EUVA: Acu UV-A	Atbrīvotā grupa	4.393e-5
ES: Aktīvais UV starojums ādai un acīm	Atbrīvotā grupa	2.794e-6
EIR: Infrasarkanā starojuma bīstamības robežvērtības acīm	Atbrīvotā grupa	4.631e-1
LIR: Tīklenes termiskais (viegls redzes kairinājums)	Atbrīvotā grupa	1.491e-1
LB: Zilā gaisma	Atbrīvotā grupa	7.057e0
LR Tīklenes termiskais	Atbrīvotā grupa	9.327e1

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

Sērijas numurs atrodas uz ierīces vai akumulatora nodalījumā.


Spilgtums: 10 000 luksu (šis punkts par gaismas intensitāti ir tikai informatīvs. Saskaņā ar standartu IEC 60601-2-83 šis gaismas avots ir klasificēts kā atbrīvota grupa).

Piezīmes par elektromagnētisko savietojamību

Ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, kā arī Eiropas standartam EN 60601-1-2 (saskaņā ar CISPR 11, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-8), un uz to attiecas īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.

- Ierīce ir piemērota lietošanai visās vidēs, kas uzskaitītas šajā lietošanas instrukcijā, tostarp mājāsaimniecībā.
- Ierīces lietošana var būt ierobežota elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē. Tas var izraisīt, piemēram, kļūdu ziņojumus vai displeja/ierīces darbības traucējumus.
- Nelietojiet šo ierīci tieši blakus citām ierīcēm vai novietotu uz citām ierīcēm, jo tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ja tomēr ir nepieciešams izmantot ierīci norādītajā veidā, šī ierīce, kā arī citas ierīces ir jāuzrauga, lai nodrošinātu to pareizu darbību.
- Citu piederumu izmantošana, kas nav šīs ierīces ražotāja norādīti vai nodrošināti, var izraisīt elektromagnētisko emisiju palielināšanos vai ierīces elektromagnētiskās noturības samazināšanos; tas var izraisīt nepareizu darbību.
- Iepriekš minēto prasību neievērošana var pasliktināt ierīces darbību.

Strāvas adapteris

Modeļa Nr.	LXCP62 (II)-240
Ieeja	100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A maks.
Izvade	24 V DC / 2.5 MA
Aizsardzība	Ierīcei ir dubulta aizsardzība.
	Līdzstrāvas sprieguma savienojuma polaritāte
Klasifikācija	IP24, II aizsardzības klase

13. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.

Paziņošana par incidentiem

Lietotājiem/pacientiem Eiropas Savienībā un identiskās regulējuma sistēmās (ES Medicīnas ierīču regula (MDR) 2017/745): Ja produkta lietošanas laikā vai lietošanas gaitā notiek nopietns negadījums, paziņojiet par to ražotājam un/vai tā pārstāvim, kā arī tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kurā atrodas lietotājs/pacients.