


# beurer

## IPL 7800 Cool Pro



IPL karvaemaldusseade  
Kasutusjuhend


CE

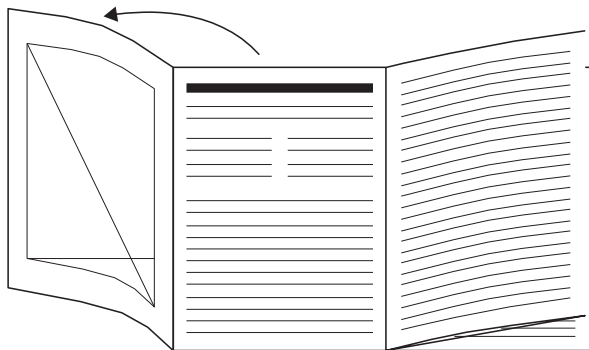

**EE** Enne kasutusjuhendi lugemist voltige lahti lehekülg 3.

1

2

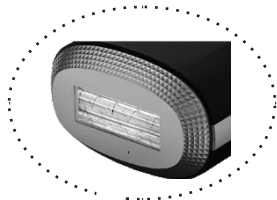

3

4

5




6

7

8

9

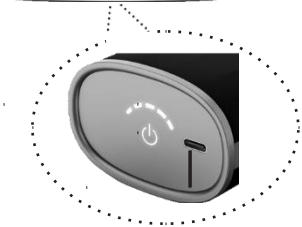



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

## HOIATUS!

- Seade ja selle adapter on mõeldud kasutamiseks ainult eraviisiliselt ja kodustes tingimustes. Seadet ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Seade sobib vaid üle 18-aasta vanustele täiskasvanutele.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Seade ja adapter ei tohi märjaks saada.
- Veenduge enne igat kasutuskorda, et seade ja toitejuhe on ideaalses seisundis. Kahjustuste korral ei tohi seadet kasutada.
- Ärge kunagi vaadake otse IPL-lambist väljastatavasse valgusesse.
- Ärge sisestage seadmesse mingeid esemeid.
- Kontrollige, et seadme ventilatsioonivad oleksid vabad.
- Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas, näiteks vanni, kraanikausi, duši ega muude vett või teisi vedelikke sisaldavate kohtade läheduses – elektrilöögi oht!
- Ärge puudutage kahjustada saanud seadme

elektrilisi osi. Võite saada elektrilöögi.

- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed (sh lapsed) tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui neid on põhjalikult juhendatud seadet ohutult kasutama.

## **1. KOMPLEKTI KUULUB**

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- IPL karvaeemaldusseade
- Toiteadapter
- See kasutusjuhend

## 2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

### OHT

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

### HOIATUS!









Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.














### Tähelepanu!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

### MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võivad seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.

	<b>Oht!</b> Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (kraanikausis, duši all või vannis) – elektrilöögi oht!		<b>CE-märgistus</b> Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.
	<b>Ettevaatust!</b> Optiline kiirgus.		DC-vooluühenduse polaarsus.
	Vältige kokkupuudet silmadega!		Ärge kasutage päevitunud nahal või pärast päikese käes viibimist
	<b>Tooteteave</b> Olulist teavet sisaldav märkus		Lugege kasutusjuhiseid

	<p>Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv).</p>	 <p>Sorteerige pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.</p>
	<p>Tootja.</p>	 <p>Kasutamiseks ainult siseruumides.</p>
	<p>Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele.</p>	 <p>Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.</p>
	<p>Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali lühend, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp.</p>	 <p>II kaitseklassi seade. Seadmel on topeltkaitse.</p>
	<p>Nõuetekohasuse hinnang Ühendkuningriigile</p>	<p><b>Ümbritseva keskkonna temperatuur</b> <b>ta = 35 °C</b> Maksimaalne töötemperatuur</p>
	<p>Vahelduvvool AC.</p>	 <p><b>Alalisvool</b> Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga.</p>
	<p>Kaitstud tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm või suurem.</p>	 <p>Kui pistik on kahjustada saanud, siis ärge toiteadapterit kasutage.</p>
	<p>Toiteadapter</p>	 <p>Turvaisolatsiooniga muundur, lühisekaitse.</p>
	<p>Energiaõhususe klass 6.</p>	 <p>Importija sümbol.</p>

### 3. KASUTUSEESMÄRK

Seade on mõeldud soovimatute kehakarvade eemaldamiseks. Sobib kasutamiseks nii meestele kui ka naistele. Seadet tohib kasutada ainult **säärteil, kaenlaalustes, bikiinipiirkonnas, rinnal, kõhul, seljal ja näol (ainult naised ja allpool põsejoont)**.

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärast kasutamisest tuleneva kahju eest.

#### Kuidas IPL–tehnoloogia töötab?

IPL 7800 Cool Pro on koduseks kasutamiseks mõeldud fotoepilatsiooniseade karvade püsivaks eemaldamiseks. Fotoepilatsioonil põhinev karvaeemaldusprotsess on üldteatud ja tunnustatud meetod. Üle 15 kasutusaasta jooksul kõikjal maailmas on see end tõestanud kui ohutu ja tõhus meetod karvakasvu püsivaks vähendamiseks. Täiendav jahutusfunktsioon muudab kasutamise meeldivamaks.

#### Kuidas valgus karvad eemaldab?

Valgusel põhinev karvaeemaldus ehk fotoepilatsioon tugineb selektiivse fototermolüüsi meetodile, kus optilist energiat kasutatakse karvakasvu peatamiseks. Sellise termoeefekti saavutamiseks peab karvajuur valgusenergiat valikuliselt absorbeerima ja selle soojuseks muutma.

Selline valikulisus saavutatakse, kui kudedesse suunatud optiline energia imendub peamiselt karva melaniinpigmenti. Seal muundatakse intensiivne valgus soojusenergiaks (soojuseks), mis peatab karvakasvu.

#### Kuidas karvakasvutsükkel fotoepilatsiooni mõjutab?



Anageen-  
kasvufaas


Kõik meie kehal kasvavad karvad läbivad kolm kasvufaasi: anageen, katageen ja telogeen. IPL-tehnoloogia kasutamine annab tulemusi ainult anageeni- ehk kasvufaasis olevate karvade töötlemisel.



Katageen –  
üleminekufaas

Kuigi täieliku karvakasvutsükli kestus on sõltuvalt inimesest ja kehapiirkonnast erinev, kestab see üldjuhul 18–24 kuud.

Pidage meeles, et lõpliku tulemuse saavutamiseks tuleb seadet kasutada vähemalt ühe karvakasvutsükli vältel.

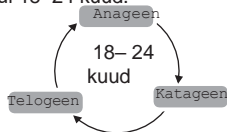

Telogeen-  
puhkefaas



## 4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

### OHT!

Hoidke seade ja adapter veest eemal! IPL 7800 Cool Pro on elektriline seade. Ärge asetage seda vette ega laske seadmel kukkuda vette või mõnesse muusse vedelikku.



### Vesi võib põhjustada ohtliku elektrilöögi!

- Seadet ei tohi kasutada vannis olles.
- Niisket või märga seadet ei tohi kasutada.
- Kui seade kukub vette, ärge tormake seda kohe välja võtma.
- Kui seade on vette kukkunud, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja.
- Ärge kunagi puudutage toiteadapterit ega seadet märgade kätega!

### HOIATUS!

- Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei tohi seadet kasutada.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui nahk hakkab punetama või sellele tekivad villid või põletushaavad.
- Ärge kunagi püüdke valgusimpulssi õhku suunata!
- Otsustage selle kasutusjuhendi tagaküljel toodud karva- ja nahavärvide tabeli alusel, missugune valgusintensiivsuseaste teile sobib ja kas te üldse tohite seda tehnoloogiat karvade eemaldamiseks kasutada (kui mitte, on see tabelis tähistatud märkega "x").
- Seadet ei tohi kasutada loomulikult tumeda värviga nahal.
- Ärge kasutage seadet kontaktgeeliga, sest nii võite seadet kahjustada.
- Juhiste eiramisel on võimaliku silmavigastuse (võib viia nägemise kaotuseni) või nahavigastuse oht. Lugege läbi kõik juhised ja pidage neist kinni.
- Kui pärast esimest kasutamist ilmnevad 48 tunni jooksul kõrvalnähud, pöörduge enne seadme uuesti kasutamist arsti poole.



Seade toimib kõige paremini tumedate ja suure melaniinisaldusega karvade korral. Kõige paremini reageerivad seadmega töötlemisele musta värvi ja tumepruunid karvad. Reageerivad ka pruunid ja helepruunid karvad, kuid seda värvi karvade korral tuleb efektiivse tulemuse saavutamiseks seadet kauem kasutada. Punased karvad võivad töötlemisele reageerida. Valged, hallid või blondid karvad tavaliselt seadmega töötlemisele ei reageeri, kuigi mitmed kasutajad on pärast mitmekordseid karvaeemaldusprotseduure tulemusi märganud.

# HOIATUS!

## Kindlasti ei tohi seadet kasutada juhul, kui teil on mõni järgnevatest probleemidest:

- nahavähk (ka juhul, kui teil on see kunagi olnud) või teie nahal on võimalikke pahaloomulisi sünnimärke;
- epilepsia;
- kollageeni ainevahetuse häired, sealhulgas liigliha tekkimine armidel või haava halvasti paranemine;
- herpes või psoriaas töödeldavas piirkonnas, välja arvatud juhul, kui olete konsulteerinud arstiga ja saanud ennetavat ravi;
- fototundlikkus või mõnda muud tüüpi valgustundlikkus, näiteks porfüüria, polümorfne fotodermatoos, päikese urtikaaria, luupus jne;
- ainevahetushäire, näiteks diabeet;
- verehüübega seotud probleemid.

## Kindlasti ei tohi seadet kasutada järgmistel juhtudel:

- ravimid, mis muudavad naha valgustundlikumaks, kaasa arvatud mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt aspiriin, ibuprofeen, paratsetamool), tetratsükliin, fenotiasiin, tiasiid-diureetikumid, sulfonüüluurea, sulfoonamiid, DTIC, fluorouratsiil, vinblastiin, griseofulviin, alfa-hüdroksühapped (AHAD), beetahüdroksühapped (BHAd), Retin-A®, Accutane® ja/või lokaalsed retinoidid;
- kui teil on pooleli või kui olete hiljuti läbinud aselaiinhapperavi;
- kui olete viimase kolme kuu jooksul läbinud steroidikuuri;
- kui teile on viimase 6-8 nädala jooksul tehtud nahakoorimine või muu nahka silendav protseduur;
- kui olete viimase kolme kuu jooksul saanud kiiritusravi või kemoteraapiat.

## Kindlasti ei tohi seadet kasutada järgmistes piirkondades:

- kõri- ja kõripiirkonna limaskestadel;
- sisselülitatud implantaadi peal ega läheduses (südamestimulaator, kusepidamiseseade, insuliinipump jne);
- näol põsesarnadest kõrgemal, silmade ümbruses, kulmudel või ripsmetel, sest see võib põhjustada raske silmakahjustuse;
- rinnanibudel, sisemistel häbememokkadel, tupes, pärakus, ninas ja kõrvades;
- munandikotil ega meeste näokarvade eemaldamiseks;
- augustuste ja muude metallesemete nagu kõrvarõngaste või teiste ehete läheduses;
- tätoveeringutel või püsimeigiga piirkondades;
- tumepruunidel või mustadel laikudel, näiteks suurtel tedretähnidel, sünnimärkidel, villidel või tüügastel;
- ekseemi või psoriaasi korral, haiguskohtedes, lahtistel haavadel või põletikulistel kohtadel. Seadet tohib kasutada alles juhul, kui kahjustunud piirkond on paranenud;
- kahjustunud või lõhenenud nahal või piirkondades, kus on oht vähkkasvaja tekkeks;
- kehapiirkonnas, kuhu soovite tulevikus karvu;



- kehapiirkonnas, kuhu on süstitud täidist või toksiine (nt Botox).

## **Loetelu ei ole lõplik.**

**Kui te võtate retseptiravimit, olete haiguse tõttu regulaarselt arstide jälgimise all ja/või ei ole kindel, kas tohite seda seadet kasutada, pidage enne seadme kasutuselevõttu nõu oma arstiga.**

### **Võimalikud kõrvaltoimed:**

Seadme kasutamisel kooskõlas kasutusjuhendiga esineb kõrvalmõjusid ja komplikatsioone harva.

- Pärast seadme kasutamist võib nahk veidi punetada, sügeleda või puudutamisel soe tunduda. Need reaktsioonid on ohutud ja kaovad peagi.
- Lühiajaliselt võite seadmega töödeldud piirkonnas tunda päikesepõletusele sarnast reaktsiooni. Kui see kahe päeva jooksul ei kao, pidage nõu arstiga.
- Pärast raseerimist või raseerimise ja fotoepilatsiooniseadme koos kasutamise korral võib nahk muutuda kuivaks ja sellele võivad tekkida ärritusnähud. Need on ohutud ja kaovad peagi. Soovi korral võite kahjustunud piirkonnale asetada veidi jääd või niiske lapi.
- Kui nahk on 24 tundi pärast seadme kasutamist endiselt kuiv, võite nahale kanda niisutavat kreemi, mis ei sisalda lõhnaaineid.
- Harvadel juhtudel võib töödeldud nahapind muutuda väga punaseks ja üles paistetada. Selle põhjus on tavaliselt liiga kõrge intensiivsuste ja seda juhtub tõenäolisemalt tundlikemates kehaosades. Punetus ja paistetus peaks taanduma 2-7 päeva jooksul ning kahjustunud nahale tuleks panna regulaarselt jääd. Nahka võib õrnalt puhastada, kuid päikese käes viibimist tuleks vältida.
- Naha värvuse muutumine on väga harv reaktsioon. Selle korral tekkivad seadmega töödeldud piirkonda tumedamad või heledamad laigud. Selle põhjus võib olla liiga kõrge intensiivsustase kasutamine. Kui nahavärv muutus ei kao kahe nädala jooksul, pidage nõu arstiga. Ärge kasutage seadet kahjustada saanud piirkonnas enne, kui nahk on endise värvi tagasi saanud.
- Väga harvadel juhtudel võib pärast protseduuri esineda nahakahjustusi ja põletusi. Nende paranemiseks võib kuluda paar nädalat ning väga harvadel juhtudel võib nahale jääda nähtav arm.
- Väga harvadel juhtudel võib tekkida nahapõletik. See võib tekkida juhul, kui seadet kasutatakse raseerimisel tekkinud haavadel või sisselõigetel või muudel haavadel või sissekasvanud karvadel.
- Järgmistel juhtudel võib seadme töövalmis seadmisel ajal või pärast seda tekkida tugev valu: seadet kasutati raseerimata nahal; valitud intensiivsuste oli teie nahavärvi jaoks liiga kõrge; sama nahapiirkonda töödeldi valgusimpulssidega mitu korda: seadet kasutati lahtistel haavadel, põletikulistel kohtadel, tätoveeringutel, põletushaavadel jne.
- Väga harva võivad tekkida püsivad armid. Armistumine ilmneb nahal tavaliselt ühetasase, valge haiguskindena. Armi välimuse parandamiseks võib tarvis minna esteetilist ravi.

- Väga harvadel juhtudel võib seadme kasutamine tekitada sinise/lilla hematoomi, mis püsib 5-10 päeva. Hematoomi kadumisel võib selle asemele jääda püsiv roostepruun laik (hüperpigmentatsioon).

## HOIATUS!

### Hoiatused seoses päevitamisega enne ja pärast seadme kasutamist!

#### Päevitamine enne seadme kasutamist



1. Kaks nädalat enne seadme kasutamist ei tohi päevitada.
2. Enne seadme kasutamist kontrollige, et nahal ei oleks päikesepõletusest tingitud kahjustusi. Kõik päikesepõletusest tulenevad kahjustused peavad olema täielikult paranenud. Alles siis võite seadet kasutada.
3. Seejärel kinnitage takjariba. Oma nahale sobiva intensiivsuseastme kindlaks määramiseks tehke päevitunud nahal nahatundlikkustest.

#### Päevitamine pärast seadme kasutamist

1. Kaks nädalat pärast seadme kasutamist ei tohi päevitada. Punetav nahk tuleb hoida päikese eest kaitstuna!
2. Esimese kahe nädala jooksul pärast seadme seade tuleb päikese käes viibides kanda pikki rõivaid või kanda nahale päikesekaitsekreemi, mille kaitsefaktor on vähemalt 30.

#### Solaarium

Eespool punktides "Päevitamine enne seadme kasutamist" ja "Päevitamine pärast seadme kasutamist" toodud juhised kehtivad ka solaariumis päevitamise ja isepäevituvate toodete kasutamise korral.

**Ärge kasutage seadet 24 tundi enne või pärast saunas või basseinis käimist, sest kloor võib nahka ärritada.**

## MÄRKUS

- Ärge kasutage seadet koos tarvikute või lisaseadmetega, mida Beurer GmbH ei soovita.
- Ärge kasutage seadet temperatuuridel alla 5 °C või üle 40 °C.
- Ärge kasutage seadet, kui sellest hakkab kasutamise ajal suitsu eralduma või tunnete suitsulõhna.
- Ärge kasutage seadet, kui selle ventilatsioonitava on mõranenud, lahti tulnud või kadunud.
- Pärast kasutamist pange seade originaalpakendisse tagasi.
- Ärge jätke seadet mitmeks tunniks otsese päikesevalguse või UV-valguse kätte.

## 6. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiate leheküljelt 3.

1. Valgusimpulsi väljastamise ala
2. Nahakontaktiandur
3. Jahtumise märgutuli
4. Automaatse sähvatus\* märgutuli
5. Nahakontakti märgutuli
6. Aktiveerimisnupp
7. Intensiivsuseastme näidik (5 astet)
8. Sisse-välja lülitamise / intensiivsuseastme nupp
9. USB-C-ühendus

### Ohutusfunktsioonid

Seadmesse on sisseehitatud ka **UV-filter**, mis kaitseb nahka kahjulike UV-kiirte eest.


Seadmesse sisseehitatud **nahakontaktiandur 2** kaitseb teie silmi. Seade on disainitud nii, et kui seadet hoitakse õhus, ei saa sellest valguskiiri väljastada. Valgusimpulsi saab nahka saata ainult juhul, kui nahakontaktiandur **2** on täielikult vastu nahka.

## 7. ESIMESED SAMMUD

### 7.1 Kasutamiseks ettevalmistamine

Enne seadme kasutamist tehke vajalikud ettevalmistused ja testige oma naha tundlikkust.


1. Määrake karva- ja nahavärvi tabeli (selle kasutusjuhendi tagaküljel) abil kindlaks, milline intensiivsuseaste teie nahale sobib. Tabelis toodud „x“ näitab, et te ei tohi seda seadet kasutada.
2. Enne seadme kasutamist tuleb töödeldavad piirkonnad raseerida. Ärge kasutage karvaeemalduskreemi.
3. Nahk peab olema raseeritud, kuiv ja puhas (sellel ei tohi olla puudri, kreemi, jumestusvahendite või deodorandi jääke).

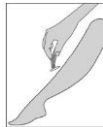

### HOIATUS!

**Ärge puhastage nahka vahetult enne seadme kasutamist kergsüttiva vedelikuga nagu alkohol või atsetoon.**

4. Puhastage valgusimpulsi väljastamise ala **1** ja nahakontaktiandurit **2** kuiva, ebemevaba lapiga.
5. 48 tundi enne seadme kasutamist tehke nahatundlikkuse test kõikidel kehaosadel, mida seadmega töödelda soovite (vt 6.2 „Nahatundlikkuse test“).

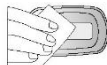

## 6.2 Nahatundlikkuse test

1. Ühendage toiteadapter seadme põhjas asuvasse USB-C ühenduspessa **9**.
2. Sisestage toiteadapter sobivasse seinapistikupessa. Sisse-välja lülitamise / intensiivsustme nupp **8** süttib püsivalt valgena. Seade on nüüd seisurežiimis.
3. Seadme sisse lülitamiseks hoidke sisse-välja lülitamise / intensiivsustme nuppu **8** korra all. Intensiivsustme ekraanil **7** süttib püsivalt valgena väike tuli (tase 1). Jahtumise märgutuli **3** läheb valgena põlema ja ventilatsioon hakkab tööle.



Seadme kasutamisel näopiirkonnas tuleks nahatundlikkuse test teha ilma karvadeta piirkonnas, näiteks kõrva taga või kuklal.

4. Asetage valgusimpulsi väljastamise ala **1** vastu nahka. Jälgige, et valgusimpulsi väljastamise ala **1** ja nahakontaktiandur **2** oleksid täielikult vastu nahka. Nahakontakti märgutuli **5** süttib kohe, kui nahakontakt on piisav.
5. Kui nahakontakti märgutuli **5** põleb, vajutage aktiveerimisnuppu **6**, et väljastada valgusimpulss tasemel 1. Näete eredat sähvatust ja kuulete iseloomulikku heli.
6. Asetage nahakontaktiandur **2** järgmisesse töödeldavasse piirkonda. Intensiivsustme suurendamiseks vajutage sisse-välja lülitamise / intensiivsustme nuppu **8** uuesti ja väljastage aktiveerimisnupu **6** abil valgusimpulss. Ärge kasutage seadet võimsamal tasemel, kui teie nahavärvile lubatud / soovitatud aste (vt karva- ja nahavärv tabelit selle kasutusjuhendi tagaküljel).



Suurendage intensiivsustet ainult juhul, kui eelmine aste ei tekitanud ebamugavustunnet. Kui 1. intensiivsustaste on ebamugav, ärge seda suurendage.


7. Kui tunnete pärast valgusimpulsi väljastamist ebamugavustunnet, vähendage intensiivsustet.
8. Nahatundlikkuse testi lõpetamiseks lülitage seade välja. Vajutage ja hoidke sisse-välja lülitamise / intensiivsustme nuppu **8** kaks sekundit all. Intensiivsustme ekraan **7** kustub ja nupp **8** jääb helendama. Ventilator lülitub automaatselt välja mõni sekund pärast seadme väljalülitamist. Oodake 48 tundi ja jälgige testipiirkonda. Kui sealne nahk näib olevat normaalne (reaktsioon või punetus puudub), võite seadet kasutada katsetatud intensiivsustmel.



Kui töödeldud nahapinnale tekib reaktsioon (näiteks punetus või paistetus), oodake kuni sümptomite täieliku kadumiseni ja katsetage seadet veel üks kord madalamal intensiivsustmel. Kui tekib uuesti reaktsioon, pidage nõu arstiga.

## 8. KASUTAMINE

1. Ühendage toiteadapter seadme põhjas asuvasse USB-C ühenduspessa **9**. Sisestage toiteadapter sobivasse seinapistikupessa. Sisse-välja lülitamise / intensiivsustme nupp **8** jääb püsivalt

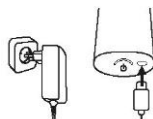

- põlema. Seade on nüüd seisurežiimis.
- Seadme sisse lülitamiseks hoidke sisse-välja lülitamise / intensiivsustme nuppu **8** korraks all. Intensiivsustme ekraan **7** süttib püsivalt väike valge tuli (aste 1). Jahtumise märgutuli **3** läheb valgena põlema ja ventilatsioon hakkab tööle.
  - Kui soovite seadet kasutada suuremal intensiivsustmel, suurendage intensiivsust järk-järgult, vajutades sisse-välja lülitamise / intensiivsustme suurendamise nuppu **8**, kuni olete saavutanud soovitud intensiivsuse.
  - Pange valgusimpulsi ala **1** vastu nahka ja vajutage aktiveerimisnuppu **6**. Nahka saadetakse valgusimpulss. Veenduge, et valgusimpulsi väljastamise ala **1** on täielikult vastu nahka ja et nahakontakti märgutuli **5** näitab piisavat kontakti. Näete eredat sähvatust ja kuulete iseloomulikku heli. Seade on järgmise impulsi väljastamiseks valmis 1-3 sekundi pärast (sõltuvalt intensiivsustmest).



## 7.1 Kasutusviisid

### HOIATUS!

Ärge töodelge ühte piirkonda ühe kasutuskorra ajal mitu korda. See suurendab kõrvaltoimete esinemise tõenäosust.



Impulse tuleks seadmest nahka saata ridadena, alustades rea algusest ja liikudes selle lõpuni. See võimaldab paremini jälgida, milliseid nahapiirkondi on juba töödeldud, ja aitab vältida mitmekordset töötlemist või kattumist.

### Kasutusviis 1: automaatse sähvatuse režiim

Kontrollige, kas nahakontaktiandur **2** on täielikult vastu nahka. Vajutage ja hoidke aktiveerimisnuppu **6** kaks sekundit all. Seade väljastab automaatselt korrapärase ajavahemike tagant valgusimpulsse. Automaatse sähvatuse märgutuli **4** põleb püsivalt. Selles režiimis ei ole vaja aktiveerimisnuppu **6** käsitsi vajutada. Automaatse sähvatuse režiimi lõpetamiseks vajutage korraks aktiveerimisnuppu **6**. Automaatse sähvatuse režiim sobib suurte alade töötlemiseks, näiteks sääred.

### Kasutusviis 2: üksikute sähvatuste kasutamine

Laske aktiveerimisnupp **6** pärast igat valgusimpulssi lahti. Pange valgusimpulsi väljastamise ala töödeldud piirkonna kõrvale vastu nahka. Jälgige, et valgusimpulsi väljastamise ala **1** ja nahakontaktiandur **2** oleksid täielikult vastu nahka. Nii on hõlbus töödelda väiksemaid piirkondi nagu põlved ja pahklud.



Kui seade ei väljasta valgusimpulsse ja nahakontakti märgutuli **5** ei sütti, ei ole nahakontaktiandur **2** piisavalt vastu nahka.



Kui seade tundub teie jaoks liiga kuum, laske sel mõni minut seista. Pärast lühiajalist jahtumist saate seadme kasutamist jätkata.

## 7.2 Erijuhised seadme kasutamiseks näol

### Hoiatus!

- Kui seade on silmadest vähem kui 20 cm kaugusel, soovime kasutada kaitseprille. Kaitseprillid peaksid vastama määruse (EL) 2016/425 nõuetele ja olema katsetatud vastavalt standarditele EN 166:2001 ja ISO:12609-1:2021.
  - Seade ei ole mõeldud meestele habeme ajamiseks.
  - Ärge kasutage seadet näol suuremal intensiivsustasemel kui 2.
  - Ärge kasutage seadet näol põsesarnadest kõrgemal, silmade ümbruses, kulmudel või ripsmetel, sest see võib põhjustada raske silmakahjustuse. Ärge kasutage seadet kõrva- ja ninapiirkonna limaskestadel.
  - Näonahk on väga tundlik ja vajab erihooldust. Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja ohutusmärkusi, et vältida ebameeldivaid tagajärgi. Soovitame enne näopiirkonna töötlemist viia protseduur läbi kehal ning seadet tundma õppida. Seadet võib kasutada kõikidel põsesarnadest allpool asuvates piirkondades nagu ülahuul, põsed, lõug ja kael.
1. 48 tundi enne seadme kasutamist tehke nahatundlikkuse test (vt 6.2 „Nahatundlikkuse test“). Nahatundlikkuse test tuleb teha ilma karvadeta piirkonnal, näiteks kõrva all või kuklal, et määrata kindlaks teie nahale sobiv intensiivsustase.


### HOIATUS!


Pärast nahatundlikkuse testi tuleb oodata vähemalt üks nädal. Alles siis tohib seadet näol kasutada.

2. Märkide töödeldud ala valge silmapliiatsiga. Järgige valgusimpulsside paigutamisel neid jooni. Nõnda väldite alade kattumist või kogemata valede näopiirkondade töötlemist.
3. Kasutage peeglit, et seade õigesti vajalikule kohale asetada.
4. Järgige kasutusjuhendit ja kindlasti erijuhiseid.

### Karvade eemaldamine ülahuulelt

Asetage valgusimpulsi väljastamise ala [1] nii, nagu on näidatud joonisel. Saatke kõikidesse märgitud tsoonidesse valgusimpulss. Vältige ninasõormeid ja huuli, sest need alad on tundlikumad.

 Võite huuled „sisse tõmmata“ või kokku suruda, et töödeldav piirirohkem pingul, või kanda huuletele ja huuleümbrusesse paksu kihisilmapliiatsit. Valge joon peegeldab valgusenergia tagasi ning se huulteni, juhul kui peaksite kogemata seda piirkonda töötleva.

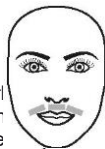

### Karvade eemaldamine põskedelt ja lõuajoonelt

Asetage valgusimpulsi väljastamise ala 1 nii, nagu on näidatud joonisel. Saatke igas punktis nahka üks valgusimpulss, liikudes põse või lõua ühelt küljelt teisele.





## Karvade eemaldamine kaelalt ja lõualt

Asetage valgusimpulsi väljastamise ala 1 nii, nagu on näidatud joonisel. Saatke igas punktis nahka üks valgusimpulss, liikudes kaela või lõua ühelt küljelt teisele.



## Näohooldus pärast seadme kasutamist

- Kandke nahale rahustavat ihupiima, näiteks aaloed sisaldavat.
- Ärge kasutage vähemalt 24 tundi pärast seadme kasutamist koorijaid, pleegitavaid kreeme ega muid sarnaseid tooteid, sest see võib töödeldud nahka ärritada.
- Vältige vähemalt 48 tundi pärast seadme kasutamist pikemat kui 15-minutilist kokkupuudet päikesega. Kui peate siiski päikese käes viibima, kasutage päikesekaitsekreemi SPF 30 või suurem.
- Ärge eemaldage töödeldud aladel kasvavaid karvu vaha ega pintsettidega.

**Pidage meeles, et püsiva tulemuse saavutamiseks tuleb seadet kasutada kogu karvakasvu tsükli vältel.**

## 7.3 Kasutustsükkel Kehapiirkond:

Nädal 1 kuni 2:	kasutage 3 korda nädalas
Nädal 3 kuni 5:	kasutage kaks korda nädalas
Alates 6. nädalast:	kasutage 1 või 2 korda nädalas (vajadusel korra)

## Näopiirkond:

- Esimesed kuus korda tuleks seadet kasutada ligikaudu kahe nädalaste vahedega.
- Järgmised korrad (7.-12.) tuleks seadet kasutada ligikaudu neljanädalaste vahedega. Pärast seda kasutage seadet vastavalt vajadusele, kuni saavutate püsiva tulemuse. Ülaltoodud teave vastab soovituslikule kavale, mis on osutunud kõige tulemuslikumaks. Samas võite koostada ka enda isikliku kava ja saavutada samuti rahuldava tulemuse.

## 7.4 Pärast seadme kasutamist

1. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, hoidke sisse-välja lülitamise / intensiivsuseastme nuppu [8] kolm sekundit all. Seade lülitub seisurežiimi. Seisurežiimi näitab sisse-välja lülitamise / intensiivsuseastme nupu [8] püsivalt põlemine.
2. Ventilaator töötab seisurežiimis mõni sekund, kuni seade on jahtunud.
3. Pärast ventilaatori väljalülitumist tõmmake seadme toiteadapter seinapistikupesast välja.

## TÄHELEPANU!

Ärge kandke pärast seadme kasutamist nahale higistamisvastast vahendit ega deodoranti, sest see võib nahka ärritada.

## 9. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Soovitame puhastada seadet ja eelkõige valgusimpulsi väljastamise ala **1** pärast igat kasutuskorda.

**Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Need võivad seadme pinda kahjustada.**

**Mitte kunagi ärge asetage seadet ega ühtegi selle osa vette!**

1. Enne puhastamist tõmmake toiteadapter seadme pesast välja.
2. Puhastage seadme välispinda kuiva puhta lapiga.
3. Puhastage valgusimpulsi ala **1** ja nahakontaktiandurit **2** ettevaatlikult veidi niiske ebamevaba lapiga.



## 10. MIDA TEHA PROBLEEMIDE TEKKIMISEL?

**Seade ei lülitu sisse.**

- Veenduge, et toitejuhe on korralikult seadme külge ühendatud.
- Veenduge, et toiteadapter on sisestatud seinapistikupessa.

**“Ma vajutasin käivitamisnuppu **6**, aga seade ei saada valgusimpulssi välja.”**

- Kontrollige, kas seade on korralikult vastu nahka ja kas valgusimpulsi väljastamise ala **1** ja nahakontaktiandur **2** on ühtlaselt ja tugevalt vastu nahka. Teie ohutuse tagamiseks saab aktiveerimisnupu **2** aktiveerida ainult juhul, kui valgusimpulsi ala **1** on tugevalt vastu nahka surutud.
- Kui seadme nahakontakti märgutuli **5** ei põle, ei ole seade nahale piisavalt lähedal. Pange seade nahale lähemale või võtke ühendust klienditeenindusega.

## 11. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.






## 12. TEHNILISED ANDMED

Tüüp	IPL 7800 Cool Pro
Töötlemispind	3,8 cm <sup>2</sup>
Tehnoloogia	IPL (intensiivse pulseeriva valgusega tehnoloogia koduseks kasutamiseks)
Lainepikkus	530 - 1100 nm
Maksimaalne energiatase	max. 5 džauli/cm <sup>2</sup>
Intensiivsustastmed	5
Impulsside vaheline aeg	Aste 1: 1,5 s

		Aste 2: 1,8 s Aste 3: 2,1 s Aste 4: 2,5 s Aste 5: 2,8 s
Valgusimpulsside maksimumarv		kuni 1 000 000
Mõõtmed		16,4 x 6,1 x 3,9 cm
Kaal		Umbes 280 g
Temperatuur	Kasutamine	5 °C kuni 40 °C
	Hoiustamine	-20 °C kuni 55 °C
Suhteline õhuniiskus	Kasutamine	< 80% suhteline õhuniiskus
	Hoiustamine	5 kuni 95% (mittekondenseeruv)
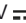
## Toiteadapter

Mudeli number		FX48B-120400C
Sisend		100 kuni 240 V 50- 60 Hz 1,0 A
Väljund		12.0 V  4.0 A; 48 W
Kaitseklass		Seade on topeltisolatsiooniga (kaitsefilter klass II) 
Polaarsus		
Keskmine tõhusus seadme kasutamise ajal		>89,38%
Voolutarve seisurežiimis		< 0,08 W

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

## 13. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

# Karva- ja nahavärvi tabel

		Nahavärv					
Karva värv		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

Intensiivsuseastme valik sõltub peamiselt sellest, millisel astmel end mugavalt tunnete.



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa •  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) [www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com) • [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place  
 Yew Tree Way, WA32SH Golborne, United Kingdom



Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),  
 Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918