


beurer

IPL 7800 Cool Pro



- | | |
|---|--|
| DE IPL Haarentfernungsgerät
Gebrauchsanweisung4 | PL Depilator IPL
Instrukcja obsługi 143 |
| EN IPL hair removal device
Instructions for use.....24 | NL IPL-ontharingsapparaat
Gebruiksaanwijzing 163 |
| FR Epilateur à lumière pulsée IPL
Mode d'emploi.....43 | DA IPL hårfjerningsapparat
Betjeningsvejledning..... 183 |
| ES Depiladora de luz pulsada
Manual de instrucciones63 | SV IPL hårborttagningsapparat
Bruksanvisning.....202 |
| IT Epilatore IPL
Istruzioni per l'uso83 | NO IPL hårfjerningsapparat
Bruksanvisning.....221 |
| TR IPL epilasyon cihazı
Kullanım kılavuzu..... 103 | FI IPL ihokarvojen poistolaite
Käyttöohje.....241 |
| RU Эпилятор IPL
Инструкция по применению.. 122 | |




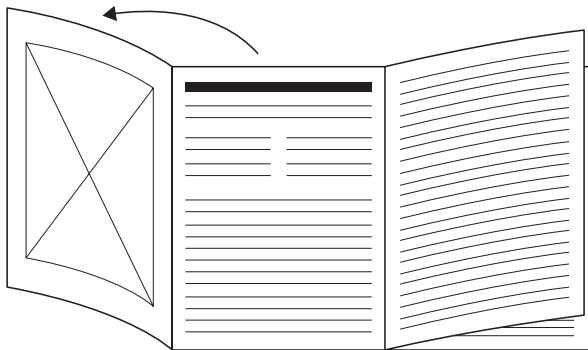

- DE** Klappen Sie vor dem Lesen der Gebrauchsanweisung die Seite 3 aus.
- EN** Unfold page 3 before reading the instructions for use.
- FR** Dépliez la page 3 avant de lire le mode d'emploi.
- ES** Despliegue la página 3 antes de leer las instrucciones de uso.
- IT** Prima di leggere le istruzioni per l'uso aprire la pagina 3.
- TR** Kullanım kılavuzunu okumadan önce 3. sayfayı açın.
- RU** Перед чтением инструкции по применению разложите страницу 3.
- PL** Przed przeczytaniem instrukcji obsługi otworzyć stronę 3.
- NL** Vouw pagina 3 uit om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen.
- DA** Fold side 3 ud, før du læser betjeningsvejledningen.
- SV** Vik ut sid. 3 innan du läser bruksanvisningen.
- NO** Åpne side 3 før du leser bruksanvisningen.
- FI** Käännä sivu 3 auki ennen käyttöohjeen lukemista.

1


2

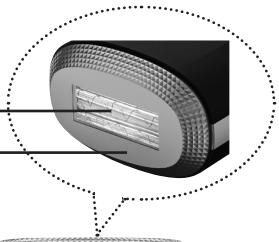

3

4

5

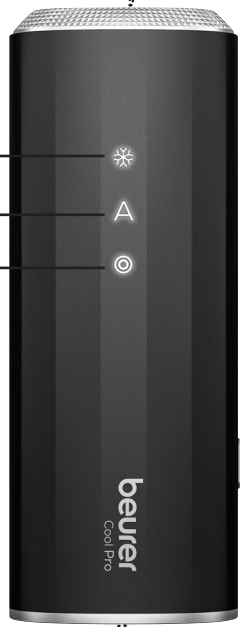


6

7

8

9

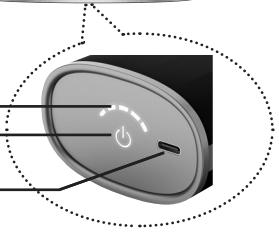



Внимательно прочтите эту инструкцию по применению. Обращайте внимание на предостережения и соблюдайте указания по технике безопасности. Сохраните инструкцию по применению для последующего использования. Обеспечьте другим пользователям доступ к инструкции по применению. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплект поставки.....	124
2. Пояснения к символам	125
3. Использование по назначению.....	127
4. Предостережения и указания по технике безопасности	128
5. Описание прибора.....	133
6. Начало работы	134
6.1 Подготовка к применению	134
6.2 Тест на переносимость	134
7. Применение	136
7.1 Способы применения.....	136
7.2 Особые указания по обработке участков на лице.....	137
7.3 Частота применения прибора	139
7.4 После применения.....	140
8. Очистка и уход	140
9. Что делать при возникновении проблем?.....	140
10. Утилизация.....	141
11. Технические данные.....	141
12. Гарантия.....	142

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор и адаптер разработаны исключительно для применения в домашних условиях и не предназначены для использования в коммерческих целях.
- Не допускается использование прибора лицами младше 18 лет.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Защищайте прибор и адаптер от влаги.
- Перед каждым применением проверяйте прибор и сетевой кабель на отсутствие повреждений. Не включайте прибор в случае их обнаружения.
- Ни в коем случае не смотрите прямо на свет, исходящий от лампы IPL.
- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы прорези для вентиляции не были закрыты.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности, например вблизи ванн, умывальных раковин, душа, емкостей с водой или другими жидкостями — существует опасность поражения электрическим током!
- Если прибор поврежден, не прикасайтесь к его внутренним деталям во избежание удара электрическим током.

- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если провод несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями могут использовать данный прибор только в тех случаях, когда за ними осуществляется надлежащий надзор или они получили подробные инструкции по использованию прибора от ответственного лица.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплект поставки и убедитесь, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений и все упаковочные материалы удалены. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

- 1 эпилятор IPL
- 1 сетевой адаптер
- 1 инструкция по применению

2. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и заводской табличке прибора используются следующие символы.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на непосредственно угрожающую опасность. Если ее не предотвратить, последствиями будут смерть или тяжелейшие травмы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ






Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями могут быть смерть или тяжелейшие травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями могут быть легкие или незначительные травмы.

УКАЗАНИЕ

Указывает на возможный материальный ущерб. Если его не предотвратить, возможно повреждение прибора или окружающих объектов.

	Опасность Запрещается использовать прибор рядом с водой или в воде (например, в умывальной раковине, душе, ванне): опасность поражения электрическим током!		Маркировка CE Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Предупреждение; оптическое излучение		Полярность разъема питания постоянного тока
	Не подносите близко к глазам!		Не используйте для обработки загорелой кожи или сразу после пребывания на солнце!

	<p>Информация об изделии Указывает на важную информацию.</p>		<p>Прочтите инструкцию.</p>
	<p>Утилизация прибора должна производиться в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).</p>		<p>Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с предписаниями местных муниципальных органов.</p>
	<p>Производитель</p>		<p>Только для использования в закрытых помещениях</p>
	<p>Продукция гарантированно соответствует требованиям нормативно-технической документации ЕАЭС.</p>		<p>Снимите упаковку с изделия и утилизируйте в соответствии с предписаниями местных муниципальных органов.</p>
	<p>Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращение для материала, B = номер материала: 1–7 = различные виды пластмассы, 20–22 = бумага и картон.</p>		<p>Прибор класса защиты II Прибор имеет двойную защитную изоляцию и соответствует классу защиты 2.</p>
	<p>Знак соответствия для Великобритании</p>	<p>$t_a=35^{\circ}\text{C}$</p>	<p>Номинальная температура окружающей среды Максимальная рабочая температура</p>
	<p>Переменный ток</p>		<p>Постоянный ток Прибор предназначен только для работы от источника постоянного тока.</p>

	Защита от проникновения твердых тел диаметром 12,5 мм и более		При повреждении штекера не используйте сетевой адаптер.
	Импульсный блок питания		Защитный разделительный трансформатор, с защитой от короткого замыкания
	Энергоэффективность уровня 6		Символ импортера

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Прибор предназначен для удаления нежелательных волос на теле у женщин и мужчин. Прибор предназначен исключительно для обработки **ног, подмышечных впадин, зоны бикини, груди, живота, спины и лица (обработка лица только для женщин, ниже скул)**.

Прибор разрешается использовать исключительно в целях, для которых он был разработан, а также в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по применению. Любое применение не по назначению может быть опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным или ненадлежащим использованием.

Принцип действия технологии интенсивного импульсного излучения (Intense Pulsed Light = IPL)

IPL 7800 Cool Pro — это прибор для одновременного удаления волос методом световой эпиляции. Он предназначен для индивидуального пользования. Процесс удаления волос с помощью светового излучения хорошо изучен и проверен на практике. За 15 с лишним лет клинического использования во всем мире он зарекомендовал себя как безопасный и эффективный способ долговременного удаления волос. Дополнительная функция охлаждения делает применение более комфортным.

Как свет удаляет волосы?

Метод световой эпиляции основан на теории селективного фототермолиза, при котором оптическая энергия предотвращает дальнейший рост волос. Для достижения этого термического эффекта корень волоса должен избирательно поглощать световую энергию и преобразовывать ее в тепло.

Подобная избирательность достигается за счет того, что световая энергия, которая передается на ткани, в основном поглощается содержащимся в волосе пигментом под названием меланин. Свет с высоким энергетическим потенциалом преобразуется в тепло, препятствующее росту волоса.

Как цикл роста волос влияет на световую эпиляцию?



Анаген —
фаза роста



Катаген — пе-
реходная фаза



Телоген —
фаза покоя

Каждый волос на нашем теле проходит три стадии роста: анаген, катаген и телоген. На воздействие с применением технологии интенсивного импульсного излучения (IPL) реагируют только волосы, находящиеся в фазе анагена, то есть в фазе роста.

Длительность полного цикла роста волос у людей может отличаться, она также зависит от места роста волос. В среднем цикл роста волос составляет от 18 до 24 месяцев.

Обратите внимание: после обработки прибором волосы будут удалены на длительное время только по завершении не менее чем одного жизненного цикла.



4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не допускайте попадания воды на прибор и адаптер! IPL 7800 Cool Pro — это электрический прибор. Не кладите его в воду и не допускайте его падения в воду или другую жидкость.



Это может привести к серьезному поражению электрическим током!

- Не используйте прибор, когда Вы принимаете ванну.
- Не используйте прибор, если он влажный или мокрый.
- Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду.
- При попадании прибора в воду немедленно выньте его сетевой адаптер из розетки.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому адаптеру и прибору мокрыми руками!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте прибор во время беременности или в период лактации.
- При образовании на коже сильных покраснений, волдырей или ожогов немедленно прекратите использование прибора!
- Не пытайтесь подавать световой импульс в открытое пространство!

- С помощью специальной таблицы на обратной стороне инструкции по применению определите, какую интенсивность света лучше использовать при Вашем оттенке кожи и волос на теле, а также подходит ли для Вас данный метод удаления волос (если нет, то в таблице будет стоять «X»).
- Не используйте прибор на темной от природы коже.
- Не используйте прибор с контактным гелем, это может привести к повреждению прибора.



Прибор наиболее эффективен при удалении темных волос, то есть волос, содержащих большое количество меланина. Лучше всего реагируют черные и темно-коричневые волосы; коричневые и светло-коричневые волосы также реагируют, но для их полного удаления требуется большее количество сеансов эпиляции. Рыжие волосы, возможно, также отреагируют на обработку. Светлые и седые волосы, как правило, не реагируют на воздействие прибором, хотя некоторые пользователи также почувствовали результаты после нескольких сеансов эпиляции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не используйте прибор, если Вы страдаете одним из следующих заболеваний.

- Вы больны или болели раком кожи или у Вас есть потенциальные злокачественные опухоли на обрабатываемых участках кожи.
- Вы страдаете эпилепсией, сопровождающейся повышенной чувствительностью к вспышкам.
- Вы страдаете нарушениями синтеза коллагена, включая образование келоидных рубцов или замедление процесса заживления ран.
- Участки, которые Вы собираетесь обрабатывать, поражены герпесом или псориазом, за исключением тех случаев, когда Вы предварительно проконсультировались с врачом и прошли необходимый курс лечения.
- Вы страдаете повышенной чувствительностью к фотоизлучению или другими реакциями повышенной светочувствительности, такими как порфирия, полиморфный фотодерматоз, световая крапивница, волчанка и т. д.
- Вы страдаете нарушениями обмена веществ, например сахарным диабетом.
- Вы страдаете нарушениями свертывания крови.

Ни в коем случае не используйте прибор, если Вы проходите следующие виды лечения.

- Вы принимаете препараты, которые делают кожу более чувствительной к воздействию света, включая нестероидные антиревматические средства (такие как аспирин, ибупрофен, парацетамол), тетрациклин, фенотиазин, тиазидные диуретики, препараты сульфаниламидов, сульфамиды, ДТИК, флуороурацил, винбластин, гризеофульвин, альфа-гидроксильные кислоты (АНА), бета-гидроксильные кислоты (ВНА), ретин-А®, аккутан® и/или топические ретиноиды.

- Вы недавно прошли или проходите сейчас курс лечения азелаиновой кислотой.
- В течение последних 3 месяцев Вы проходили лечение стероидными препаратами.
- В течение последних 6–8 недель Вам делали пилинг или другие косметические процедуры для разглаживания кожи.
- В течение последних 3 месяцев Вы проходили лечение лучевой терапией или химиотерапией.

Ни в коем случае не используйте прибор на следующих участках:

- на слизистой носа и в ушных раковинах;
- над активным имплантатом, например электрокардиостимулятором, прибором для терапии недержания, инсулиновой помпой или рядом с ними;
- на лице выше скул, вокруг глаз, бровей или ресниц, поскольку это может привести к тяжелым повреждениям глаз;
- на сосках, ареолах, внутренних половых губах, влагалище, заднем проходе, носу и ушах;
- мужчинам — ни в коем случае на мошонке и на лице;
- на участках с пирсингом и другими металлическими предметами, такими как серьги и украшения;
- на участках с татуировками или перманентным макияжем;
- на темно-коричневых или черных пятнах, таких как крупные веснушки, родимые и пигментные пятна, прыщи или бородавки;
- на участках, пораженных экземой, псориазом, острыми инфекциями, а также на поврежденных участках и открытых ранах (перед применением прибора на таких участках подождите до полного выздоровления кожи);
- на поврежденной или потрескавшейся коже, а также на зонах с высоким риском возникновения злокачественных новообразований;
- на участках, волосяной покров которых Вы не хотели бы удалить навсегда.



Этот список не является полным.

Если Вы принимаете рецептурные препараты, регулярно проходите обследования по поводу какого-либо заболевания и/или не уверены, можете ли Вы использовать прибор без опасности для здоровья, сначала проконсультируйтесь со своим врачом или дерматологом.

Возможные побочные эффекты

При использовании прибора в соответствии с указаниями данной инструкции по применению побочные эффекты и осложнения в результате его применения возникают редко.

- После обработки кожа может быть слегка покрасневшей и теплой, а также чесаться. Такая реакция не опасна и быстро проходит.

- На обработанном участке кожи возможна кратковременная кожная реакция, похожая на солнечный ожог. Если эта реакция не проходит в течение трех дней, обратитесь к врачу.
- Бритье или сочетание бритья и световой обработки могут вызвать сухость кожи и зуд. Такая реакция не опасна и проходит в течение нескольких дней. Соответствующий участок кожи можно охладить льдом или влажной салфеткой.
- Если кожа по-прежнему слишком сухая, через 24 часа после применения эпилятора можно нанести увлажняющий крем без отдушек.
- В редких случаях на обработанных участках кожи может возникнуть сильное покраснение и припухлость. Как правило, такая реакция чаще всего наблюдается в чувствительных зонах и возникает, если был выбран слишком высокий уровень интенсивности. Покраснения и отеки должны пройти в течение 2–7 дней; при этом к пораженным местам следует часто прикладывать лед. Допускается мягкая очистка кожи; однако следует избегать воздействия солнечных лучей.
- Изменения цвета кожи наблюдаются очень редко и проявляются в форме более темных или светлых пятен на обработанном эпилятором участке кожи. Причиной может быть использование слишком высокого для Вашего оттенка кожи уровня интенсивности. Если изменения цвета кожи не исчезают в течение двух недель, обратитесь к врачу. Участки с измененным цветом кожи можно снова обрабатывать лишь после полного исчезновения пятен.
- В очень редких случаях после эпиляции на коже могут появиться ожоги или раны. Для лечения ожогов или ран может потребоваться несколько недель; крайне редко после них могут оставаться заметные рубцы.
- В очень редких случаях наблюдаются кожные инфекции и воспаления. Причиной может быть применение прибора на участках с ранами или порезами, полученными во время бритья, и участках с уже имевшимися ранами или вросшими волосами.
- Сильные боли во время или после применения эпилятора наблюдаются в следующих случаях: если перед применением прибора волосы не сбривались, если используется слишком высокий для Вашего тона кожи уровень интенсивности, если один и тот же участок кожи обработан с помощью световых импульсов несколько раз, если прибор применяется на участках с открытыми ранами, воспалениями, татуировками, ожогами и т. д.
- В очень редких случаях появляются рубцы, которые сохраняются в течение длительного времени. После рубцевания на коже обычно остается плоский белый рубец. Для улучшения внешнего вида рубцов позже можно выполнить их эстетическую коррекцию.
- В очень редких случаях применение прибора может стать причиной появления на коже сине-фиолетовых гематом, которые сохраняются в течение 5–10 дней. После исчезновения гематом на коже могут остаться пятна буроватого цвета (гиперпигментация), которые могут сохраняться в течение длительного времени.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупредительные указания, касающиеся приема солнечных ванн до и после применения эпилятора!

Солнечные ванны перед применением эпилятора

1. Использовать прибор можно только спустя как минимум 2 недели после приема солнечных ванн.
2. Перед применением проверьте, не появились ли на коже солнечные ожоги. Не используйте прибор до полного заживления солнечных ожогов.
3. Затем проведите тест на переносимость на загорелой коже, чтобы определить подходящий уровень интенсивности.



Солнечные ванны после применения эпилятора

1. В течение 48 часов после применения эпилятора нельзя принимать солнечные ванны. Если на коже еще остается покраснение, защищайте ее от солнечных лучей!
2. В течение первых двух недель после эпиляции защищайте кожу от солнца с помощью одежды или солнцезащитного средства (фактор защиты 30 и выше).

Загар с использованием искусственного света

Указания, содержащиеся в разделах «Солнечные ванны перед применением эпилятора» и «Солнечные ванны после применения эпилятора» действительны и для загара, полученного с использованием искусственного света и лосьонов для автозагара.

Не используйте прибор в течение 24 часов до и после посещения сауны или бассейна, в противном случае оставшийся на коже хлор может вызвать раздражение.

УКАЗАНИЕ

- Используйте прибор только с насадками или принадлежностями, рекомендованными Beurer GmbH.
- Прибор можно использовать при температуре 5–40 °С.
- Незамедлительно отключите прибор, если при его использовании Вы увидели дым или почувствовали запах дыма.
- Не используйте прибор, если воздуходувное отверстие на приборе треснуло, отломалось или вообще отсутствует.
- После применения храните прибор в оригинальной картонной упаковке.
- Во избежание повреждений не подвергайте прибор длительному (в течение нескольких часов) воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолета.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соответствующие изображения представлены на стр. 3.

- | | |
|---|--|
| 1 Световое окно | 6 Кнопка пуска |
| 2 Датчик контакта с кожей | 7 Индикатор интенсивности (5 уровней) |
| 3 Контрольная лампа функции охлаждения | 8 Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» |
| 4 Контрольная лампа автоматической подачи световых импульсов | 9 Разъем USB-C |
| 5 Контрольная лампа контакта с кожей | |

Характеристики безопасности

Прибор оснащен встроенным **УФ-фильтром**, блокирующим вредное ультрафиолетовое излучение.

Для защиты глаз в прибор встроен **датчик контакта с кожей** **2**. Он предназначен для того, чтобы предотвратить подачу светового импульса, когда прибор направлен в свободное пространство. Световой импульс подается, только когда датчик **2** достаточно плотно прилегает к коже.

6. НАЧАЛО РАБОТЫ

6.1 Подготовка к применению

Перед применением прибора необходимо подготовить его и провести тест на переносимость.

1. С помощью таблицы цветов кожи и волосяного покрова (находится на обратной стороне инструкции по применению) определите, какой уровень интенсивности подходит для Вас. Если в таблице стоит знак «х», прибор для Вас не подходит.

2. Перед каждым применением прибора сбривайте волосы в тех зонах, которые Вы будете обработать. Используйте бритвенный станок, а не крем для депиляции.



3. Перед обработкой участка кожи убедитесь, что волосы на нем сбриты, а кожа вытерта насухо и очищена (на ней нет остатков пудры, крема, косметики или дезодоранта).



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора не очищайте кожу легковоспламеняющимися жидкостями, такими как спирт или ацетон.

4. Протирайте световое окно **1** и датчик контакта с кожей **2** сухой салфеткой, не оставляющей ворсинки.



5. За 48 часов до полной эпиляции проведите тест на переносимость на каждом участке, который собираетесь обрабатывать (см. главу «6.2 Тест на переносимость»).

6.2 Тест на переносимость

1. Подключите сетевой адаптер к разъему USB-C **9** на нижней стороне прибора.
2. Вставьте сетевой адаптер в соответствующую розетку. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** непрерывно горит белым светом. Теперь прибор находится в режиме ожидания.
3. Чтобы включить прибор, нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** нажатой. На индикаторе интенсивности **7** непрерывно горит белая лампочка (уровень 1). Контрольная лампа функции охлаждения **3** также непрерывно горит белым светом, и запускается вентиляция.



Если планируется обработка лица, то тест на переносимость должен выполняться в зоне, где нет волос, например за ухом или сбоку на шее.

4. Приложите световое окно **1** к коже. Следите, чтобы световое окно **1** и датчик контакта с кожей **2** полностью прилегли к коже. Как только достигается достаточный контакт с кожей, загорается контрольная лампа контакта с кожей **5**.
5. Если контрольная лампа контакта с кожей **5** горит, нажмите кнопку пуска **6**, чтобы подать световой импульс на уровне 1. Вы увидите светлую вспышку, услышите потрескивание.
6. Приложите датчик контакта с кожей **2** к другому участку, который нужно обработать. Для увеличения уровня интенсивности повторно нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** и нажмите кнопку пуска **6**, чтобы подать световой импульс. Уровень интенсивности не должен превышать максимальное допустимое/рекомендованное значение для Вашего оттенка кожи (см. таблицу цветов кожи и волосяного покрова на обратной стороне инструкции по применению).



Увеличивайте уровень интенсивности только в том случае, если предыдущий уровень интенсивности не вызывает дискомфорта. Если на уровне интенсивности 1 Вы уже испытываете дискомфорт, не увеличивайте интенсивность.



7. Если после воздействия импульса Вы испытали неприятные ощущения, уменьшите интенсивность.
8. Для завершения теста на переносимость выключите прибор. Для этого удерживайте кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** нажатой в течение 2 секунд. Индикатор интенсивности **7** гаснет, горит только кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8**. Вентиляция автоматически отключается через несколько секунд после выключения. Через 48 часов осмотрите обработанные участки кожи. Если кожа на этих участках выглядит как обычно (реакция отсутствует или наблюдается лишь незначительное покраснение), то протестированные зоны можно обрабатывать, используя тот же уровень интенсивности, который был установлен при проведении теста.



Если на обработанных участках наблюдается кожная реакция (например, покраснения или отеки), подождите, пока симптомы полностью не пройдут. После этого вновь проведите тест на переносимость, используя более низкий уровень интенсивности. Если на обрабатываемой поверхности кожи снова проявится реакция, проконсультируйтесь с врачом.

7. ПРИМЕНЕНИЕ

1. Подключите сетевой адаптер к разъему USB-C **9** на нижней стороне прибора. Вставьте сетевой адаптер в соответствующую розетку. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** горит непрерывно. Теперь прибор находится в режиме ожидания.
2. Чтобы включить прибор, нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** нажатой. На индикаторе интенсивности **7** непрерывно горит белая лампочка (уровень 1). Контрольная лампа функции охлаждения **3** также непрерывно горит белым светом, и запускается вентиляция.
3. Чтобы повысить уровень интенсивности, нажимайте кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** до тех пор, пока не будет достигнуто нужное значение.
4. Приложите световое окно **1** к коже и нажмите кнопку пуска **6**, чтобы подать световой импульс. Убедитесь, что световое окно **1** полностью прилегает к коже и что контрольная лампа контакта с кожей **5** указывает на достаточный контакт. Вы увидите светлую вспышку и услышите потрескивание. Через 1–3 секунды (в зависимости от уровня интенсивности) прибор будет готов к подаче следующего импульса.

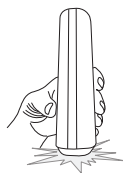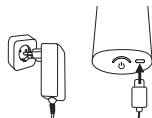

7.1 Способы применения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя дважды обрабатывать один и тот же участок в рамках одного сеанса. Многократная обработка одного участка повышает риск появления побочных эффектов.



Импульсы прибора рекомендуется наносить рядами; при этом каждый следующий ряд необходимо начинать с конца предыдущего и вести до другого конца. Этот метод обеспечивает лучший контроль уже обработанных участков кожи и помогает избежать повторной обработки одной и той же поверхности или их пересечения.

Способ применения 1: режим автоматической подачи световых импульсов

Обеспечьте достаточный контакт датчика **2** с кожей. Нажмите и удерживайте кнопку пуска **6** нажатой в течение двух секунд. Теперь прибор подает световые импульсы автоматически через равномерные промежутки времени, контрольная лампа автоматической подачи световых импульсов **4** горит непрерывно. В этом режиме нажимать кнопку пуска **6** не требуется. Режим автоматической подачи световых импульсов выключается коротким нажатием кнопки пуска **6**. Режим автоматической подачи световых импульсов подходит, прежде всего, для обработки больших участков, например ног.

Способ применения 2: подача отдельных световых импульсов

Отпускайте кнопку пуска **6** после каждой подачи светового импульса. Для подачи следующего импульса переместите прибор на участок, расположенный непосредственно рядом с только что обработанным участком. Убедитесь, что световое окно **1** и датчик контакта с кожей **2** полностью прилегают к коже. Этот режим гарантирует точную обработку и подходит, например, для коленей или лодыжек.



Если прибор не подает световые импульсы и контрольная лампа контакта с кожей **5** не загорается, значит, датчик **2** плохо контактирует с кожей.



Если прибор покажется Вам слишком горячим, дайте ему остыть в течение нескольких минут. Спустя некоторое время, когда прибор остынет, процедуру можно будет продолжить.

7.2 Особые указания по обработке участков на лице

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если расстояние до глаза меньше 20 см, рекомендуется использовать защитные очки. В качестве защитных очков рекомендуется использовать защитные очки, соответствующие требованиям регламента ЕС 2016/425 и стандартам EN 166:2001 и ISO:12609-1:2021.
- Мужчинам не рекомендуется использовать прибор на лице.
- При использовании прибора на лице не устанавливайте уровень интенсивности выше 2.
- Не используйте прибор для обработки лица выше скул, а также на глазах, бровях и ресницах, поскольку это может привести к тяжелым повреждениям глаз. Не используйте прибор на слизистой оболочке носа и ушей.

- Кожа на лице очень чувствительная и требует особого ухода. Во избежание негативных последствий обязательно соблюдайте все предостережения и указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по применению. Прежде чем проводить эпиляцию на лице, мы рекомендуем попробовать обработать другие участки тела и понять, как прибор воздействует на Вас. С помощью этого прибора можно обрабатывать все зоны лица, расположенные ниже линии скул, в частности участки над верхней губой, щеки, челюсть, подбородок и шею.
1. За 48 часов до эпиляции обязательно проведите выборочный тест на переносимость (см. главу «6.2 Тест на переносимость»). Чтобы определить подходящий уровень мощности, проводите тест на переносимость на участках без волос, например за ухом или сбоку на шее.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Зону, на которой проводился тест на переносимость, можно обрабатывать не ранее чем через 1 неделю после этого.
2. Очертите обработанные участки белым контурным карандашом для глаз. Используйте разметку в качестве ориентира для подачи импульсов. Таким образом можно избежать наложения обрабатываемых поверхностей или эпиляции нежелательных зон на лице.
 3. Воспользуйтесь зеркалом, чтобы правильно приложить прибор к обрабатываемой поверхности.
 4. Соблюдайте инструкцию по применению и особенно тщательно выполняйте специальные указания, приведенные ниже.

Эпиляция зоны над верхней губой

Расположите световое окно **1** прибора, как показано на рисунке. Подайте импульс на каждый отмеченный участок. Избегайте воздействия лучей на носдри и губы, поскольку эти участки чувствительнее остальных.



Чтобы обеспечить натяжение кожи на обрабатываемом участке, плотно подожмите/сомкните губы или карандашом нанесите на них (а также по контуру) плотный слой белого пигмента. Эта белая линия будет отражать энергию излучения и защищать губы от ее воздействия, если Вы по ошибке направите на них импульс.

Эпиляция щек и подбородка

Расположите световое окно **1** прибора, как показано на рисунке. Обработайте всю поверхность щеки, участок за участком, подавая по одному импульсу в каждый.



Эпиляция шеи и нижней части подбородка

Расположите световое окно **1** прибора, как показано на рисунке. Подайте импульс на каждый участок, двигаясь от одной стороны шеи/подбородка к другой.



Уход за кожей лица после эпиляции

- Нанесите на кожу успокаивающий лосьон, например с алоэ вера.
- Как минимум в течение 24 часов после эпиляции не пользуйтесь отшелушивающими и осветляющими кремами и аналогичными продуктами, поскольку они могут вызвать раздражение обработанной кожи.
- Как минимум в течение 48 часов после обработки кожи прибором избегайте длительного (более 15 минут) прямого воздействия солнечных лучей. Если в течение этого периода обработанная кожа все же подвергается воздействию солнечных лучей, на нее обязательно нужно нанести солнцезащитное средство с фактором защиты 30 или выше.
- Не выщипывайте волосы в обработанных зонах и не удаляйте их с помощью воска.

Помните, что для достижения полноценного и долговременного результата эпиляции должен пройти полный жизненный цикл волос.

7.3 Частота применения прибора

При обработке тела

Первая и вторая недели	Использовать три раза в неделю
С третьей по пятую неделю	Использовать два раза в неделю
Начиная с шестой недели	Использовать один или два раза в месяц (при необходимости повторить)

При обработке лица

- Первые 6 сеансов эпиляции прибором проводятся с интервалом примерно в две недели.
- Сеансы с 7-го по 12-й проводятся с интервалом примерно в четыре недели. После этого используйте прибор время от времени при необходимости, пока не будет достигнут долговременный результат. Таков рекомендованный план использования прибора, дающий наилучшие результаты, что было подтверждено испытаниями. Вы также можете составить собственный план эпиляции и получить удовлетворительные результаты.

7.4 После применения

1. Если сеанс эпиляции завершен, нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд. Прибор переключается в режим ожидания. В режиме ожидания кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ./интенсивность» **8** горит непрерывно.
2. В режиме ожидания вентилятор работает в течение нескольких секунд, пока прибор не остынет.
3. После остановки вентилятора извлеките сетевой адаптер из розетки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте после обработки кожи антиперспирант/дезодорант, так как он может вызвать раздражение.


8. ОЧИСТКА И УХОД

Мы рекомендуем после каждого сеанса эпиляции очищать прибор, в особенности световое окно **1**.

Не используйте для очистки растворители, а также другие агрессивные очистители или абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить поверхность прибора.

Ни в коем случае не погружайте прибор в воду полностью или частично!

1. Перед очисткой прибора вынимайте сетевой адаптер из розетки.
2. Очищайте корпус прибора сухой и чистой салфеткой.
3. Осторожно очистите световое окно **1** и датчик контакта с кожей **2** слегка влажной безворсовой салфеткой.

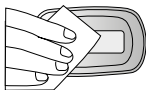

9. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ?

«Прибор не включается»

- Убедитесь, что соединительный кабель правильно подключен к прибору.
- Убедитесь, что сетевой адаптер вставлен в розетку.

«При нажатии кнопки пуска **6** не подается световой импульс»

- Убедитесь в наличии достаточного контакта с кожей; световое окно **1** и датчик контакта с кожей **2** должны плотно и равномерно прилегать к коже. В целях безопасности при нажатии кнопки вспышки импульс подается только в том случае, если датчик **2** достаточно плотно прижат к коже.
- Если контрольная лампа контакта с кожей **5** на приборе не загорается, это означает, что датчик **2** обнаружил недостаточный контакт прибора с кожей. Обеспечьте требуемый контакт с кожей или обратитесь в сервисную службу.

10. УТИЛИЗАЦИЯ




В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы утилизируйте прибор отдельно от бытового мусора. Утилизация может производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования прибора. Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в коммунальную организацию, занимающуюся утилизацией. Информацию о приеме отслуживших приборов можно получить в местной администрации, организации по утилизации мусора или у продавца.



11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	IPL 7800 Cool Pro (с функцией охлаждения)	
Обрабатываемая поверхность	3,8 см ²	
Технология	IPL (технология интенсивного импульсного излучения, для домашнего применения)	
Длина волны	530–1100 нм	
Макс. уровень энергии	не более 5 Дж/см ²	
Количество уровней интенсивности на выбор	5	
Время между импульсами	Уровень 1: 1,5 с Уровень 2: 1,8 с Уровень 3: 2,1 с Уровень 4: 2,5 с Уровень 5: 2,8 с	
Макс. количество световых импульсов	до 1 000 000	
Размеры	16,4 x 6,1 x 3,9 см	
Масса	ок. 280 г	
Температура	Эксплуатация	от +5 до +40 °С
	Хранение	от –20 до +55 °С
Относительная влажность воздуха	Эксплуатация	≤ 80 %
	Хранение	5–95 % (без образования конденсата)

Блок питания

Номер модели	FX48E-120400C
Вход	100–240 В~ 50/60 Гц, 1,0 А
Выход	12,0 В  4,0 А 48 Вт
Класс защиты	Данное устройство имеет двойную защитную изоляцию (класс защиты II) 
Полярность	
Средняя эффективность при эксплуатации	$\geq 89,38 \%$
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке	$\leq 0,08 \text{ Вт}$

Возможны технические изменения.

12. ГАРАНТИЯ

Более подробная информация о гарантии и гарантийных условиях находится в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки.