



## Minimasseerija

### Kasutusjuhend



Beurer GmbH • Söfinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 •  
Faks: +49 (0)731 / 39 89-255 [www.beurer.de](http://www.beurer.de) • E-post: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)



### 1. Otstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärkidel. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis tulenevad toote valel otstarbel või hooletust kasutamisest.

See seade on mõeldud ainult inimkeha üksikute osade masseerimiseks. Ärge kasutage seda masseerimiseseadet, kui mõni alljärgnevatest hoiatustest Teie kohta kehtib.

#### HOIATUS!

Masseerijat ei tohi kasutada:

- lastel;
- kui masseeritavas kehapiirkonnas esineb tavalisest kõrvalekaldeid või vigastusi (nt põletused, lahtised haavad, armid, lööve vm vigastused);
- vereringehäirete või peeringluse korral;
- pea, luude (liigesed, selgroog) või muude tundlike kehapiirkondade masseerimiseks;
- pärast operatsiooni;
- raseduse ajal;
- pärast ravimite või alkoholi tarbimist (vähenenud tähelepanuvõime!);
- masinatega töötamisel.
- ainult välispidiseks kasutamiseks.

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete ega vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ega isikud, kes ei tunne seadet ega oska sellega ümber käia, va juhul, kui neid juhendab ohutuse eest vastutav isik või neid õpetatakse seadet kasutama. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Seadme kasutamine ei asenda arstiga nõu pidamist ega ravi.

Pidage enne masseerija kasutamist oma arstiga nõu juhul, kui:

- Teile on paigaldatud südamestimulaator, implantaat vm sarnane seade;
- Teil esineb teadmatu päritoluga valu;
- Te ei ole kindel, kas seade teile sobib.

#### Märkus

Massaaž peab alati olema meeldiv ja lõõgastav. Valu või ebamugavustunde korral lülitage masseerija välja või muutke oma asendit või kontaktsurvet seadmega.

### 2. Ohutusala teave.

#### HOIATUS!


- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüjaga või klienditeenindusega.
- Ärge kasutage muid tarvikuid peale tootja poolt soovitatute.
- Ärge kunagi avage seadet ega üritage seda parandada, sest sellisel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam tagatud. Nende juhiste eiramisel kaotab seadme garantii kehtivuse. Kui seadet on vaja remontida, siis võtke ühendust Beureri klienditeeninduse või meie volitatud edasimüüjaga.

### 3. Kasutamine

Patarei paigaldamine või vahetamine:

- Keerake patareikambri kaas päripäeva pealt.

- Sisestage kolm leelispatareid või tavalist AAA-patareid patareikambrisse vastavalt sealsele märgistusele. - Kontrollige alati, et patareid on õigesti sisestatud.
- Pange patareikambri kaas peale tagasi. Kontrollige alati, et see on õigesti paigas.

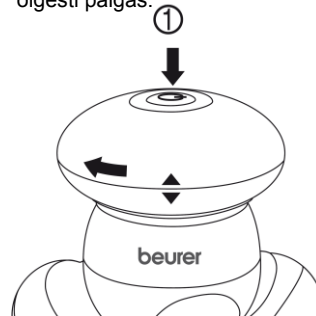

Vajutatav nupp

- ① 1x Sees
- ① 2x Väljas

#### Märkus patareide käsitlemise kohta

Hoida patareid lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad patareid suhu panna ja alla neelata. See võib olla väga ohtlik. Patarei allaneelamise korral võtke kohe ühendust arstiga!

- Tavalisi patareid ei tohi laadida, kuumutada ega tulle visata (plahvatusoht!).
- Vahetage alati mõlemad patareid korraga. Kasutage koos sama tüüpi patareid. Ärge kasutage laetavaid akusid.
- Lekkivad patareid võivad seadet kahjustada. Kui Te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke sellest patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid akusid.

### 4. Seadme puhastamine ja hooldamine

Seade ei vaja erilist hooldust. Regulaarselt tuleb puhastada ainult seadme välispinda. Puhastamise ajaks võtke seadmest patareid välja.

Puhastage minimasseerijat õrnalt ainult veidi niisutatud lapiga.

- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Ärge kunagi pange seadet vette, sest vesi võib seadmesse pääseda selle rikkuda.

### 5. Kasutusest kõrvaldamine

Seadme kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida Euroopa Nõukogu direktiivis 2002/96/EC-WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavate ametnikega.

Tavalised ja laetavad täiesti kuivad kasutatud patareid tuleb viia spetsiaalsesse konteineritesse, ohtlike jäätmete kogumispunktidest või elektriliste seadmete edasimüüjatele. Patareide nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine on teie seaduslik kohustus.

**NB!** Keskkonda kahjustavaid aineid sisaldavatel patareidel kasutatakse järgmisi tähistusi: Pb = patarei sisaldab pliid, Cd = patarei sisaldab kaadmiumi, Hg = patarei sisaldab elavhõbedat.

