

beurer


TB 50

LV Elektriskā zobu birste


Lietošanas norādījumi 6

CE




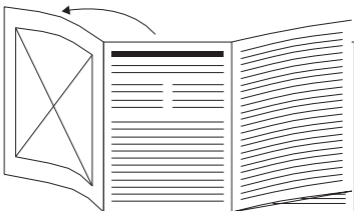


LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiēt 3. lappusi.

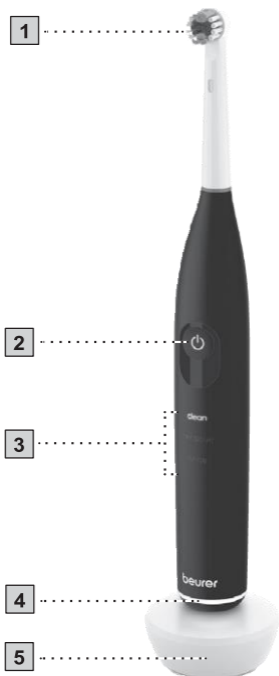


A

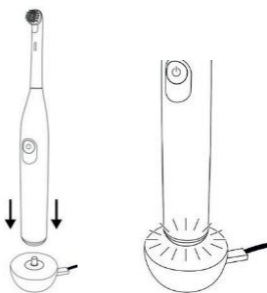


B

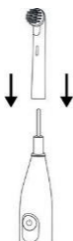


C

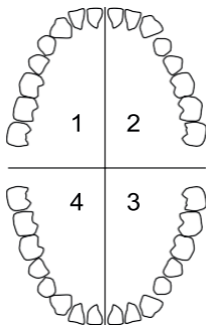


D

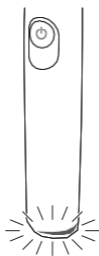

E

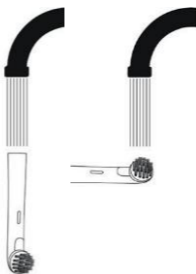

F

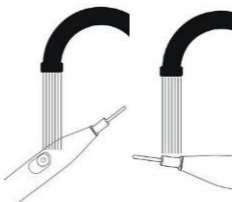



Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus.

Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Nodrošiniet, lai lietošanas instrukcijas būtu pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.

SATURS

1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	6
2. KOMPLEKTĀCIJA.....	8
3. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI	9
4. PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS	11
5. IERĪCES APRAKSTS	11
6. LIETOŠANA	11
6.1 Sagatavošanās lietošanai	11
6.2 Lietošanas uzsākšana	12
7. TĪRĪŠANA UN APKOPE	12
8. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS.....	13
9. UTILIZĀCIJA.....	13
10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.....	14
11. GARANTIJA	14

1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS

- Uzglabājiet uzlādes ierīci un tīkla adapteri tālāk no ūdens vai citiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet lādētāju vai tīkla adapteri tuvu izlietnei vai vannai, kas pilna ar ūdeni.

- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojājumu pazīmes vai tā nedarbojas pareizi. Šādos gadījumos sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.
- Ja strāvas padeves savienojuma kabelis ir bojāts, lādētājs jāutilizē.
- Izmantojiet tikai USB lādēšanas kabeli ar tīkla adapteri un attiecīgo lādētāju, kas ir ierīces komplektācijā.
- Nevelciet tīkla kabeli vai ierīci, lai atvienotu tīkla daļas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

- Tīkla daļas kontaktdakšu drīkst darbināt tikai ar tajā norādīto spriegumu.
- Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt vai labot ierīci saviem spēkiem, citādi nevar garantēt tās pareizu darbību. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.

Piezīmes par bateriju lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Ja āda vai acis nonāk saskarē ar baterijas elementa šķidrumu, izskalojiet skartās vietas ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Sprādziena risks! Nemetiet baterijas ugunī!
- Ja no baterijas ir noplūdis šķidrums, uzvelciet aizsargcimdus un notīriet baterijas nodalījumu ar sausu drānu.
- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai saspiest.

UZMANĪBU

- Aizsargājiet baterijas no pārmērīga karstuma iedarbības.
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos lādētājus.
- Pirms lietošanas baterijas ir pareizi jāuzlādē. Vienmēr ir jāievēro ražotāja norādījumi un šajā lietošanas instrukcijā sniegtās specifikācijas par pareizu uzlādi.
- Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru (skatīt nodaļu "Sagatavošana lietošanai").
- Lai baterijas kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, vismaz 2 reizes gadā bateriju pilnībā uzlādējiet.

2. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliedzinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

- 1 elektriskā zobu birste
- 1 sukas uzgalis
- 1 lādētājs
- 1 USB uzlādes kabelis ar tīkla adapteri

- 1 uzglabāšanas kastīte
- 1 lietošanas instrukcijas eksemplārs

3. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

BĪSTAMI

Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.

UZMANĪBU

Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.

PIEZĪME

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta sistēma vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.



Informācija par produktu
Svarīga informācija



Izlasiet instrukcijas



Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEIA



Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.



Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.



Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**CE marķējums**

Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.



Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



Marķējums iepakojuma identificēšanai materiāls.

A = materiāla saīsinājums,
B = materiāla numurs: 1 = plastmasa, 7 = papīrs un kartons.



Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajai Karalistei



III klases ierīce



Importētāja simbols



Ražotājs

IPX4

Aizsardzība pret ūdens šļakatām

ta=40°C Nominālā apkārtējās vides temperatūra



Barošanas bloks, pārslēgšanas režīms;
barošanas bloks ar pārslēgšanas režīmu;
SMPS



Pret īssavienojumu drošs drošības izolācijas transformators



PIN1+ PIN4•

USB / Micro-USB savienojums



PIN1+
PIN4•



Neizmantojiet strāvas adapteri, ja tā kontaktdakša ir bojāta.



Energoefektivitātes līmenis 6



II aizsardzības klases ierīce

Ierīcei ir dubulta aizsardzība, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei.



Tikai lietošanai iekštelpās.

4. PAREDŽĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

Ierīci izmantojiet tikai cilvēku zobu tīrīšanai. Neizmantojiet ierīci dzīvniekiem. Nav piemērots bērniem līdz 8 gadu vecumam. Ierīce ir paredzēta tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajiem mērķiem. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- 1 Birstes galviņas**
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma poga**
Īsi nospiežot: Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
Nospiediet un pieturiet: Maina režīmu
- 3 Režīma indikators**
- 4 Gaismas gredzens**

Spiediena kontrole

Sarkans gaismas gredzens: Pārāk liels spiediens
Balts gaismas gredzens: Pareizs spiediens

Uzlādes līmeņa indikators

Gaismas gredzens mirgo baltā krāsā: Zema akumulatora jauda
Gaismas gredzens pulsē baltā krāsā: Akumulatora uzlāde
Gaismas gredzens pastāvīgi balts: Uzlādēts akumulators

- 5 Bāzes lādētājs**

6. LIETOŠANA

6.1 Sagatavošanās lietošanai

Elektriskās zobu birstes uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet elektrisko zobu birsti. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- Savienojiet USB uzlādes kabeli ar pamatnes lādētāju **5**. USB uzlādes kabeli pievienojiet USB pieslēgvietā vai piemērotā kontaktligzdā, izmantojot komplektā iekļauto adapteri.
- Uzlieciet elektrisko zobu birsti uz lādētāja pamatnes. **5** Uzlādes procesa laikā gaismas gredzens **4** pulsē baltā krāsā (sk. attēlu **A**)* Tiklīdz elektriskā zobu birste ir pilnībā uzlādēta, gaismas **4** gredzens pastāvīgi iedegas baltā krāsā.

Birstes galviņas uzstādīšana

Novietojiet birstes galviņu uz birstes līdz tā iespiežas vietā. Pārliecinieties, ka birstes galviņa ir pavērsta tajā pašā virzienā, kurā atrodas ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma poga.



Mēs iesakām mainīt birstes galviņu ik pēc 3 mēnešiem. Ja birstes galviņas sari ir nodiluši vai saplaisājuši, tā var būt jāmaina biežāk.

6.2 Lietošanas uzsākšana

1. Lai ieslēgtu elektrisko zobu birsti, uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas/ režīma pogu **2**

Elektriskā zobubirste ik pēc 30 sekundēm īsi vibrē, lai atgādinātu, ka visi 4 žokļa kvadranti jātīra vienādu laiku **C**. Elektriskajai zobu birstei ir automātiskais taimeris, un pēc 2 minūtēm tā vibrē trīs reizes. Zobu birste automātiski izslēdzas pēc 6 minūtēm.



Elektriskajai zobu birstei ir spiediena sensors. Tiklīdz piespiežat birstes galviņu pārāk stingri pie zobiem vai smaganām lietošanas laikā, gaismas gredzens iedegsies sarkanā krāsā.

2. Izvēlieties vēlamo režīmu, nospiežot un turot nospiestu ON/OFF /režīma **2** pogu Režīma indikatorā iedegsies pašlaik izvēlētais režīms.

Ir pieejami šādi režīmi:

“clean”	Rūpīgai un pilnīgai tīrīšanai
“sensitive”	Maigai un smaganām saudzīgai tīrīšanai
“white”	Tīrīšana dabiskai zobu balināšanai

3. Lai priekšlaicīgi atceltu sesiju, īsi nospiediet ON/OFF/režīma pogu **2**.
4. Notīriet ierīci, kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Notīriet ierīci un birstes galviņu.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1

1. Velciet birstes galviņu uz augšu un uz leju.
2. Notīriet birstes galviņu **1** zem tekoša ūdens **E**

1

Pārliecinieties, ka ir iztīrīta birstes galviņas iekšpuse

3. Notīriet ierīci zem tekoša ūdens **F**. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī! Ūdens var iekļūt ierīcē un to sabojāt.
4. Regulāri tīriet bāzes lādētāju **5** ar mitru drānu un maigu ziepju šķīdumu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Uzglabājiet pamatni **5** un USB uzlādes kabeli ar tīkla adapteri tā, lai tie netiktu pakļauti ūdens iedarbībai.

8. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS

Lai iegādātos piederumus un rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar servisa adresi savā valstī (skatiet servisa adresu sarakstu). Piederumi un rezerves daļas ir pieejamas arī mazumtirgotāju veikalos.

Apzīmējums	Preces numurs un/vai pasūtījuma numurs
Birstes galviņas Clean 4 gab.	101.56
Birstes galviņas Clean 8 gab.	101.54
Birstes galviņas Sensitive 4 gab.	101.58
Birstes galviņas Sensitive 8 gab.	101.39

9. UTILIZĀCIJA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu iznīcināšanu. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm. Veco ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu var noskaidrot, piemēram, vietējās vai pašvaldības iestādēs, vietējos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos vai pie sava mazumtirgotāja.



Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, otrreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāiznīcina.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svīnu

Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu



Akumulatora izņemšana

1. Ar asu priekšmetu noņemiet gumijas blīvējumu zobu birstes apakšdaļā.
2. Noņemiet membrānu ar asu priekšmetu.
3. Tagad redzamo skrūvi var noņemt ar piemērotu skrūvgriezi.
4. Noņemiet zobu birstes apakšējo daļu.

5. Izvelciet zobu birstes iekšējo korpusu.
6. Izņemiet akumulatoru no iekšējā korpusa.
7. Izmetiet bateriju atsevišķi speciāli paredzētās savākšanas kastēs, otrreizējās pārstrādes punktos vai elektronikas mazumtirgotāju veikalos.

10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Tips	TB 50
Izmēri	Ierīce: 205 x 29 mm Uzglabāšanas kastīte 213 x 57 x 34 mm
Svars	Ierīce: 214 g (zobu birste + birstes galviņa + lādētājs) Uzglabāšanas kaste ar piederumiem: 224 g
Baterija: Jauda Nominālais spriegums Tipa apzīmējums	1500 mAh 3.7 V Litija jonu baterija
Elektropadeve	Ieejošā strāva: 100-240 V~; 50/60 Hz 0,2 A Izvade: 5,0 V \equiv 1,0 A, 5,0 W

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

11. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.