

beurer cellulite releaZer®



LV cellulite releaZer compact ierice

LATVIEŠU



Rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus un saglabāiet tos turpmākai izmantošanai, pārliedzinieties, ka tie ir pieejami citiem lietotājiem un ievērojiet tajos sniegto informāciju.

BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem, šādā gadījumā nav iespējams garantēt tās turpmāku pareizu darbību. Šīs instrukcijas neievērošanas gadījumā garantiju zaudēs spēku.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.

Saturs

| | |
|--|-----------|
| 1. Komplektācija | 5 |
| 2. Apzīmējumi un simboli | 5 |
| 3. Piezīmes: | 7 |
| 4. Paredzētais izmantojums | 9 |
| 5. Ierīces apraksts | 11 |
| 6. Sākotnējais lietošanas/uzlādes process | 12 |
| 7. Lietošana | 13 |
| 7.1 Sagatavošanās lietošanai | 13 |
| 7.2 Cellulite releaZer compact ieslēgšana / vibrācijas iestatījuma izvēle | 14 |
| 7.3 Padomi par lietošanu | 15 |
| 7.4 Augšstilba ārējās daļas masāža | 15 |
| 7.5 Augšstilba aizmugurējās daļas masāža..... | 16 |
| 8. Tīrīšana un apkope | 18 |
| 9. Utilizācija | 19 |
| 10. Tehniskie dati | 20 |
| 11. Garantija/ Apkope | 20 |





1. Komplektācija










Pārbaudiet, vai ierīces iepakojums nav sabojāts, un pārlicinieties, vai tajā ir visas ierīces sastāvdaļas. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.







1x cellulite releaZer compact ierīce / 1x mikro-USB uzlādes kabelis / 1x tīkla adapteris / 1x lietošanas instrukcija.

2. Apzīmējumi un simboli

Šajos lietošanas norādījumos parādās šādi simboli:

| | |
|--|--|
|  | BRĪDINĀJUMS Brīdinājums par traumas vai kaitējuma veselībai risku. |
|  | SVARĪGI Drošības norādījums, kas liecina par iespējamu ierīces/piederuma bojājuma risku. |
|  | Piezīme Svarīga informācija |
|  | Ievērojiet lietošanas norādījumus |

| | |
|---|--|
|  | Ražotājs |
|  | Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEIA |
|  | Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |
|  | Marķējums iepakojuma materiāla identifikācijai A = materiāla kods, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons. |
|  | Izmantojiet tikai telpās |
|  | Ierīce ir dubulti aizsargāta, tāpēc atbilst 2. aizsardzības klasei. |
| IP20 | Aizsargāts pret cietiem svešķermeņiem, kuru diametrs ir 12,5 mm un lielāks. |
|  | Energoefektivitātes klase 6 |
|  | Līdzstrāva |
|  | Pret īssavienojumu drošs drošības izolācijas transformators |

| | |
|--|---|
|  | Elektrotīkla daļa |
|  | Polaritāte. |
|  | CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām. |
|  | Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām. |
|  | Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme |
|  | Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

3. Piezīmes:



BRĪDINĀJUMS

Drošības norādījumi par cellulīte releaZer compact ierīces lietošanu

- Uzglabāt iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā. Aizrīšanās risks!
- Cellulīte releaZer compact nav medicīniska ierīce. Tā ir masāžas ierīce.

- Pirms lietošanas pārlicinieties, ka ierīci un piederumiem nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.
- Remontu drīkst veikt tikai Klientu apkalpošanas dienests vai pilnvaroti mazumtirgotāji. Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt vai labot cellulīte releaZer compact ierīci saviem spēkiem, jo pēc tam vairs nevar garantēt tās nevainojamu darbību. Šo norādījumu neievērošana anulē garantiju. Nekad nemēģiniet labot ierīci saviem spēkiem!
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem.

Piezīmes par bateriju lietošanu

- Ja āda vai acis nonāk saskarē ar uzlādējamās baterijas elementa šķidrumu, izskalojiet skartās vietas ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **⚠ Aizrīšanās risks!** Mazi bērni var norīt un aizrīties ar baterijām. Tāpēc baterijas uzglabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Aizsargājiet baterijas no pārmērīga karstuma iedarbības.
- **⚠ Sprādziena risks!** Nemetiet baterijas ugunī!
- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai saspīest.
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos lādētājus.
- Pirms lietošanas baterijas ir pareizi jāuzlādē. Vienmēr ir jāievēro ražotāja norādījumi un šajā lietošanas instrukcijā sniegtās specifikācijas par pareizu uzlādi.
- Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet bateriju (skatīt 7. sadaļu: Sākotnējā lietošana/uzlādes process).
- Lai baterijas kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, vismaz 2 reizes gadā pilnībā uzlādējiet bateriju.

4. Paredzētais izmantojums



BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci tikai pretcelulīta masāžai Cellulite releaZer compact ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Cellulite releaZer compact nav medicīniska ierīce, tā drīzāk ir masāžas procedūras ierīce. Cellulite releaZer compact drīkst lietot tikai tam mērķim, kam tas ir paredzēts, un tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Jebkāda veida nepareiza lietošana var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci, ja masējamā zonā ir medicīniski traucējumi vai traumas (piemēram, atvērtas brūces).
- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci grūtniecības laikā.
- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci guļot.
- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci transportlīdzeklī.
- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci uz dzīvniekiem.
- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci, kamēr veicat jebkādas darbības, kur negaidīta reakcija varētu būt bīstama.
- Neizmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci uz galvas.
- Neizmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci uz sejas.
- Neizmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci uz dzimumorgāniem.
- Neizmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci pēc tādu vielu lietošanas, kas izraisa kognitīvo funkciju traucējumus (piemēram, pretsāpju medikamenti, alkohols).
- Neizmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci ilgāk par 15 minūtēm (pārkaršanas risks) un pirms atkārtotas lietošanas atstājiet ierīci atdzist vismaz 15 minūtes. Cellulīte releaZer compact ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanās funkciju, kas nozīmē, ka pēc 15 minūšu lietošanas tā automātiski izslēdzas.


- Nelietojiet cellulīte releaZer compact ierīci pirms vai pēc sauļošanās. Tas palielina saules apdegumu risku.

Ja neesat pārliecināts, vai cellulīte releaZer compact ierīce ir piemērota tieši jums, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Pirms cellulīte releaZer compact ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu,

- ja Jums ir smaga slimība vai nesen veikta operācija,
- ja jums ir elektrokardiostimulators, implants vai citi palīgīdzekļi.
- saaukstēšanās ar drudzi, varikozu vēnu, trombozes, flebīta, dzeltes, diabēta, nervu slimību (piemēram, išiass) vai akūtu iekaisumu gadījumā,
- ja jūs ciešat no sāpēm, kuru cēlonis nav zināms.

5. Ierīces apraksts

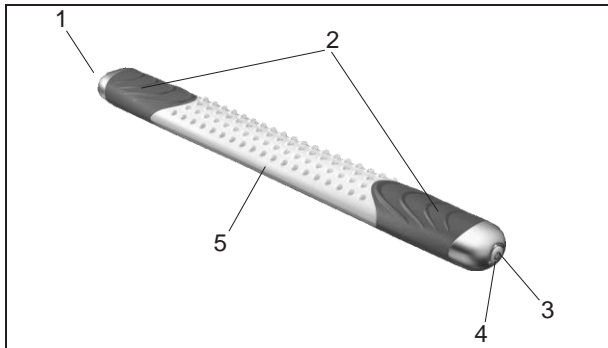


1. Micro USB savienojums

2. Rokturi

3. IESLĒGT/IZSLĒGT poga

4. Funkciju indikators

5. Četras apstrādes virsmas (gluda, ar izciļņiem, gluda mala un asa mala)

| Funkcijas indikatora statuss  | Uzlādes funkcija (pievienots uzlādes kabelis) |
|---|---|
| Funkciju indikatoru mirgo aplī | Uzlāde |
| Funkciju indikatoru nepārtraukti deg | Uzlāde pabeigta |
| Kreisis un labais funkciju indikators mirgo pārmaiņus | Tukša baterija |

6. Sākotnējais lietošanas/uzlādes process


Piezīme:

Pirms cellulite releaZer compact ierīces pirmās lietošanas reizes ļaujiet tai uzlādēties vismaz 3,5 stundas. Rīkojieties šādi:


- Pievienojiet uzlādes kabeli tīkla adapterim un cellulite releaZer compact ierīcei (1. attēls). Pēc tam ievietojiet tīkla adapteri piemērotā kontaktligzdā. cellulite releaZer compact ierīci var arī uzlādēt ar uzlādes kabeli, izmantojot datora vai klēpjatora USB portu (2. attēls).

Kad ierīce tiek uzlādēta, funkciju indikatoru mirgo aplī. Kad cellulite releaZer compact ierīce ir pilnībā uzlādēta, funkciju indikatoru nepārtraukti iedegas. Ja darbības laikā pārmaiņus mirgo kreisis un labais funkciju indikators, cellulite releaZer compact ierīci ir nepieciešams uzlādēt.

1. attēls

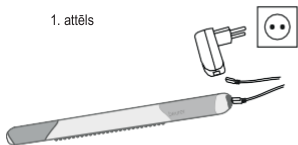

2. attēls

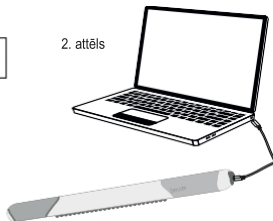

7. Lietošana

7.1 Sagatavošanās lietošanai

Pirms sākat lietot ierīci, viegli iemasējiet masāžas eļļu uz apstrādājamām ķermeņa daļām.

Nelietojiet eļļas vai krēmus ar spēcīgu atvēsinošu vai sildošu iedarbību, jo tie var izraisīt ādas kairinājumu.

1. Uzpiliniet dažus pilienus masāžas eļļas uz plaukstu.
2. Masāžas eļļu vienmērīgi iemasējiet apstrādājamās ķermeņa daļās.
3. Pirms apstrādes noslaukiet rokas ar dvieli, lai tās neslīdētu, lietojot ierīci, un lai novērstu rokturu silikona virsmas bojājumus.

7.2 Cellulite releaZer compact ieslēgšana / vibrācijas iestatījuma izvēle

Nospiediet ON/OFF pogu, lai ieslēgtu cellulite releaZer compact ierīci. Funkciju indikators iedegas zilā krāsā, un tiek aktivizēts pirmais vibrācijas iestatījums. Cellulite releaZer compact ir četri dažādi vibrācijas iestatījumi.

| Darbība | Vibrācijas iestatījums |
|---------------------------|--|
| Viens pogas spiedienu | Cellulite releaZer compact ieslēdzas, un funkcijas indikators iedegas zilā krāsā. Zems vibrācijas iestatījums. |
| Otrais pogas spiedienu | Otrais funkciju indikators iedegas zilā krāsā. Vidējas vibrācijas iestatījums. |
| Trešais pogas spiedienu | Trešais funkciju indikators iedegas zilā krāsā. Spēcīgas vibrācijas iestatījums. |
| Ceturtais pogas spiedienu | Ceturtais funkciju indikators mirgo zilā krāsā. Vibrācija ar pārtraukumiem |
| Piektais pogas spiedienu | Cellulite releaZer compact izslēdzas un funkciju indikators nodziest. |

7.3 Padomi par lietošanu

- Lietošanas laikā turiet cellulīte releaZer compact ierīci ar abām rokām, izmantojot rokturus.
- Lai sasniegtu optimālus rezultātus, izmantojiet cellulīte releaZer compact ierīci reizi divās dienās.
- Pēc lietošanas apstrādātajās vietās var rasties spēcīgs apsārtums vai zilumi. Tas ir pilnīgi normāli un norāda uz to, ka cellulīte releaZer compact ierīce ir lietota pareizi.



Piezīme


Jūs varat izmantot cellulīte releaZer compact visās vietās, kur ir celulīts. Nākamajā nodaļā dotie piemēri, kuros parādīta augšstilba ārējā daļa (iliotibiālā josla) un augšstilba aizmugurējā daļa (bicepsis femoris muskulis), parāda, kā jāizmanto cellulīte releaZer compact ierīce.

7.4 Augšstilba ārējās daļas masāža

Ārējās augšstilba daļas masāžas ilgums ir aptuveni 7 minūtes, un kopumā tā sastāv no trim masāžas posmiem. Lai sāktu masāžu, rīkojieties šādi:

1. Ievērojiet norādījumus, kas sniegti nodaļā "Sagatavošanās lietošanai".
2. Novietojiet kāju, piemēram, uz krēsla, taburetes vai vannas malas. Veiciet visu procedūru uz augšstilba stāvot.
3. Izvēlieties vēlamo vibrācijas iestatījumu (1, 2, 3 vai 4), izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. cellulīte releaZer compact ierīce sāk vibrēt.


4. I masāžas fāze: Apstrādājiet augšstilba ārējo daļu ar uzgaļa pusi, veicot nelielas, ātras, aplveida kustības un izmantojot mērenu spiedienu (apmēram 3 minūtes).
5. II masāžas fāze: Apstrādājiet augšstilba ārējo daļu ar izciļņiem, veicot lēnas, dziļas, aplveida kustības un palielinot spiedienu (apmēram 3 minūtes).
6. III masāžas fāze: Trešais masāžas posms ir drenāža. Virziet ierīci uz ķermeņa centru/ sirdi, izmantojot krāsaino malu un mērenu spiedienu. To darot, sāciet kustību augšstilba ārējās daļas augšā un lēnām virziet kustības sākuma punktu uz leju virzienā uz ceļgalu. Vienai kustībai jābūt aptuveni 10 cm garai. Veiciet šo procesu 5 reizes, pārvietojoties lejup pa augšstilba ārējo daļu, līdz sasniegsiet ceļgala zonu. Beigās ierīci vienu reizi pārvelciet pāri visai augšstilba ārējai daļai.

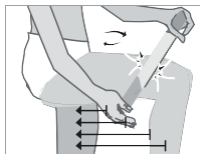


7.5 Augšstilba aizmugurējās daļas masāža

Aizmugurējās augšstilba daļas un sēžamvietas masāžas ilgums ir aptuveni 7 minūtes, un kopumā tā sastāv no trim masāžas posmiem. Lai sāktu masāžu, rīkojieties šādi:

1. Ievērojiet norādījumus, kas sniegti nodaļā "Sagatavošanās lietošanai".
2. Novietojiet kāju uz krēsla vai taburetes. Veiciet visu procedūru uz augšstilba stāvot.
3. Izvēlieties vēlamo vibrācijas iestatījumu (1, 2, 3 vai 4), izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. cellulite releaZer compact ierīce sāk vibrēt.
4. I masāžas fāze: Apstrādājiet augšstilba aizmugurējo daļu ar uzgaļa pusi, veicot nelielas, ātras, apļveida kustības un izmantojot mērenu spiedienu (apmēram 3 minūtes).
5. II masāžas fāze: Apstrādājiet augšstilba aizmugurējo daļu ar izciļņiem, veicot lēnas, dziļas, apļveida kustības un palielinot spiedienu (apmēram 3 minūtes).
6. III masāžas fāze: Trešais masāžas posms ir drenāža. Ar krāsaino malu un mērenu spiedienu virziet cellulite releaZer compact ierīci virzienā uz ķermeņa centru/sirdi. To darot, sāciet kustību augšstilba aizmugurējās daļas (sēžamvietas) augšā un lēnām virziet kustības sākuma punktu uz leju virzienā uz ceļgalu.

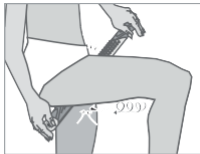

Vienai kustībai jābūt aptuveni 10 cm garai. Veiciet šo procesu 5 reizes, pārvietojoties lejup pa augšstilba aizmugurējo daļu, līdz sasniegsiet ceļgalu, katru nākamo kustību pagarinot par pāris centimetriem. Beigās vienreiz pārvelciet ierīci pāri visai augšstilba aizmugurējai daļai.

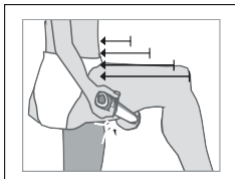

8. Tīrīšana un apkope

Cellulite releaZer compact kalpošanas laiks ir atkarīgs no rūpīgas lietošanas.



SVARĪGI!

- Pēc katras lietošanas reizes notīriet cellulite releaZer compact ierīci ar mitru vai sausu drānu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Aizsargājiet cellulite releaZer compact ierīci no triecieniem, putekļiem, ķimikālijām, krasām temperatūras izmaiņām, elektromagnētiskajiem laukiem un tuvumā esošiem karstuma avotiem (cepeškrāns, sildītāji).

9. Utilizācija

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.



Bateriju iznīcināšana

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, otrreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāiznīcina. Lai izņemtu bateriju no ierīces, ar skrūvgriezi atveriet mikro USB savienojuma vāciņu. Atskrūvējiet četras baterijas turētāja skrūves. Izņemiet bateriju.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svīnu

Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu



10. Tehniskie dati

| | |
|--|---|
| Padeve: Izejošā strāva: | 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A 5.0 V --- 1.0 A, 5.0 W |
| Vidējā aktīvā efektivitāte | ≥ 73.88% |
| Enerģijas patēriņš bez slodzes | ≤ 0.09 W |
| Izmēri | 40 x 3.2 x 4.7 cm |
| Svars | Apt. 330 g |
| <u>Baterija:</u> Jauda Nominālais spriegums Tipa apzīmējums | 2200 mAh 3.7 V Litija jonu |

11. Garantija/ Apkope

Stikāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.