


beurer

MG 101 Masāžas pistole SensorBoost











LV Dziļo audu masāžas ierīce
Lietošanas norādījumi 4



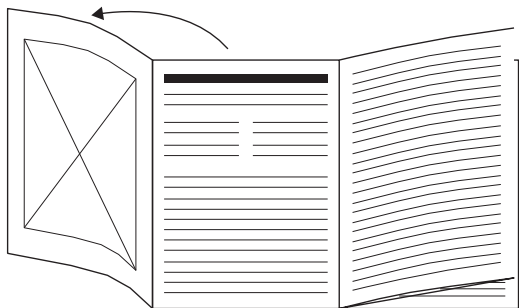

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiet 3. lappusi.

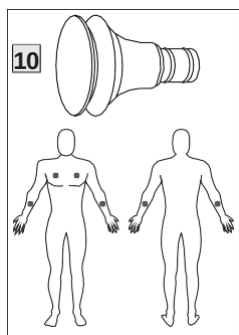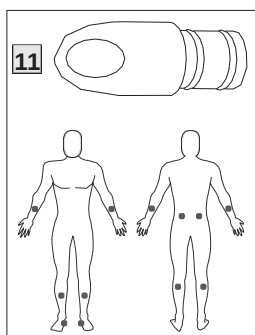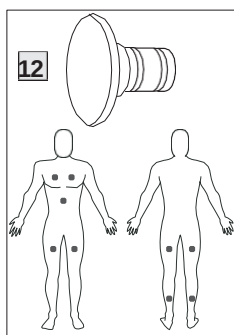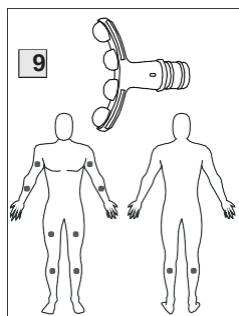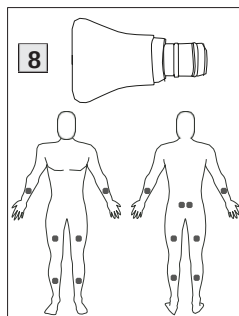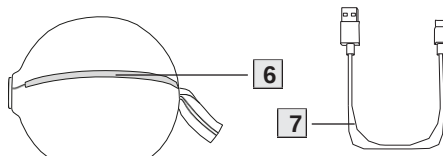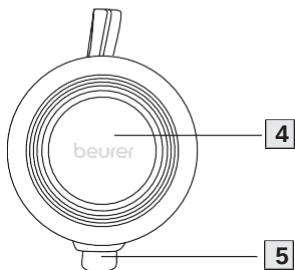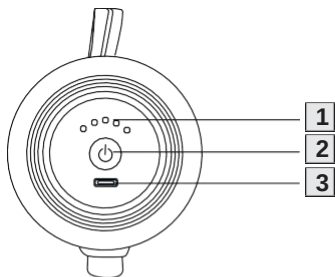



Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai izmantošanai. Padariet to pieejamu citiem lietotājiem un ņemiet vērā tajā ietverto informāciju.

1.	Brīdinājumi un drošības norādījumi	5
2.	Komplektācija.....	6
3.	Paredzētais mērķis	6
4.	Apzīmējumi un simboli.....	7
5.	Ierīces apraksts.....	8
	5.1 Dziļo audu masāžas aparāts	8
	5.2 Piederumi	8
6.	Lietojums.....	8
	6.1 Sākotnējā lietošana/akumulatora uzlāde ..	8
	6.2 Piederuma izvēle/mainīšana	9
	6.3 Ierīces ieslēgšana/ intensitātes līmeņa izvēle.....	9
	6.4 Spiediena indikators	10
7.	Tīrīšana un apkope	10
8.	Ko darīt, ja radušās problēmas?	11
9.	Utilizācija	11
10.	Tehniskās specifikācijas	12
11.	Garantija/ apkope.....	12

⚠️ BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces atverē vai kustīgajās daļās. Nodrošiniet, lai kustīgās daļas vienmēr varētu brīvi kustēties.
- Neiespiediet nevienu ķermeņa daļu, jo īpaši pirkstus, starp kustīgajiem masāžas elementiem vai to turētāju.

1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

▲BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet ierīci, ja masējamā zonā jums ir medicīniska anomālija vai trauma (piemēram, noslīdējis disks, vaļējas brūces).

- Neizmantojiet ierīci, ja lietojat elektrokardiostimulatoru.
- Neizmantojiet ierīci sirds apvidus masāžai.
- Neizmantojiet ierīci uz pietūkušas, apdegušas, iekaisušas vai ievainotas ādas un ķermeņa daļām.
- Neizmantojiet ierīci uz iegriezumiem, kapilāriem, varikozām vēnām, pinnēm, kuperozas ādas, ja jums ir herpes vai citas ādas slimības.
- Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.
- Neizmantojiet ierīci uz balsenes, kaunuma zonā vai citās īpaši jutīgās ķermeņa daļās.
- Neizmantojiet ierīci uz mugurkaula vai tieši uz kaula.
- Neizmantojiet ierīci miega laikā.
- Neizmantojiet ierīci dzīvniekiem.
- Neizmantojiet ierīci pēc medikamentu vai alkohola lietošanas (traucētas kognitīvās spējas!).
- Neizmantojiet ierīci transportlīdzeklī.



Pirms masāžas ierīces lietošanas jākonsultējas ar ārstu, ja:

- ja jums ir smaga slimība.
- ja jums ir tromboze.
- ja jums ir diabēts,
- ja jums ir sāpes, kuru cēlonis nav zināms.

▲BRĪDINĀJUMS

- Pastāv nosmakšanas briesmas! Nelaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.
- Pastāv nosmakšanas briesmas! Glabājiet ierīces piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Pārliecinieties, ka ierīce nenonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekad neņemiet rokās ierīci, kas iekritusi ūdenī.
- Ierīces lietošanas laikā bērni vienmēr ir jāuzrauga.
- Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šos lietošanas norādījumus, pastāv ugunsgrēka risks.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas, jo īpaši, ja tuvumā ir bērni.
- Nekad nelietojiet ierīci zem pārklāja, piemēram, segas vai spilvena.
- Nekad nelietojiet ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Darbiniet ierīci tikai sausās iekštelpās.
- Nekad nelietojiet ierīci vannā vai saunā.

▲SVARĪGI

- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei un tās piederumiem nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.
- Nekad neatveriet korpusu.
- Ierīci turiet tālu no spīdumiem vai asiem priekšmetiem.
- Ja ierīce ir nomesta vai citādi bojāta, to vairs nedrīkst lietot.
- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes un pirms tīrīšanas.

- Nekad nelietojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm (pārkaršanas risks). Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 15 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem.
- Aizsargājiet ierīci un piederumus no triecieniem, putekļiem, ķīmiskām vielām, krasām temperatūras izmaiņām, elektromagnētiskajiem laukiem un tuvumā esošiem karstuma avotiem (krāsnis, sildītāji).

BRĪDINĀJUMS

Remonts

- Nekad nemēģiniet labot ierīci saviem spēkiem!
- Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Neatbilstoši veikts remonts var būtiski apdraudēt lietotājus. Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirgotāju. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.

BRĪDINĀJUMS

Piezīmes par bateriju lietošanu

- Ja šķidrums no baterijas elementa nonāk uz ādas vai acis, nomazgājiet skartās vietas ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **Aizrīšanās risks!** Mazi bērni var norīt un aizrīties ar baterijām. Tāpēc baterijas glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā!
- Ja baterijai rodas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un atbrīvojiet no ierīces.
- Aizsargājiet baterijas no pārāk liela karstuma iedarbības.
- **Sprādziena risks!** Nemetiet baterijas ugunī!
- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai saspīest.

- Lai baterijas kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, vismaz 2 reizes gadā bateriju pilnībā uzlādējiet.
- Pirms uzlādes vienmēr izslēdziet ierīci.
- Pirms lietošanas baterijas ir pareizi jāuzlādē. Vienmēr ir jāievēro ražotāja norādījumi un šajā lietošanas instrukcijā sniegtās specifikācijas par pareizu uzlādi.

2. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpuse ir neskarta, un pārliecinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka dzīlo audu masāžas aparātam un tā piederumiem nav redzamu bojājumu.

- 1 dzīlo audu masāžas aparāts
- 5 piederumi
- 1 USB-C kabelis
- 1 lietošanas instrukcija

3. PAREDZĒTAIS MĒRĶIS

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet dzīlo audu masāžas aparātu tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem. Masāžas aparāts un tā piederumi nav medicīnas ierīces, bet gan masāžas procedūras ierīces. Dzīlo audu masāžas aparāts ir piemērots tikai personīgai lietošanai, nevis medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem. Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajam lietošanas mērķim un lietošanas instrukcijā norādītajā veidā. Jebkāda veida nepareiza lietošana var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā. Nelietojiet dzīlo audu masāžas ierīci, ja uz jums attiecas viens vai vairāki no turpmāk minētajiem brīdinājumiem un drošības norādījumiem. Ja neesat pārliecināts, vai dzīlo audu masāžas aparāts ir piemērots tieši jums, konsultējieties ar ārstu.

4. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	BĪSTAMI
Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.	
	BRĪDINĀJUMS
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.	
	UZMANĪBU
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.	
	PIEZĪME
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta sistēma vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.	
	Izlasiet instrukcijas
	Informācija par produktu Svarīga informācija
	CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.
	Ražotājs

	Nelietojiet dzīvo audu masāžas aparātu cilvēkiem ar implantētām elektriskajām ierīcēm (piemēram, elektrokardiostimulatoru).
	Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
 Pb Cd Hg	Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.
 RECYCLE	Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.
	Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajai Karalistei
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons
	Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEIA
	Līdzstrāvas strāvas savienojuma polaritāte
	Līdzstrāva Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu
	Importētāja simbols

5. IERĪCES APRAKSTS

5.1 Dziļo audu masāžas aparāts

Saistītās ilustrācijas ir 3. lappusē.

1 Intensitātes indikators

5 gaismas diodes, sākot no kreisās uz labo pusi

1 Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Darības laikā

Akumulatora uzlādes līmenis < 25 % = mirgo aktīvās LED

Uzlādes laikā:

LED mirgo zilā krāsā = akumulatora uzlādes LED iedegas zilā krāsā = akumulators ir pilnībā uzlādēts



Kats no pieciem indikatoriem atbilst 20 % uzlādes jaudas. Pašreizējais uzlādes līmenis mirgo zilā krāsā; jau uzlādētie līmeņi iedegas vienmērīgi zilā krāsā.

2 ON/OFF poga

3 USB-C kabeļa savienojums

4 Akumulatora nodalījuma vāks

5 Piederumu savienojums

6 Spiediena indikators

7 USB-C kabelis

5.2 Piederumi

8 Lāpstīņveida uzgalis

Vienmērīgi slīd gar muskuļiem.

9 Izliekts uzgalis

Vispiemērotākās ķermeņa zonām, kas ir dabiski noapaļotas (piemēram, rokām, apakšstilbiem vai augšstilbiem).

10 Gaisa spilvena uzgalis

Vislabāk piemērots jutīgām ķermeņa daļām (piemēram, kaklam).

11 Spirālveida uzgalis

Vispiemērotākais dziļo muskuļu audu apstrādei un mērķtiecīgai masāžai (piemēram, pēdām).

12 Plakanais uzgalis

Vislabāk piemērots lielu ķermeņa laukumu (piemēram, augšstilbu) apstrādei.


6. LIETOŠANA

6.1 Sākotnējā lietošana/akumulatora uzlāde

Masāžai vienmēr jābūt patīkamai. Procedūru sāciet ar zemāko intensitātes līmeni un pēc tam, ja nepieciešams, palieliniet to atbilstoši savām vajadzībām. Var rasties neliela hematoma - tas ir pozitīvs terapeitisks efekts, jo ierīces lietošana var selektīvi veicināt asins plūsmu. Izolētos gadījumos uz ādas var parādīties arī apsārtuma zonas. Ja rodas pārmērīgs ādas kairinājums, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Atkarībā no sasprindzinājuma pakāpes vēlamajai zonai (kaklam, pleciem, mugurai, rokām, sēžamvietai vai kājām) ir ieteicama aptuveni 10 minūšu ilga masāžas procedūra.

Pirms pirmās dziļās audu masāžas aparāta lietošanas vispirms uzlādējiet to vismaz 2 stundas. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet no ierīces visu iepakojuma materiālu.
2. Savienojiet pievienoto USB-C kabeli ar dziļo audu masāžas ierīci. USB-C kabeļa 3 savienojums atrodas ierīces sānos zem ieslēgšanas/izslēgšanas pogas.

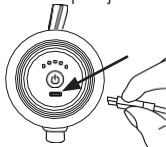

3. Savienojiet USB-C kabeli ar USB-C tīkla kontaktdakšu (nav iekļauta komplektācijā). Ievietojiet

tīkla kontakt dakšu piemērotā kontaktligzdā. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators **1** rāda pašreizējo baterijas uzlādes līmeni.

Akumulatora līmeņa indikators LED 1 mirgo zilā krāsā	= notiek uzlāde
--	-----------------


Visas akumulatora uzlādes līmeņa indikators LED 1 deg = uzlādēts zilā krāsā	akumulators ir uzlādēts
---	-------------------------

4. Tiklīdz visi akumulatora uzlādes līmeņa indikators **1** LED iedegas zilā krāsā, atvienojiet kontakt dakšu (nav iekļauta komplektā) no kontaktligzdas. Akumulators ir pilnībā uzlādēts. Pilnībā uzlādētas baterijas darbības ilgums ir aptuveni 2 stundas. Tiklīdz baterijas uzlādes indikators **1** sāk mirgot zilā krāsā, dziļo audu masāžas aparāts ir jāuzlādē, pretējā gadījumā tas automātiski izslēdzas.

6.2 Piederuma izvēle/ mainīšana

Pirms masāžas uzsākšanas izvēlieties atbilstošu piederumu. Lai mainītu piederumu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet esošo piederumu no dziļo audu masāžas ierīces, pavelkot to horizontāli.

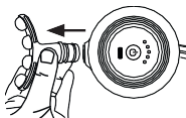

2. Stingri ievietojiet vēlamo piederumu dziļo audu masāžas ierīcē, līdz jūtat, ka tas stingri iespiežas savā vietā.

6.3 Ierīces ieslēgšana/ intensitātes līmeņa izvēle

i Dziļo audu masāžas aparātam ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Tas nozīmē, ka dziļās audu masāžas aparāts automātiski izslēdzas pēc aptuveni 10 minūšu lietošanas.

1. Nospiediet un turiet ON/OFF pogu  **2** sekundes. 5 LED gaismīņas uz intensitātes indikators **1** iedegas uz aptuveni 2 sekundēm. Turklāt sānu LED lentes aizpildās no apakšas uz augšu un pēc tam atkal nodziest, izņemot pirmo LED. Tā deg baltā krāsā. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.

2. Nospiediet ON/OFF pogu  **2**, lai ieslēgtu ierīci. Kreisā LED uz intensitātes indikators **1** iedegas.

Masāža sākas ar 1. intensitātes līmeni.

3. Lai pārslēgtos starp intensitātes līmeņiem, īsi nospiediet ON/OFF pogu  **2**. Intensitātes indikators **1** rāda pašreizējo intensitātes līmeni.

Intensitātes līmenis 1 (1800 apgr./min/30 Hz) →

Intensitātes līmenis 2 (2100 apgr./min/35 Hz) →

Intensitātes līmenis 3 (2400 apgr./min/40 Hz) →

Intensitātes līmenis 4 (2700 apgr./min/45 Hz) →

Intensitātes līmenis 5 (3000 apgr./min/50 Hz) →

Gaidīšanas režīms.

4. Ierīci var izslēgt jebkurā lietošanas brīdī, nospiežot un turot ON/OFF pogu  **2** (2 sekundes). Nospiežot ON/OFF pogu  **2** piektajā intensitātes līmenī, ierīce izslēdzas. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.




Ja ierīce lietošanas laikā apstājas, tas var būt saistīts ar pārmērīgu spiedienu. Lietojot dziļo audu masāžas aparātu, pārliecinieties, ka uz to netiek izdarīts pārāk liels spiediens.

6.4 Spiediena indikators

Sānu LED josla (spiediena indikators)

- 6 iedegas atbilstošā krāsā atkarībā no tā, cik spēcīgi piespiežat izvēlēto masāžas uzgali pie ādas.

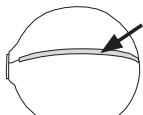

Spiediena indikators 6 un saistītie ieteikumi nav obligāti. Tā kā ķemena jutība ir ļoti atšķirīga, tiklīdz sajūtat sāpes, nekavējoties jāsamazina kontakta spiediens. Masāžai vienmēr jābūt patīkamai.

Viegls spiediens (piemērots nelielām un jutīgām muskuļu grupām)	=	LED josla baltā zonā
Spēcīgs spiediens (piemērots lielām muskuļu grupām)	=	LED josla ir zilā zonā
Pārmērīgs spiediens (var izraisīt sāpes lielākai daļai cilvēku lietošanas laikā un no tās jāizvairās)	=	LED josla sarkanā zonā, samaziniet spiedienu

Ieteikumi attiecas uz 8 /9 /10/ 12 piederumu. Masāža ar 11. piederumu šķiet daudz intensīvāka

tā formas dēļ, tāpēc to ieteicams lietot tikai tad, ja spiediena LED josla ir baltajā zonā.

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Pirms tīrīšanas katru reizi izslēdziet ierīci.
- Netīriet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Ierīci tīriet tikai ar nedaudz mitru drānu un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Lai tīrīšana būtu higiēniska, notīriet piederumus ar ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.
- Tīriet ierīci, izmantojot tikai norādītās metodes. Nekādos apstākļos ierīcē vai piederumos nedrīkst iekļūt šķidrumi.
- Lietojot masāžas eļļas (ieteicams tikai kopā ar piederumu 11/ 12) ieteicams pilnībā noņemt un notīrīt attiecīgo piederumu.
- Neizmantojiet ierīci vai piederumus, kamēr visas sastāvdaļas nav pilnīgi sausas.

Kopšana

Ja neplānojat lietot ierīci ilgāku laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vidē, nodrošinot, ka tā nav apkrauta ar papildu priekšmetiem.

8. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?

Problēma	Dziļo audu masāžas aparāts lietošanas laikā apstājas.
Risinājums	Lietojot dziļo audu masāžas aparātu, pārliecinieties, ka uz to neietek izdarīts pārāk liels spiediens. Ja spiediens būs pārāk liels, ierīce uz īsu brīdi apstāsies.

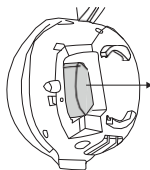


4. Pēc tam varat uzlikt korpusa apvalku atpakaļ uz ierīces un atlikt vietā akumulatora nodalījuma vāciņu.

9. UTILIZĀCIJA

Bateriju iznīcināšana

Izmetot ierīci, vispirms no tās jāizņem akumulators. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet akumulatora nodalījuma vāciņu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam par 90°. Akumulatora nodalījuma vāciņš tiek atbrīvots un to var noņemt.

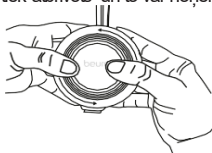

2. Pēc tam atbrīvojiet korpusa apvalku akumulatora nodalījuma vāciņa sānos.



3. Tad izvelciet akumulatoru no ierīces un atvienojiet akumulatoru no ierīces, atvienojot spraudņu savienojumu.

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, atreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāiznīcina.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svini

Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu



Bojātas vai izlietotas baterijas ir jāpārstrādā saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK un tās grozījumiem. Nododiet baterijas un/vai ierīci atbilstošās atkritumu savākšanas vietās.

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos. at the end of its service life.

Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Dispose of the

Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.



10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ekspluatācijas, pieslēdzot pie elektrotilkla lēija	5 V  1 A
Izmēri	apt. 9.1 x 7.1 x 9.6 cm (bez piederumiem un bez siksnas)
Svars	Aptuveni 405 g (bez piederumiem, bez USB-C kabeļa)
Baterija: Jauda Nominālais spriegums Tipa apzīmējums	1250 mAh 7.4 V LiĶja jonu

11. GARANTĪJA / APKOPE

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki poik 6,
Tallina 12918