

beurer

HK 49 Cosy



LV Daudzfunkcionāls sildītājs
Lietošanas instrukcija2

Saturs

1. Komplektācija	3	4.4 Temperatūras iestatīšana	6
1.1 Apraksts	3	4.5 Automātiskā izslēgšana	7
2. Svarīgi norādījumi		4.6 Izslēgšana	7
Saglabāšana turpmākai lietošanai	3	5. Tīrīšana un apkope	7
3. Paredzētais pielietojums	5	6. Uzglabāšana	8
4. Darbība	5	7. Utilizācija	8
4.1 Drošība	5	8. Kā rīkoties, ja ir radušās problēmas?	8
4.2 Sākotnējā lietošana	6	9. Tehniskie dati	8
4.3 Ieslēgšana	6	10. Garantija / apkope	8

Simbolu skaidrojums

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

	Izlasiet instrukcijas!		Mazgāt temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Mazgāt ļoti saudzīgi.
	Neizmantojiet adatas vai saspaudes!		Nebaliniet
			Nežāvējiet veļas žāvētājā
	Nelietojiet salocītu vai sakrunkotu!		Negludināt
	Nelietot ļoti maziem bērniem (0-3 gadi).		Netīriet ķīmiskajā tīrītavā
	Atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā!		Ražotājs
	Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.		Produkti pilnībā atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām.
	Ierīcei ir aizsargājoša izolācija, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei.		Utilizācija jāveic saskaņā ar EK direktīvu – EEIA (Elektrisko un elektrisko iekārtu atkritumi).

	KEMA-KEUR simbols apliecina elektropreces drošību un atbilstību standartiem.
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme
	Šai ierīcei izmantotie tekstilizstrādājumi atbilst Oeko Tex Standard 100 stingrajām ekoloģiskajām prasībām, ko apstiprinājis Hohenšteina Pētniecības institūts.
	BRĪDINĀJUMS: Brīdinājums par traumu risku vai veselības apdraudējumu
	UZMANĪBU: Drošības informācija par iespējamiem ierīces/piederumu bojājumiem.
	PIEZĪME: Svarīga informācija.


1. Komplektācija

Pārbaudiet, vai kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliecinieties, ka ierīce ir piegādāta pilnā komplektācijā. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls ir noņemts. Ja jums ir šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas dienesta adresi.

- 1 Sildītāja paliktnis
- 1 Vadības ierīce
- 1 Lietošanas instrukcija

1.1 Apraksts

- 1. Strāvas kontaktdakša
- 2. Strāvas vads
- 3. Vadības ierīce
- 4. Izgaismoti temperatūras iestatījumi
- 5. Ieslēgšanas un temperatūras iestatījumu slīdnis
- 6. Ligzdas savienojums

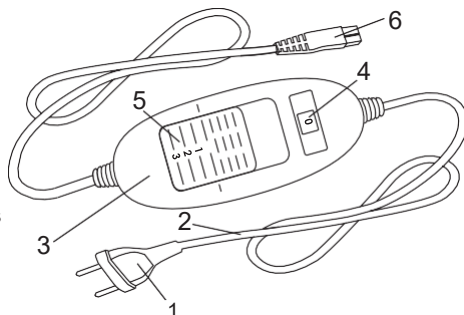

2. Svarīgi norādījumi

Saglabājiēt turpmākai lietošanai!

BRĪDINĀJUMS

- Tālāk sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai materiālus zaudējumus (elektriskās strāvas trieciens, ādas apdegumi, ugunsgrēks). Tālāk norādītā informācija par drošību un iespējamiem apdraudējumiem ir paredzēta ne tikai jūsu un citu cilvēku veselības aizsardzībai, bet arī pašas ierīces aizsardzībai. Šī iemesla dēļ pievērsiet uzmanību drošības norādēm un, nododot ierīci citai personai, nododiet arī šos drošības norādījumus.

- Šo sildītāja paliktni nedrīkst lietot personas, kuras neuztver karstumu, vai citas neaizsargātas personas, kas var nespēt reaģēt uz pārkaršanu (piemēram, diabēta slimnieki, cilvēki ar ādas izmaiņām slimības dēļ vai rētaiņiem audiem aplikācijas zonā, personas pēc pretsāpju līdzekļu vai alkohola lietošanas).
- Šo paliktni nedrīkst lietot ļoti mazi bērni (0-3 gadi), jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Sildītāja paliktni var lietot bērni, kas vecāki par 3 gadiem un jaunāki par 8 gadiem, ja viņi tiek uzraudzīti. Šādā gadījumā vadības ierīcei vienmēr jābūt iestatītai uz minimālo temperatūru.
- Šo sildītāja paliktni drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot sildītāja paliktni, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar sildītāja paliktni.
- Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Šis sildītāja paliktnis nav paredzēts lietošanai slimnīcās.
- Šis sildītāja paliktni ir paredzēts tikai privātai lietošanai mājās, nevis komerciāliem mērķiem.
- Neizmantojiet adatas vai saspraudes!
- Nelietojiet, ja tas ir salocīts vai sakrokots.
- Nelietojiet, ja tas ir mitrs.
- Šo sildītāja paliktni var izmantot tikai kopā ar etiķetē norādīto vadības ierīci.
- Šis sildītāja paliktnis ir jāpievieno tikai tādām tīkla spriegumam, kas ir norādīts etiķetē.
- Šī sildītāja izstarotie elektriskie un magnētiskie lauki var mijiedarboties ar elektrokardiostimulatora darbību. Tomēr tie joprojām ir krietni zem robežvērtībām - elektriskā lauka stiprums: maks. 5000 V/m, magnētiskā lauka stiprums: maks. 80 A/m, magnētiskās plūsmas blīvums: maks. 0,1 militesla. Pirms sildītāja lietošanas konsultējieties ar ārstu un elektrokardiostimulatora ražotāju.
- Nevelciet, nesavērpjiet un nesalokiet kabeļus.
- Ja kabelis un sildītāja vadības ierīce nav pareizi novietota, pastāv sapīšanās, nožņaugšanas, paklupšanas vai aizķeršanās risks. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka kabelis un visi vadi ir droši novietoti.

- Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai sildītāja paliktnis nav nodilis vai bojāts. Ja kādas no šādām pazīmēm ir acīmredzamas, ja sildītāja paliktnis ir nepareizi lietots vai, ja tas vairs neuzkarst, tas jāpārbauda ražotājam pirms atkārtotas ieslēgšanas.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt sildītāja paliktni (tostarp piederumus) saviem spēkiem, jo pēc tam vairs nav iespējams garantēt ierīces nevainojamu funkcionalitāti. Ja šie noteikumi netiks ievēroti, garantija zaudēs spēku.
- Ja šī sildītāja paliktņa tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tas ir jāizmet. Ja to nevar noņemt, utilizējiet sildītāja paliktni.
- Kad šis sildītāja paliktnis ir ieslēgts:
 - Nelieciet uz tā nekādus asus priekšmetus
 - Nelieciet uz tā nekādus siltuma avotus, piemēram, termoforus, sildītāja paliktņus vai tamlīdzīgus priekšmetus
- Sildītāja paliktņa izmantošanas laikā vadības ierīces elektroniskie komponenti uzsilst. Šī iemesla dēļ vadības ierīci lietošanas laikā nekādā gadījumā nedrīkst pārklāt vai novietot uz sildītāja paliktņa.
- Ir svarīgi ievērot informāciju, kas norādīta šādās nodaļās - Eksploatacija, Tīrīšana un apkope, Uzglabāšana.
- Ja jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu ierīču lietošanu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu.

3. Paredzētais lietojums



UZMANĪBU

Šis sildītāja paliktnis ir paredzēts tikai, lai sasildītu cilvēka ķermeni.

Šis sildītāja paliktnis ir piemērots universālai lietošanai. Piemēram, uz vēdera, muguras, locītavām vai kakla. Sildītāja paliktni var sarullēt lietošanai kakla zonā.

4. Lietošana

4.1 Drošība



UZMANĪBU

- Sildītāja paliktnis ir aprīkots ar DROŠĪBAS SISTĒMU. Šī sensoru tehnoloģija nodrošina aizsardzību pret visas sildītāja paliktņa virsmas pārkaršanu ar automātisku izslēgšanu kļūmes gadījumā. Ja DROŠĪBAS SISTĒMA ir izslēgusi sildītāja paliktni, temperatūras iestatījumi pēc ieslēgšanas vairs netiek izgaismoti.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka drošības apsvērumu dēļ pēc automātiskas izslēgšanās kļūmes gadījumā sildītāju vairs nevar izmantot, un tas jānosūta uz norādīto servisa adresi.
- Bojāto sildītāja paliktni aizliegts savienot ar citu tāda paša tipa vadības ierīci. Šādā gadījumā iedarbosies vadības ierīces drošības sistēma, kas pilnībā izslēgs ierīci.



4.2 Sākotnējā lietošana



UZMANĪBU


Pārliecinieties, ka sildītāja paliktnis lietošanas laikā netiek salocīts vai sakrunkots.

- Vispirms pievienojiet vadības ierīci sildītāja paliktņim, izmantojot spraudņa savienojumu.
- Pēc tam iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Novietojiet sildītāja paliktni uz vēdera vai muguras. Pēc tam novelciet garo, elastīgo gumijas siksnu ap ķermeni un nostipriniet siltuma paliktni, aizverot līplentes stiprinājumu.

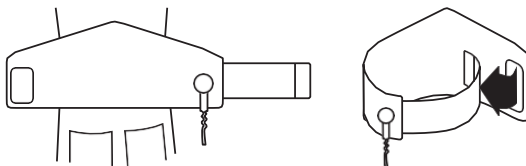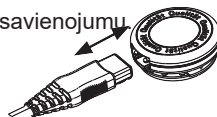

Izmantot kā kakla sildītāja paliktni

- Vispirms samontējiet spraudņa savienojumu.
- Pēc tam novietojiet sildītāja paliktni sev priekšā uz galda tā, lai spraudņa savienotājs atrastos augšējā kreisajā stūrī un sildītāja paliktņa šaurākā puse būtu vērsta pret jūsu ķermeni.
- Sākot ar šaurāko pusi, cieši satiniet sildītāja paliktni visā tā platumā.
- Pēc tam apļieciet pilnībā sarullēto siltuma paliktni ap kaklu un nostipriniet līplentes stiprinājumus.
- Izvērīto gumijas lenci var pabīdīt zem sildītāja tā priekšpusē.

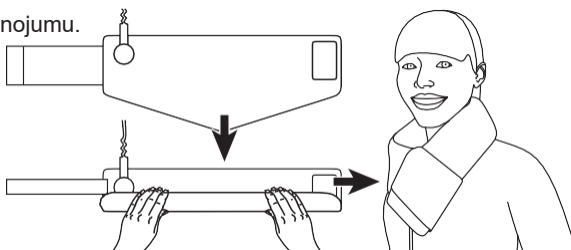

UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka sildītāja paliktnis ir cieši un pilnībā sarullēts. Pretējā gadījumā drošības sistēma var neatgriezeniski izslēgt sildītāja paliktni.

4.3 Ieslēgšana

Lai ieslēgtu sildītāja paliktni, iestatiet slīdni ieslēgšanas slīdni un temperatūras iestatījumus uz 1, 2 vai 3. Temperatūras iestatījumi tiek izgaismoti pēc ierīces ieslēgšanas.

4.4 Temperatūras iestatīšana

0. Līmenis: IZSLĒGTS

1. Līmenis: minimālais siltums 2.

līmenis: vidējs siltums

3. Līmenis: maksimālais siltums



PIEZĪME:

Ātrākais veids, kā panākt sildītāja paliktņa uzsildīšanu, ir sākotnēji iestatīt augstāko temperatūras iestatījumu.



PIEZĪME:

Šiem sildītāja paliktņiem ir ātrās uzsildīšanas funkcija, kas ļauj paliktņiem ātrāk uzsilt pirmajās 10 minūtēs.

BRĪDINĀJUMS

Ja sildītāja paliktnis tiek izmantots vairākas stundas, ieteicams izvēlēties zemāko temperatūras iestatījumu, lai izvairītos no sildītās ķermeņa daļas pārkaršanas, kas var izraisīt ādas apdegumus.

4.5 Automātiska izslēgšanās

Šis sildītāja paliktnis ir aprīkots ar automātiskās izslēgšanas funkciju. Tas izslēdz siltuma padevi apm. 90 minūtes pēc sildītāja paliktna ieslēgšanas. Pēc tam temperatūras iestatījumu displejs sāk mirgot. Lai sildītāja paliktni varētu atkal ieslēgt, ieslēgšanas un temperatūras iestatījumu slīdnis (5) vispirms jāiestata uz "0" (IZSLĒGTS). Pēc aptuveni 5 sekundēm to ir iespējams atkal ieslēgt.



4.6 Izslēgšana

Lai izslēgtu sildītāja paliktni, iestatiet ieslēgšanas un temperatūras iestatījumu slīdni uz "0" (IZSLĒGTS). Temperatūras iestatījumi pēc tam vairs netiek izgaismoti.

PIEZĪME:

Ja sildītāja paliktnis netiek izmantots, pabīdīet sānu slīdni uz "0" (IZSLĒGTS) un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no sildītāja, atvienojot spraudņa savienojumu.

5. Tīrīšana un kopšana

BRĪDINĀJUMS

Pirms tīrīšanas vienmēr vispirms izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no sildītāja, atvienojot spraudņa savienojumu. Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.

UZMANĪBU

Vadības ierīce nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, jo tas var izraisīt bojājumus.

- Vadības ierīces tīrīšanai izmantojiet sausu drānu, kas nepūkojas. Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelielus traipus no sildītāja var notīrīt ar mitru drānu un, ja nepieciešams, ar nelielu daudzumu šķīduma, kas paredzēts saudzīgai veļas mazgāšanai.

UZMANĪBU

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sildītāja paliktni nedrīkst ķīmiski tīrīt, izgriezt, žāvēt veļas žāvētājā, saspīest vai gludināt. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.

- Šis sildītāja paliktnis ir mazgājams veļas mašīnā.
- Iestatiet veļas mazgājamo mašīnu uz īpaši saudzīgu mazgāšanas ciklu 30 °C (vilnas cikls). Izmantojiet saudzīgu veļas mazgāšanas līdzekli un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

UZMANĪBU

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bieža sildītāja paliktna mazgāšana negatīvi ietekmē produktu. Tāpēc sildītāja paliktnis ir jāmazgā veļas mazgājamā mašīnā ne vairāk kā 10 reizes tā kalpošanas laikā.

- Uzreiz pēc mazgāšanas izstiepiet sildītāja paliktni tā sākotnējos izmēros, kamēr tas vēl ir mitrs, un izklājiet to plakaniski uz drēbju žāvētāja.



UZMANĪBU

- Nelietojiet knaģus vai līdzīgus priekšmetus, lai piestiprinātu sildītāja paliktni pie drēbju žāvētāja. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.
- Nepievienojiet vadības ierīci atpakaļ sildītāja paliktnim, kamēr spraudņa un sildītāja paliktna savienojums nav pilnībā izžuvis. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.



BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nedarbiniet sildītāja paliktni, lai to izžāvētu! Šādā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.

6. Uzglabāšana

Ja neplānojat izmantot sildītāju ilgāku laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Šim nolūkam atvienojiet vadības ierīci no sildītāja, atvienojot ligzdas savienojumu.



UZMANĪBU

- Lūdzu, ļaujiet sildītāja paliktnim atdzist pirms uzglabāšanas. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.
- Lai izvairītos no locījuma līniju veidošanās uz sildītāja paliktna, nenovietojiet uz tā nekādus priekšmetus, kamēr tas tiek uzglabāts.

7. Utilizācija

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes punktā. Utilizējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - WEEE (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu.



8. Kā rīkoties problēmu gadījumā?

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Temperatūras iestatījumi netiek izgaismoti, lai gan - vadības ierīce ir pareizi pievienota sildītāja paliktnim, - strāvas kontaktdakša ir pieslēgta aktīvai kontaktligzdai, - slīdnis ir iestatīts uz 1, 2 vai 3	Drošības sistēma ir neatgriezeniski izslēgusi sildītāja paliktni.	Nosūtiet sildītāja paliktni un vadības ierīci apkopei.

9. Tehniskie dati

Skatiet parametru uzlīmi uz sildītāja paliktna.

10. Garantija / apkope

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6, 12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee