

beurer

HK 49 Cosy



LT Elektrinė šildyklė
Naudojimo instrukcija

CE



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir laikykitės saugos nurodymų. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Užtikrinkite, kad naudojimo instrukcija būtų prieinama kitiems naudotojams. Perduodami prietaisą kitiems naudotojams kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

TURINYS

1. Pakuotės turinys.....	3	4.5 Automatinis išsijungimas	6
1.1 Prietaiso aprašymas.....	3	4.6 Prietaiso išjungimas.....	7
2. Svarbios pastabos.....	4	5. Valymas ir priežiūra	7
3. Naudojimas pagal paskirtį.....	5	6. Laikymas	8
4. Naudojimas.....	5	7. Utilizacija.....	8
4.1 Sauga.....	5	8. Ką daryti iškilus problemoms?	8
4.2 Pasirengimas darbui.....	5	9. Techniniai duomenys.....	8
4.3 Įjungimas	6	10. Garantija/ aptarnavimas.....	8
4.4 Temperatūros režimo nustatymas.....	6		

Simbolių paaiškinimas

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ar tipinėje prietaiso (bei jo priedų) lentelėje naudojami šie simboliai:

	Perskaitykite naudojimo instrukcijas		Maksimali skalbimo temperatūra 30 °C. Labai švelni programa
	Nesmeikite adatų!		Nebalinti
	Nenaudokite sulankstyto ar neišskleisto gaminio!		Nelyginti
	Nenaudoti vaikams (0 - 3 metų)		Nedžiovinti džiovyklėje
	Gamintojas		Draudžiama valyti cheminiu būdu.
	Pašalinkite pakuotės medžiagas ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių		Atitikties įvertinimo žymėjimas Jungtinėje Karalystėje

	Gaminys atitinka visus ES ir nacionalinių reglamentų reikalavimus		Gaminiai atitinka visus Europos ekonominės sąjungos (EAEU) suderintų techninių reglamentų reikalavimus
	Prietaisas turi dvigubą apsauginę izoliaciją, todėl atitinka 2 apsaugos klasę.		Nebenaudojamą prietaisą išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva).
	KEMA-KEUR simbolis patvirtina, kad įrenginys yra saugus ir atitinka elektros prietaisams keliamus reikalavimus		
	Šiame prietaise naudojama tekstilė atitinka griežtus „Oeko Tex Standard 100“ reikalavimus, kuriuos patvirtino Hohenšteino tyrimų institutas		
	ĮSPĖJIMAS! Įspėja apie pavojų susižeisti ar pakenkti sveikatai		
	DĖMESIO! Perspėja apie galimą prietaiso ir (arba) priedų pažeidimą		
	Pastaba Svarbi informacija		


1. Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar nebuvo pažeista prietaiso pakuotė, ar nieko netrūksta. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad nėra matomų prietaiso ar jo priedų pažeidimų, pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Jei turite kokių nors abejonių, nesinaudokite prietaisu ir susisiekite su pardavėju arba nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

- 1 Elektrinė šildyklė
- 1 Valdymo pultas
- 1 Naudojimo instrukcija

1.1 Prietaiso aprašymas

- 1. Kištukas
- 2. Kabelis
- 3. Valdymo pultas
- 4. Šviečiantis temperatūros indikatorius
- 5. ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų slankiklis
- 6. Kištukinė jungtis

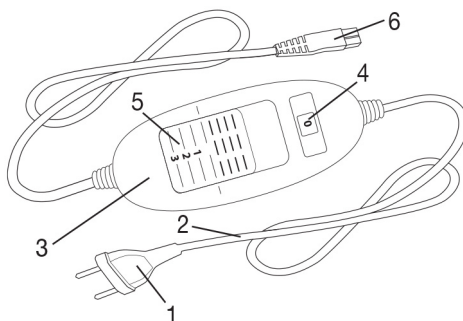

2. Svarbios pastabos

Išsaugokite vėlesniam naudojimui!



DĖMESIO

- Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti materialinę žalą arba traumą (elektros smūgis, odos nudegimai, gaisras ir pan.). Toliau pateikti saugos nurodymai ir įspėjimai apie pavojus skirti ne tik jūsų ar trečiųjų asmenų sveikatai, bet ir gaminio apsaugai, todėl labai svarbu, kad laikytumėtės šių įspėjimų. Perduodami prietaisą kitam naudotojui, perduokite ir šią naudojimo instrukciją.
- Šios elektrinės šildyklės negali naudoti asmenys, kurių jautrumas karščiui yra sumažėjęs, arba kiti pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą (pvz., diabetikai, žmonės su odos pakitimais, turintys randų prietaiso naudojimo srityje, pavartoję nuskausminamųjų vaistų ar alkoholio).
- Šios elektrinės šildyklės negalima naudoti mažiems vaikams (0-3 metų amžiaus), nes jie negali reaguoti į perkaitimą.
- Elektrinę šildyklę gali naudoti vyresni nei 3 metų ir jaunesni nei 8 metų vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų. Jungikliu visada nustatykite mažiausią temperatūrą
- Šią elektrinę šildyklę gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fizine, jutimo ar psichine negalia, jei jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti kaip saugiai naudotis paklode ir įspėti apie galimus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams valyti prietaisą ar atlikti priežiūros darbus, nebent jie yra prižiūrimi.
- Ši elektrinė šildyklė nėra skirta naudoti ligoninėse.
- Elektrinė šildyklė skirta naudoti namuose/ asmeniniam naudojimui, draudžiama naudoti prietaisą komerciniais tikslais.
- Į šildyklę nesmeikite adatų!
- Nenaudokite šildyklės, jei ji yra sulankstyta ar susukta!
- Nenaudokite elektrinės šildyklės, jei ji yra šlapia!
- Šią elektrinę šildyklę galima naudoti tik su etiketėje nurodytu valdymo pultu.
- Šią elektrinę šildyklę galima jungti į elektros tinklą, jei maitinimo tinklo įtampa atitinka šildyklės etiketėje nurodytą įtampą.
- Elektrinės šildyklės skleidžiami elektriniai ir magnetiniai laukai tam tikromis aplinkybėmis gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą. Ypatingos priežasties nerimauti nėra, ši spinduliuotė yra gerokai mažesnė už didžiausias leistinas vertes: elektrinio lauko įtampa: maks. 5000 V/m, magnetinio lauko įtampa: maks. 80 A/m, magnetinė indukcija: ne daugiau kaip 0,1 mTl. Todėl prieš naudodami prietaisą pasikonsultuokite su gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.
- Netraukite, nesusukite ir nelankstykite elektros kabelio.
- Neteisingai nutiesus maitinimo kabelį ir valdymo pultą, kyla pavojus užlipti ant kabelio, įspainioti į jį ir uždusti arba užkliūti už jo ir suklipti. Naudotojas turi užtikrinti, kad visi kabeliai būtų nutiesti saugiai.
- Elektrinę šildyklę pastoviai reikia tikrinti, ar nėra nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Jei patebėjote jau minėtus požymius arba, jei prietaisas buvo naudojamas netinkamai, prieš vėl naudojant prietaisą, turite jį patikrinti klientų aptarnavimo centre.
- Jokiu būdu neardykite prietaiso (įskaitant priedus), nebandykite jo taisyti savarankiškai, nes kitaip negarantuojamas nepriekaištingas prietaiso veikimas. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, galite prarasti teisę į garantinį aptarnavimą.
- Jei elektrinės šildyklės maitinimo kabelis pažeistas, reikia pakeisti kabelį. Jei kabelio negalima nuimti ir pakeisti, reikia išmesti prietaisą.
- Nelaikykite valdymo pulto ir kabelių tiesioginiuose saulės spinduliuose.

- Ant įjungtos šildyklės nedėkite:
 - jokių aštrių daiktų;
 - šilumos šaltinių, pavyzdžiui, karšto vandens butelių, elektrinių pagalvėlių ar panašių daiktų.
- Naudojant šildyklę, valdymo pulte esantys elektroniniai komponentai įkaista. Todėl neuždenkite valdymo pulto arba nedėkite jo ant įjungto prietaiso.
- Būtina laikytis šiuose skyriuose pateiktų reikalavimų: „Naudojimas“, „Valymas ir priežiūra“, „Laikymas“.
- Jei turite su mūsų prietaiso naudojimu susijusių klausimų, prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

3. Naudojimo paskirtis



ĮSPĖJIMAS

Ši elektrinė šildyklė skirta tik šildyti žmogaus kūną.

Ši šildyklė yra universali. Ją galima naudoti keliais būdais, pavyzdžiui, ant pilvo, nugaros, sąnarių ir kaklo. Norint naudoti kaklo srityje, šildyklę galima susukti.

4. Naudojimas

4.1. Sauga



ĮSPĖJIMAS

- Elektrinėje šildyklėje įrengta SAUGOS SISTEMA. Elektroniniai prietaiso jutikliai neleidžia šildyklei perkaisti, o aptikus bet kokią veikimo klaidą, automatiškai ją išjungia.
- Atkreipkite dėmesį, kad norėdami vėl naudoti šildyklę, turite jį patikrinti klientų aptarnavimo centre nurodytu adresu.
- Sugedusios elektrinės šildyklės nenaudokite su kitu to paties tipo valdymo pultu. Valdymo pulto apsaugos sistema visiškai užblokuos prietaisą.




4.2 Pasirengimas naudojimui



DĖMESIO


Stebėkite, kad elektrinė šildyklė naudojimo metu nenuslystų ir nesusidarytų raukšlės.

- Pirmiausia prijunkite valdymo pultą prie elektrinės šildyklės, valdymo pulto kabelio kištuką įkišdami į šildyklės jungtį.
- Tada įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą.
- Po to uždėkite šildyklę ant pilvo arba nugaros. Tada apvyniokite aplink liemenį ilgą elastingą gumos juostą ir pritvirtinkite šildyklę lipnia juosta.

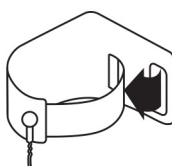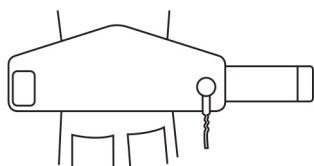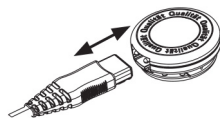

Naudojimas kaip kaklo šildyklė

- Pirmiausia prijunkite kištuką prie lizdo.
- Padėkite elektrinę šildyklę ant stalo priešais save taip, kad kištuko jungtis būtų viršutiniame kairiajame kampe, o smailusis galas būtų atsuktas į kūną.
- Tada susukite elektrinę šildyklę per visą plotį, pradėdami nuo smailiosios pusės.
- Visiškai susuktą elektrinę šildyklę apvyniokite aplink kaklą ir užfiksuokite lipniąją juostelę.
- Išsikišusią gumos juostelę galima paslėpti po elektrine šildykle.

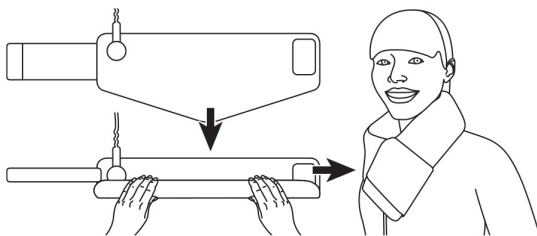

DĖMESIO

Išitikinkite, ar šildyklė susukta tvirtai ir per visą plotį. Priešingu atveju saugos sistema gali išjungti elektrinę šildyklę.

4.3 Įjungimas

Norėdami įjungti elektrinę šildyklę, ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros režimų nustatymo slankiklį nustatykite į padėtį 1, 2 arba 3.

Įjungus šildyklę, pradeda šviesti temperatūros režimų indikatorius.

4.4 Temperatūros režimo nustatymas

- | | |
|------------|--------------------------|
| 0 režimas: | išjungta |
| 1 režimas: | minimalus šildymo lygis |
| 2 režimas: | vidutinis šildymo lygis |
| 3 režimas: | maksimalus šildymo lygis |



PASTABA

Jūsų elektrinė šildyklė pradės šildyti greičiau, jei naudojimo pradžioje nustatysite maksimalų šildymo lygį.



PASTABA

Šioje elektrinėje šildyklėje įdiegta greito šildymo funkcija ir prietaisas įšyla per 10 minučių.



DĖMESIO

Jei elektrinė šildyklė bus naudojama kelias valandas, rekomenduojame nustatyti minimalų šildymo lygį, kad būtų išvengta kūno perkaitimo ir nudegimų.

4.5 Automatinis išsijungimas

Šioje elektrinėje šildyklėje yra įdiegta automatinio išsijungimo funkcija. Šilumos tiekimas nutrūksta maždaug po 90 minučių veikimo. Tuomet mirksi temperatūros indikatorius. Norėdami vėl įjungti šildyklę, pirmiausia turite nustatyti slankiklį (5) į padėtį „0“ (išjungta). Praėjus maždaug 5 sekundėms, prietaisą vėl galima įjungti.



4.6 Išjungimas

Norėdami išjungti elektrinę šildyklę, nustatykite [JUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų slankiklį į padėtį „0“ (išjungta). Temperatūros indikatorius išsijungia.



PASTABA

Jei elektrinė šildyklė bus nenaudojama, nustatykite [JUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymo slankiklį į padėtį „0“ (išjungta) ir ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo. Tada atjunkite valdymo pultą kabelį nuo šildyklės, ištraukdami kabelio kištuką iš šildyklės jungties.

5. Valymas ir priežiūra



ĮSPĖJIMAS

Prieš valydami prietaisą visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tada atjunkite valdymo pultą nuo elektrinės šildyklės. Kitu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.



DĖMESIO

Venkite valdymo pultelio tiesioginio sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais! Kitaip galite sugadinti valdymo pultelį.

- Valdymo pultą valykite sausa šluoste be pūkelių. Nenaudokite cheminių valiklių arba abrazyvinių medžiagų.
- Nedidelės dėmės ant elektrinės šildyklės galima pašalinti drėgna šluoste arba, jei reikia, su nedideliu kiekiu švelnaus skysto ploviklio.



DĖMESIO

Atkreipkite dėmesį, kad elektrinės šildyklės negalima valyti cheminėmis priemonėmis, skalbti, gręžti rankomis, džiovinti elektrinėje džiovyklėje, taisyti ar lyginti.

- Šią elektrinę šildyklę galima skalbti skalbimo mašinoje.
- Skalbkite pasirinkę tausojančią programą ir 30 °C temperatūrą (vilnai skirta programa). Naudokite švelnią skalbimo priemonę, laikykitės gamintojo nurodymų.



DĖMESIO

Atkreipkite dėmesį, kad per dažnas šildyklės skalbimas gali turėti nepageidaujamą poveikį. Dėl šios priežasties elektrinę šildyklę (per visą jos naudojimo laiką) skalbimo mašinoje galima skalbti ne daugiau kaip 10 kartų.

- Iškart po skalbimo, išskeiskite dar drėgną elektrinę šildyklę, suteikite jai pradinį dydį bei formą, ir palikite džiūti ant džiovyklės stovo.



DĖMESIO

- Nenaudokite drabužių segtukų ar panašių įtaisų pritvirtinti šildyklę prie džiovinimo stovo. Priešingu atveju prietaisas gali būti sugadintas.
- Valdymo pultą prie šildyklės prijunkite tik tada, kai kištukinė jungtis ir elektrinė šildyklė visiškai išdžius. Kitaip prietaisas gali būti sugadintas.



ĮSPĖJIMAS

Niekada nebandykite džiovinti šlapios šildyklės ją įjungdami! Kyla elektros smūgio pavojus.

6. Laikymas

Jei elektrinė šildyklė ilgą laiką bus nenaudojama, rekomenduojame ją laikyti originalioje pakuotėje. Atjunkite valdymo pultelį nuo šildyklės, ištraukdami kištuką iš šildyklės jungties.



DĖMESIO

- Pirmiausia leiskite prietaisui atvėsti. Priešingu atveju elektrinė šildyklė gali būti sugadinta.
- Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų, kad pernelyg stipriai jo nedeformuotumėte.

7. Utilizacija

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o būtina perduoti į specializuotus surinkimo punktus. Prietaisas turi būti utilizuotas pagal ES Elektros ir elektronikos įrangos atliekų direktyvą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.



8. Trikčių šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Indikatorius nešviečia, nors: – valdymo pultelis teisingai prijungtas prie prietaiso; – kabelio kištukas įjungtas į tinkamai įrengtą maitinimo lizdą; – įjungimo/ išjungimo ir temperatūros nustatymų slankiklis yra nustatytas į 1, 2 arba 3 režimą.	Apsaugos sistema išsijungė elektrinę šildyklę.	Elektrinę šildyklę ir valdymo pultelį patikrinkite klientų aptarnavimo centre.

9. Techniniai duomenys

Žr. elektrinės šildyklės gamyklinę etiketę.

10. Garantija/ aptarnavimas

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantijos sąlygas rasite pridedamame garantijos lapelyje.

Galimos klaidos ir pakeitimai.

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki pōik 6, 12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee



"Beurer UK" Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golbornas, Jungtinė Karalystė



„Beurer GmbH“ – Söflinger g. 218 - 89077 Ulmas Vokietija), www.beurer.com,
www.beurer-healthguide.com, www.beurer-gesundheitsratgeber.com

