


beurer

SC 30 Green Planet



LT Naudojimo instrukcija




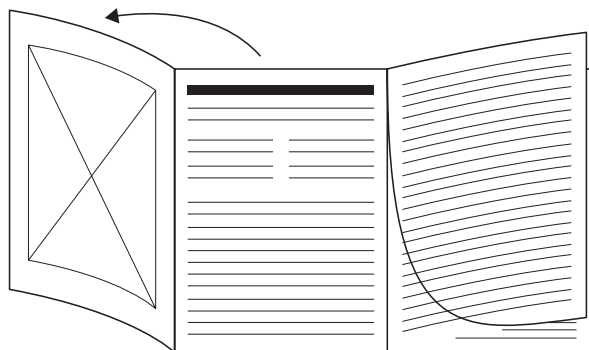


LT Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukcijas, atverskite 3 puslapį.




A

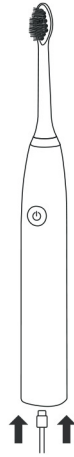


B

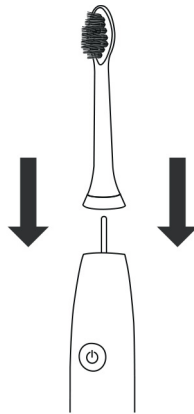


C

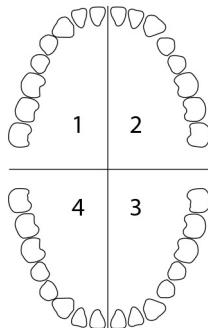

D

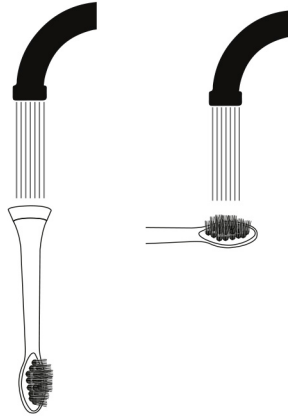

E

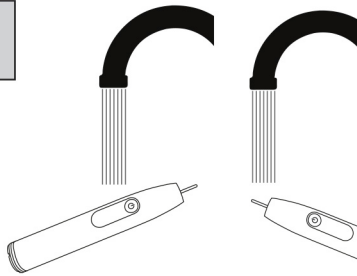



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją kitiems naudotojams, laikykite kitiems naudotojams prieinamoje vietoje, vadovaukitės instrukcijoje pateikta informacija.

Turinys

1. Įspėjimai ir saugaus naudojimo taisyklės ..6	6.2 Naudojimo pradžia.....10
2. Rinkinio komplektacija7	6.3 Kelioninis prietaiso užraktas.....10
3. Ženkilai ir simboliai8	7. Valymas ir priežiūra10
4. Paskirtis.....9	8. Priedai ir atsarginės dalys.....11
5. Prietaiso apžvalga.....9	9. Utilizavimas.....11
6. Naudojimas.....9	10. Techniniai duomenys.....12
6.1 Paruošimas naudojimui.....9	11. Garantija / aptarnavimas12

1. ĮSPĖJIMAI IR SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS



ĮSPĖJIMAS

- Laikykite įkroviklį ir įkrovimo laidą toliau nuo drėgmės.
- Nelaikykite prietaiso ar įkrovimo laido vietose, kur šie gali įkristi į vandenį (pvz. šalia vonios).
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų bei asmenys, turintys fizinį, jutiminių ar psichinių sutrikimų, arba neturintys reikiamų žinių ir patirties, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi, supažindinti su galimais pavojais ir išmokyti saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams be suaugusiųjų priežiūros valyti ar atlikti prietaiso priežiūrą.
- Pastebėjus, kad prietaisas yra pažeistas arba tinkamai neveikia, jo nenaudokite. Kreipkitės į servisą.
- Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, įkrovimo laidą išmeskite.
- Naudokite tik kartu su prietaisu pateiktą USB-C įkrovimo laidą.
- Niekada nenaudokite prietaiso su maitinimo adapteriu šalia vonios, praustuvo, dušo ar kitų indų su vandeniu – kyla elektros smūgio pavojus.
- Įsitikinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų naudojamą. Prietaiso

įkrovimui naudokite tik 5V/1A maitinimo adapterį (nepridedamas komplekte).

- Nemėginkite prietaiso ardyti ar taisyti patys. Nesilaikant šių nurodymų, garantija nebus taikoma.

Saugaus baterijos naudojimo taisyklės



ĮSPĖJIMAS

- Jei baterija yra pažeista arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Jei sąlytis įvyko, paveiktą vietą gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Nemeskite baterijos į ugnį, ji gali sprogti.
- Baterijai pratekėjus, baterijos skystį valykite sausa šluoste tik mūvint apsaugines pirštines.
- Neatidarykite, nemodifikuokite ir kitais būdais nežalokite baterijos.



DĖMESIO

- Saugokite bateriją nuo pernelyg didelės kaitros ar aukštos temperatūros.
- Prietaisui įkrauti naudokite tik tuos įkroviklius, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje.
- Prieš naudojant prietaisą, baterija turi būti tinkamai įkrauta. Visada laikykitės gamintojo nurodymų ir instrukcijose pateiktų reikalavimų dėl tinkamo baterijos įkrovimo.
- Prieš naudodami prietaisą pirmąjį kartą, įsitikinkite, kad jis yra pilnai įkrautas (žr. skyrių „Paruošimas naudojimui“).
- Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, pilnai įkraukite prietaisą bent 2 kartus per metus.

2. RINKINIO KOMPLEKTACIJA

Įsigiję prietaisą patikrinkite, ar išorinė pakuotė nėra pažeista bei įsitikinkite, kad rinkinio komplektacija yra pilna ir nieko netrūksta. Prieš naudojimą patikrinkite ar prietaisas ir jo priedai neturi matomų pažeidimų bei pilnai pašalinkite visas pakuotės medžiagas. Jei kyla abejonų dėl prietaiso saugumo, jo nenaudokite, kreipkitės į pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.

- 1 elektrinis dantų šepetėlis
- 2 šepetėlio galvutės
- 1 USB-C įkrovimo laidas
- Naudojimo instrukcija

3. ŽENKLAI IR SIMBOLIAI

Ant prietaiso, šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ir įrenginio techninių duomenų plokštelėje naudojami šie simboliai:

	PAVOJUS Įspėja apie gresiantį pavojų gyvybei arba sveikatai.
	ĮSPĖJIMAS Įspėja apie gresiantį pavojų gyvybei arba sveikatai.
	DĖMESIO Įspėja apie gresiantį pavojų patirti nesunkų ar nežymų sužalojimą.
PASTABA	Įspėja apie pavojingą situaciją. Jei jos nebus išvengta, gali būti pažeistas prietaisas arba šalia jo esantys daiktai.
	Perskaitykite instrukcijas
	Gaminio informacija Pastaba dėl svarbios informacijos
	Gaminiai atitinka EAES Techninių reglamentų reikalavimus.
	Perdirbtų medžiagų sertifikavimo standartas
	Pakuotė pagaminta iš perdirbtų medžiagų
	Gamintojas
	Apsauga nuo laikino panardinimo. Prietaisą galima panardinti į 1 metro gylį iki 30 minučių.
	Nuolatinė srovė
	Šalinimas pagal ES direktyvos dėl elektros elektroninės įrangos atliekų (EE[A]) reikalavimus
	Neišmeskite baterijų su kenksmingomis medžiagomis kartu su buitinėmis atliekomis
	Nuo gaminiui pašalinkite pakavimo medžiagas ir jas utilizuokite pagal vietos taisykles

	Ženklas, skirtas pakuotės medžiagai identifikuoti. A = medžiagos kodas, B = medžiagos numeris: 1-7 = plastikas, 20-22 = popierius ir kartonas
	CE ženklavimas Šis gaminys atitinka Europos ir nacionalinių taisyklių taikomus reikalavimus.
	Atitiktis įvertinimo ženklavimas Jungtinėje Karalystėje
	Importuotojo simbolis
	Naudoti tik patalpoje
	Nuolatinės srovės maitinimo jungties poliškumas
	III apsaugos klasės įrenginys

4. PASKIRTIS

Šis prietaisas skirtas tik žmonių dantų valymui, nenaudokite elektrinio dantų šepetėlio gyvūnų dantims valyti. Prietaisas netinkamas naudoti vaikams iki 8 metų. Elektrinį dantų šepetėlį galima naudoti tik pagal paskirtį. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą dėl neatsargaus ar netinkamo prietaiso naudojimo.

5. PRIETAISO APŽVALGA

Susiję paveikslėliai pateikti 3 puslapyje.

- 1** Dantų šepetėlio galvutė
- 2** ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtukas
- 3** LED ekranas
 - 4 režimai: „Clean“ (valymas), „Whiten“ (balinimas), „Sensitive“ (jautriems dantims), „Gum Care“ (dantenų priežiūra)
 - Baterijos įkrovos lygis
- 4** USB-C įkrovimo laidas

6. NAUDOJIMAS

6.1 Pasiruošimas naudojimui

Įkrovimas

Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite elektrinį dantų šepetėlį. Prietaiso įkrovimas:

1. Prijunkite USB-C įkrovimo laidą prie elektrinio dantų šepetėlio. Įkiškite USB-C įkrovimo laidą į USB jungtį arba tinkamą maitinimo adapterį ir įjunkite jį į elektros lizdą.
2. Įkrovimo metu LED pulsuoja raudonai. Kai tik elektrinis dantų šepetėlis visiškai įkraunamas, LED pradeda šviesti žaliai.

Šepetėlio galvutės uždėjimas B

Uždėkite šepetėlio galvutę 1 ant prietaiso pagrindo, spustelėkite, kol pasigirs spragtelėjimas. Įsitikinkite, kad šepetėlio 1 šereliai nukreipti ta pačia kryptimi kaip ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtukas 2.



Indikaciniai šereliai

Indikaciniai šereliai laikui bėgant praranda spalvą priklausomai nuo naudojimo intensyvumo. Šerelių spalvai nublukus, reikėtų pakeisti šepetėlio galvutę 1.

Rekomenduojama keisti šepetėlio galvutę 1 kas 3 mėnesius. Jei šereliai yra nusidėvėję ar išsišakoję, juos galima pakeisti ir anksčiau.

6.2 Naudojimo pradžia

1. Norėdami įjungti elektrinį dantų šepetėlį, spustelėkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtuką 2. Šepetėlis kas 30 sekundžių trumpai sustoja, kad padėtų užtikrinti, jog kiekvienas burnos ketvirtis būtų valomas tolygiai. Elektrinis šepetėlis turi automatinį laikmatį: po 2 minučių jis du kartus suvirpa, o po 6 minučių prietaisas automatiškai išsijungia C.
2. Pageidaujamą režimą pasirinkite spustelėdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtuką 2. Pasirinktą valymo režimą parodo LED indikacija. Galimi šie režimai:

Daily Clean	Kasdieniam valymui
Whiten	Dantų balinimui
Sensitive	Švelniam valymui
Gum care	Dantenų priežiūrai

3. Norėdami nutraukti valymą anksčiau laiko, spustelėkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtuką 2.

6.3 Kelioninis prietaiso užraktas

Kelioninis užraktas apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso įsijungimo (pvz. kuprinėje ar lagamine).

1. Norėdami aktyvuoti užraktą, laikykite nuspaudę ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtuką 2 5 sekundes. Įsijungus užraktui, LED 5 kartus sumirksi žaliai.
2. Kai prietaisas yra užrakintas, trumpai spustelėjus ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtuką 2 LED švies žaliai.
3. Norėdami išjungti užraktą, dar kartą nuspauskite ir palaikykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/REŽIMO mygtuką 2 5 sekundes. Įsijungimo metu LED nuolat šviečia žaliai. LED užgęsta, kai tik kelioninis užraktas išjungiamas. Įrenginys įsijungia.

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prietaisą ir šepetėlio galvutę valykite po kiekvieno naudojimo.

1. Nuimkite dantų šepetėlio galvutę 1.
2. Nuplaukite šepetėlio galvutę 1 po tekančiu vandeniu, išskalaukite šepetėlio šerelius 1 D.
3. Prietaisą galima plauti po tekančiu vandeniu, tačiau draudžiama panardinti į vandenį bei mirkyti, nes patekus skysčiui prietaisas gali būti pažeistas. E

4. Įkroviklį  reguliariai nuvalykite drėgna šluoste ir švelniu muilo tirpalu. Nenaudokite šveičiamųjų valymo skysčių. Laikykite įkroviklį  bei USB laidą su maitinimo adapteriu toliau nuo vandens ir drėgmės.

8. PRIEDAI IR ATSARGINĖS DALYS

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite svetainėje www.beurer.com arba kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Priedus ir atsargines dalis taip pat galima įsigyti pas mažmeninę prekybą vykančius pardavėjus

Pavadinimas	Prekės užsakymo numeris
„Classic Clean“ šepetėlių galvutės, 4 vnt. pakuotė	105.21
„Premium Whiten“ šepetėlių galvutės, 4 vnt. pakuotė	105.31
„Premium Plaque Eraser“ šepetėlių galvutės, 4 vnt. pakuotė	105.22
„Premium Protection Plus“ šepetėlių galvutės, 4 vnt. pakuotė	105.23

9. UTILIZAVIMAS

Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų, nemeskite jo į buitiniams atliekoms skirtą konteinerį. Prietaisą utilizuokite savo šalyje esančiame tinkamame atliekų surinkimo ar perdirbimo punkte. Laikykitės vietinių teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. Prietaisą utilizuokite vadovaudamiesi ES direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Jei kyla klausimų dėl prietaiso utilizavimo, kreipkitės į vietos institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą. Vietos institucijos taip pat gali suteikti informaciją apie senų prietaisų surinkimo punktų vietas.



Panaudotas, visiškai išsikrovusias baterijas, išmeskite į specialiai pažymėtus konteinerius, atiduokite į specializuotus surinkimo punktus arba elektros prietaisų surinkėjams.

Atkeipkite dėmesį į baterijos ženklinimą, įspėjantį apie kenksmingas medžiagas:

Pb = baterijoje yra švino,

Cd = baterijoje yra kadmio,

Hg = baterijoje yra gyvsidabrio.



Baterijos išėmimas

1. Kad išimtumėte prietaiso bateriją, dantų šepetėlį atidarykite naudodamiesi atsuktuvu. Įkiškite atsuktuvą į USB-C jungtį.
2. Lengvai spausdami pasukite prietaisą prieš laikrodžio rodyklę, tuomet galėsite nuimti prietaiso galinį dangtelį.
3. Atlenkite dantų šepetėlio apatinę dalį į šoną.
4. Ištraukite vidinį šepetėlio korpusą.
5. Išimkite bateriją iš vidinio korpuso.
6. Saugiai utilizuokite bateriją specialiose surinkimo dėžėse, perdirbimo punktuose arba pas elektronikos prekeivius.

10. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	SC 30
Matmenys	Prietaisas: 183 x 29 mm
Svoris	Prietaisas: 119 g (dantų šepetėlis + 2 šepetėlio galvutės)
Baterija: Talpa Nominali įtampa Tipas	600 mAh 3,7 V Ličio jonų baterija
Maitinimo šaltinis	5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5.0 W

Galimi techniniai pakeitimai

11. GARANTIJA/APTARNAVIMAS

Išsamią informaciją apie garantiją ir garantines sąlygas rasite pridedamame garantiniame lapelyje.



Beurer GmbH • Söflinger g. 218 • 89077 Ulmas, Vokietija • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Importuotojas JK:
BEURER UK Ltd., Suite 16,
Stonecross Place, Yew Tree Way
WA32SH Golborne, United Kingdom



SC30_2024-11-13_01_IM1_BEU