

beurer

EE Vererõhumõõtja
Kasutusjuhend

BC 40
(650.61)



CE 0483

Komplekti kuuluvad:

Vererõhumõõtja ja mansett
2 x 1,5 V LR03 AAA-tüüpi patareid
Hoiukarp
Kasutusjuhend

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärk esindab kvaliteetseid põhjalikult katsetatud tooteid, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž, ilutooted, beebikaubad ja ventilatsioon. Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad.

Lugupidamisega
teie Beureri meeskond

1. Seadme tundmaõppimine

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist). Randmele paigaldatavat vererõhumõõtjat kasutatakse täiskasvanud inimeste arteriaalse vererõhu mõõtmiseks ja jälgimiseks.

Selle abil saate kiiresti ja kergesti mõõta oma vererõhku ning vaadata viimast mõõtmistulemust. Südame rütmihäirete tuvastamisel edastab seade vastava hoiatuse.

Salvestatud väärtused klassifitseeritakse ja neid hinnatakse graafiliselt. Hoidke need juhised alles ja kättesaadaval ka teistele seadme kasutajatele.

2. Olulised märkused



Märgid ja sümbolid

Kasutusjuhendis, pakendil ning seadme ja tarvikute andmeplaatidel kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Tähelepanu!
	Märkus. Tähtis teave
	Järgige kasutusjuhendit
	BF-tüüpi seade

	Alalisvool
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv)
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
	Tootja
	Hoiukoha ja transportimise õhutemperatuur ja niiskus
	Töökeskonna õhutemperatuur ja niiskus
IP22	Kaitseklass vee ja tolmu kahjuliku sissetungimise eest. Kaitstud 12,5 mm ja suuremate võõrkehade eest ja kuni 15° vertikaalselt langevate veepiiskade eest
	Seerianumber

	CE-märgis tõendab, et toode vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ olulistele nõuetele
	Sertifitseerimise sümbol toodetele, mis eksporditakse Vene Föderatsiooni ja SRÜ riikidesse



Märkused seadme kasutamise kohta

- Võrreldavate tulemuste saamiseks mõõtke oma vererõhku alati samal kellaajal.
- Enne vererõhu mõõtmist on soovitatav viis minutit rahulikult istuda.
- Kui soovite ühe inimese vererõhku mitu korda järjest mõõta, jätke iga mõõtmise vahele viieminutine paus.
- Pärast söömist, joomist, suitsetamist või füüsilist pingutust oodake vähemalt 30 minutit, enne kui vererõhku mõõdate.
- Kui mõõtmistulemus tundub ebatõenäoline, korrake mõõtmist.
- Ise oma vererõhu mõõtmine on ainult informatiivse eesmärgiga ega asenda arstlikku läbivaatust! Soovi korral võite saadud tulemusi arutada oma arstiga, aga mitte mingil juhul ei tohi te mõõtmistulemuste põhjal teha ise otsuseid oma ravi kulgemise kohta (nt vajalike ravimite või dooside kohta).
- Vererõhumõõtja kasutamisel väljaspool kodu või liikuvus sõidukis (nt autos, kiirabiautos või helikopteris) või füüsilise tegevuse ajal võib mõjutada mõõtmistäpsust ja põhjustada valesid mõõtmistulemusi.
- Vererõhumõõtjat ei tohi kasutada vastsündinutel ega inimestel, kellel esineb krampe. Rasedad peaksid enne vererõhumõõtja kasutamist arstiga nõu pidama.
- Juhul kui käsivarre vereringe on kroonilise või akuutse südame-veresoonkonna haiguse tõttu piiratud, võib randmelt saadud mõõtmistulemuse täpsus olla piiratud. Sellisel juhul tuleks kasutada käsivarrel kasutamiseks mõeldud vererõhumõõtjat.
- Südame-veresoonkonna haiguste korral võivad mõõtmistulemused olla ebatäpsed. Ebatäpsed tulemused võidakse saada ka väga madala vererõhu, diabeedi, vereringehäirete ja südame rütmihäirete ning külmavärinate korral.
- Vererõhumõõtjat ei tohi kasutada koos kõrgsagedusliku kirurgiaseadmega.
- Kasutage vererõhumõõtjat ainult inimestel, kelle randme ümbermõõt on seadme kasutamiseks sobiv.
- Pidage meeles, et manseti täispumpamisel võivad kasutatava käe funktsioonid häiritud olla.

- Vererõhu mõõtmisel ei tohi vereringe liiga pikaks ajaks seiskuda. Kui seadme töös esineb häireid, võtke mansett käsivarrelt ära.
- Ärge jätke mansetti pidevaks mõõtmiseks randme ümber. Vereringe seiskumine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge pange mansetti käsivarrele, mille arterid või veenid läbivad ravi.
- Mansetti ei tohi kasutada inimestel, kellele on tehtud masektoomia.
- Ärge asetage mansetti haavadele, sest see võib põhjustada vigastusi.
- See vererõhumõõtleja töötab ainult patareidega.
- Patareide säästmiseks lülitub seade automaatselt välja, kui kolme minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajutata.
- Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.



Juhised seadme hoiustamiseks ja hooldustöödeks

- Vererõhumõõtleja koosneb elektroonilistest täppiskomponentidest. Mõõtmistulemuse täpsus ja seadme tööiga sõltub seadme ettevaatlikust käsitlemisest:
 - Kaitske seadet mahakukkumise, niiskuse, mustuse, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.
 - Ärge laske seadmel maha kukkuda.
 - Ärge kasutage seadet tugevate elektromagnetväljade (nt mobiiltelefonide, raadiosaatjate) läheduses.
 - Kasutage ainult seadmega kaasasolevat mansetti või originaal-tagavaramansetti. Vastasel korral ei ole mõõtmistulemused täpsed.
- Ärge vajutage ühtegi nuppu enne, kui mansett on nõuetekohaselt paigaldatud.
- Eemaldage patareid, kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada.



Märkused patareide kasutamise kohta

- Kui patarei vedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

-  **Lämbumisoht!** Väikelapsed võivad patareid suhu panna ja alla neelata. Patareid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Järgige polaarsusmärgistusi (+) ja (-).
- Patarei lekkimise korral puhastage patareisahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
-  **Plahvatusoht!** Ärge visake patareisid tulle!
- Patareisid ei tohi laadida ega lühisesse ajada.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke patareid patareisahtlist välja.
- Kasutage ainult ettenähtud või nendega võrdväärseid patareisid.
- Vahetage alati kõik patareid korraga.
- Ärge kasutage akusid.
- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid.

Juhised seadme remontimiseks ja kasutuselt kõrvaldamiseks

- Patareid ei kuulu olmejäätmete hulka. Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti või kauplusesse.
- Seadet ei tohi koost lahti võtta. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Ärge remontige ega reguleerige seadet ise. Sel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam tagatud.

- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures. Enne kaebuse esitamist veenduge, et patareid ei ole tühjaks saanud, ning vahetage need vajadusel välja.
 - Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka.
Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemis-keskusesse.
- Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta

- Seade sobib kasutamiseks kõikides keskkondades, mis on toodud nendes juhistes, sealhulgas kodune keskkond.
- Seadme kasutamine võib olla piiratud elektromagnetiliste väljadega. Selle tulemusena võib seadme töös esineda tõrkeid või ekraanile ilmuvaid veateateid.
- Ärge kasutage seadet vahetult teiste seadmete kõrval või peal, sest see võib põhjustada rikkeid seadme töös. Kui seadet on siiski vaja eespool toodud viisil kasutada, jälgige nii seadet kui ka teisi seadmeid tähelepanelikult ja veenduge, et need töötavad nõuetekohaselt.

- Muude tarvikute kui siintoodud või tootja soovitatud kasutamine võib suurendada elektromagnetilist saastet või vähendada seadme elektromagnetilist immuunsust. Selle tulemusena võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Eespool toodud teabe eiramisel ei pruugi seade nõuetekohaselt töötada.

3. Seadme kirjeldus

1. Ekraan
2. Patareishtli kate
3. Mansett
4. START/STOP nupp ①
5. Mälunupp M



Ekraanil kuvatav teave:

1. Süstoolne vererõhk
2. Diastoolne vererõhk
3. Riskinäidik
4. Kellaaeg ja kuupäev
5. Arvutatud pulsi väärtus
6. Südame rütmihäirete

sümbol 


7. Pulsi sümbol 
8. Patarei vahetamise

sümbol 

9 Mälukoha number / mälukoha ekraani

keskmine väärtus (A) keskmine väärtus
(A), hommik (AM), õhtu (PM)

10. Ohu väljalaskmine (nool)

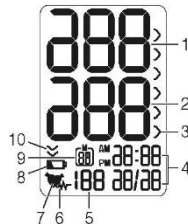

4. Ettevalmistamine mõõtmiseks

Patareide paigaldamine

- Eemaldage seadme paremal küljel asuva patareishtli kate.
- Paigaldage 2 x 1,5 V mikro (leelistüüpi LR 03) patareid. Jälgige, et sisestate patareid õigesti. Ärge kasutage akusid.
- Pange patareishtli kate korralikult peale tagasi.

Kui kuvatakse patarei vahetamise sümbol , siis ei ole mõõtmine enam võimalik ja patareid tuleb välja vahetada.



Akud ja jäätmekäitlus

- Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus neist ohutult vabaneda.
- Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:
Pb = pliid sisaldav patarei,
Cd = kaadmiumit sisaldav patarei,
Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.



Tunnivormingu, kuupäeva ja kellaaja määramine

See menüü võimaldab teil järjest seadistada järgmisi funktsioone:

Tunnivorming → **Kuupäev** → **Kellaeg**

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine on väga oluline. Vastasel juhul ei ole võimalik mõõtmistulemusi koos õige kuupäeva ja kellaajaga salvestada ning neid hiljem vaadata.

 Nuppu **M** all hoides läheb seadistamine kiiremini.

Seadistusrežiimi sisenemiseks sisestage patareid uuesti või vajutage ja hoidke väljalülitatud seadmel 5 sekundit all nuppu **START/STOP** .

Tunnivorming

- Valige nupuga **M** soovitud tunnivorming ja kinnitage see nupuga **START/STOP** .

24 h

12 h

Kuupäev

Ekraanil hakkab vilkuma aastaarv.

- Valige nupuga **M** soovitud aasta ja kinnitage see nupuga **START/STOP** .

20 14

Ekraanil hakkab vilkuma kuu.

- Valige nupuga **M** soovitud kuu ja kinnitage see nupuga **START/STOP** .

1

Ekraanil hakkab vilkuma kuupäev.

- Valige nupuga **M** soovitud päev ja kinnitage see nupuga **START/STOP**.

11

-  Kui on seadistatud tummivorming 12 tundi, kuvatakse päev / kuu.

Kellaaeg

Ekraanil hakkab vilkuma tunninäit.

- Valige nupuga **M** soovitud kuupäev ja kinnitage see nupuga **START/STOP** ①.



Ekraanil hakkab vilkuma minutinäit.

- Valige nupuga **M** soovitud minutinäit ja kinnitage see nupuga **START/STOP** ①.




Kui kõik andmed on seadistatud, lülitub seade automaatselt välja.

5. Vererõhu mõõtmine

Veenduge, et seade on enne mõõtmise alustamist toatemperatuuril. Vererõhku saab mõõta vasakult või paremalt randmelt.

Manseti paigaldamine

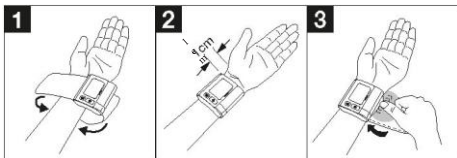

Paljastage ranne. Vererõhu mõõtmise ajal ei tohi kanda kitsaid rõivaid ega muid verevarustuse kiirust mõjutavaid esemeid. Paigaldage mansett randme siseküljele.

- Kinnitage mansett takjakinnitusega nii, et vererõhumõõtja ülemine äär jääks umbes 1 cm jagu teie põidla nukist madalamale.
- Mansett tuleb asetada tihedalt ümber käe, aga nii, et see ei pigistaks.

Parema ja vasaku käsivarre vererõhk võib olla erinev, mistõttu võivad tulemuseks olla erinevad mõõtmistulemused. Mõõtke vererõhku alati samalt käsivarrelt. Kui kahe käsivarre mõõtmistulemused on väga erinevad, pidage nõu arstiga, kes oskab soovitada, kummalt käsivarrelt vererõhku mõõta.

Oluline teave! Seadet tohib kasutada ainult originaalmansetiga.

Õige asend

- Enne vererõhu mõõtmist on soovitatav viis minutit rahulikult istuda. Vastasel korral võivad mõõtmistulemused olla ebatäpsed.
- Te võite rõhku mõõta kas istudes või lamades. Istuge mugavalt, toetudes käsivarte ja seljaga millegi vastu. Ärge hoidke jalgu risti. Jalatallad peavad olema



maapinnal. Käsivars tuleb toetada millegi peale ja seda peab saama liigutada. Mansett peab olema südamega ühel tasemel. Vastasel juhul võivad tekkida märkimisväärsed kõrvalekalded. Laske käsivars ja peopesa lõdvaks.

- Õigete tulemuste saamise huvides on oluline püsida mõõtmise ajal paigal ja mitte rääkida.
- Käsi ja ranne peavad olema lõõgastunud asendis. Võite ka kää lõdvalt rusikasse panna. Hoidke kätt ja ranget kogu mõõtmise aja samas asendis.

Vererõhu mõõtmine

- Lülitage vererõhumõõtja sisse, vajutades nupule ①.
- Kõik ekraanid hakkavad korraldselt helendama.
- Vererõhu mõõtmine algab automaatselt kolme sekundi pärast. Mõõtmine toimub manseti täispuhutamise ajal.
- Pulsi tuvastamisel hakkab vilkuma pulsisümbol ♥.
- Ekraanil kuvatakse süstoolne ja diastoolne vererõhk ning pulsisagedus.

❗ Mõõtmise saab nuppu ① vajutades igal ajal katkestada.

- Kui korrektne mõõtmine ei ole võimalik, kuvatakse ekraanile _EE.
- Lugege selle kasutusjuhendi veateateid ja tõrkeotsingut kirjeldavat peatükki ja korraldage mõõtmist.

- Mõõtmistulemused salvestatakse automaatselt.

6. Tulemuste hindamine

Südame rütmihäired:

See vererõhumõõtja suudab mõõtmise ajal tuvastada võimalikud südame rütmihäired ning annab nende

esinemisest märku sümboliga ♥_W.

See on märk võimalikest rütmihäiretest. Rütmihäireteks nimetatakse seisundit, mille puhul patsiendil on tekkinud südame tööd reguleeriva bioelektrilise süsteemi kahjustus. Sümptomite (vahelejäädud või enneaegsed südamelöögid, väga aeglane või väga kiire pulss) põhjus võivad muuhulgas olla nt südamehaigused, kõrge vanus, füüsiline eelsoodumus, liigne stimulantide kasutamine, stress või magamatus. Rütmihäireid saab kindlaks teha ainult arstliku läbivaatuse teel.

Kui pärast mõõtmist kuvatakse ekraanil sümbol ♥_W, tuleb mõõtmist korrata. Pidage meeles, et kahe mõõtmiskorra vahel peab viis minutit puhkama ning mõõtmise ajal ei tohiks rääkida. Kui sümbol ♥_W kuvatakse korduvalt, pidage nõu arstiga. Iseseisev ravi alustamine mõõtmistulemuste alusel võib olla ohtlik. Järgige alati vererõhumõõtja juhiseid.

Riskinäidik

Mõõtmistulemusi saab klassifitseerida ja hinnata vastavalt alljärgnevale tabelile.

Need standardväärtused on siiski vaid üldine suunis ja vererõhk võib erinevatel inimestel, erinevates vanuserühmades jne erineda.

Täpseid soovitusi saab anda ainult arst, keda peaksite regulaarselt külastama. Temalt saate teada oma normaalse vererõhu väärtused ja piiri, millest üle mõõtmistulemus klassifitseeritakse ohtlikuks.

Ekraanil kuvatav klassifikatsioon ja skaala teavitavad kasutajat mõõdetud vererõhu väärtusest. Kui süstoolse ja diastoolse vererõhu tulemused kuuluvad erinevatesse kategooriatesse (nt süstoolne rõhk on vahemikus kõrge-normaalne ja diastoolne rõhk normaalseks peetavas vahemikus), kuvab seade alati kõrgema vahemiku (antud juhul vahemiku kõrge-normaalne').

Mõõdetud vererõhu väärtuse kategooria	Süstoolne (mmHg)	Diastoolne (mmHg)	Tegevus
Tase 3: väga kõrge vererõhk	≥ 180	≥ 110	Pöörduge arsti poole
Tase 2: kõrge vererõhk	160 – 179	100 – 109	Pöörduge arsti poole
Seadistus 1: kerge hüpertensioon	140 – 159	90 – 99	Külastage regulaarselt arsti
Kõrge-normaalne	130 – 139	85 – 89	Külastage regulaarselt arsti

Mõõdetud vererõhu väärtuse kategooria	Süstoolne (mmHg)	Diastoolne (mmHg)	Tegevus
Tavapärane	120 – 129	80 – 84	Mõõtke vererõhku ise
Optimaalne	<120	<80	Mõõtke vererõhku ise

Allikas: WHO, 1999 (Maailma Tervishoiuorganisatsioon)

7. Tulemuste salvestamine, vanemate tulemuste vaatamine ja kustutamine


Kõigi edukate mõõtmiste tulemused salvestatakse koos mõõtmiskuupäeva ja –kellaajaga. Kui mõõtmistulemusi on rohkem kui 60, siis vanemad tulemused kustutatakse.

- Mõõtmise vaatamiseks vajutage nuppu **M**.

Ekraanil kuvatakse viimane mõõtmistulemus.

Keskliste väärtuste kuvamine

- Vajutage nuppu **M**.
Ekraanil hakkab vilkuma **A**.
Kuvatakse kõigi salvestatud mõõtmistulemuste keskmine väärtus.

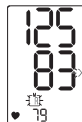

- Vajutage nuppu **M**.

Ekraanil hakkab vilkuma **PM**.

Kuvatakse viimase 7 päeva hommikuste mõõtmistulemuste keskmine näit (hommik: 5:00 kuni 9:00).



- Vajutage nuppu **M**.

Ekraanil hakkab vilkuma **PM**.

Kuvatakse viimase seitsme päeva öhtuste mõõtmistulemuste keskmine näit (öhtu: 18.00 – 20.00).



Individuaalsete mõõtmistulemuste kuvamine

- Nupu **M** vajutamisel kuvatakse viimane individuaalne mõõtmistulemus.
- Nupu **M** uuesti vajutamisel saate vaadata individuaalseid mõõtmistulemusi.
- Seadme uuesti välja lülitamiseks vajutage nuppu **START/ STOP** **1**.



- ① Menüüst saab igal ajal väljuda, vajutades nuppu **START/STOP** **1**.

Mõõtmistulemuste kustutamine

Individuaalsete mõõtmistulemuste kustutamine

- Looge juurdepääs selles kasutajamälus olevatele mõõtmistulemustele.
- Vajutage nupp **M** ligikaudu viieks sekundiks alla. Mõõtmistulemus kustutatakse.

- Ekraan hakkab vilkuma ning seejärel kuvatakse tühi ekraan, millel on tühi kasutajaraam. Täiendavate väärtuste kustutamiseks vajutage nuppu **M** või vajutage nuppu **START/STOP** **1**, et seade välja lülitada.

Kõikide mõõtmistulemuste kustutamine

- Kõigi salvestatud mõõtmistulemuste keskmise väärtuse hindamiseks vajutage kaks korda nuppu **M**.
- Vajutage nupp **M** ligikaudu viieks sekundiks alla. Kõik mõõtmistulemused kustutatakse.
- Ekraan hakkab vilkuma ning seejärel kuvatakse tühi ekraan, millel on tühi kasutajaraam. Täiendavate väärtuste kustutamiseks vajutage nuppu **M** või vajutage nuppu **START/STOP** **1**, et seade välja lülitada.

8. Veatsing / tõrkeotsing

Vea tekkimise korral kuvatakse ekraanile veateade **EE**. Veateade võidakse kuvada juhul, kui:

- te liigutate või räägite mõõtmise ajal (ekraanile ilmub **EE 1**),
- mansett on liiga tugevasti või liiga lõdvalt ümber käe või mansett on kahjustunud (ekraanile ilmub **EE 2**),
- rõhk on pumbatud kõrgemaks kui 290 mmHg (ekraanile ilmub **EE B**)
- patareid on peaaegu tühjad (**L0** ja **100**).

Sellisel juhul korrake mõõtmist. Ärge liigutage ega rääkige. Vajadusel võtke seadme patareid korraks välja ja pange need uuesti sisse või vahetage patareid välja.

9. Seadme ja manseti puhastamine ja hoiustamine

- Puhastage seadet ja mansetti hoolikalt veidi niiske lapiga.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Ärge pange seadet ega mansetti vette, sest vesi võib seadmesse või mansetti pääsedes selle rikkuda.
- Ärge hoidke seadme ega manseti peal raskeid esemeid. Võtke patareid seadmest välja.

10. Tehnilised andmed

Mudeli number BC 40

Mõõtmisviis Ostsillomeetriline, mitteinvasiivne vererõhumõõtja vererõhu mõõtmiseks õlavarrelt.

Mõõtmis-
vahemik Manseti rõhk 0-290 mmHg, süstoolne rõhk 50-250 mmHg, diastoolne rõhk 40--180 mmHg, pulss 40-180 lööki minutis

Ekraani täpsus Süstoolne rõhk ± 3 mmHg, diastoolne rõhk ± 3 mmHg, pulss

Mõõtmis-
hälve Maksimaalne lubatud kõrvalekalle standardist vastavalt kliinilistele katsetele: süstoolne rõhk 8 mmHg / diastoolne rõhk 8 mmHg

Mälu 60 mälu kohta

Mõõtmed P 76 mm x L 70 mm x K 23 mm

Kaal Umbes 105 g (ilma patareideta, mansetiga)

Manseti
mõõtmed 12,5-21,5 cm

Võimalikud
hoiutingimu
sed -10 °C kuni + 40 °C, $\leq 85\%$ suhteline niiskus (mittekondenseeruv)

Hoiukoha	- 5 °C kuni + 50 °C, <85% suhteline niiskus,
tingimused	800-1060 hPa ümbritseva keskkonna rõhk

Toiteallikas	2 x 1,5 V — — AAA-patareid
--------------	----------------------------

Patarei tööiga	Ligikaudu 300 mõõtmiskorda sõltuvalt vererõhust ja manseti täispumpamissurve
----------------	--

Klassifikatsioon	Sisemine toide, pidev toide, seadme osa tüüp BF, IP22, mitte AP või APG
------------------	---

Seerianumber asub seadmel või patareisahtlis..
Seadme tehnilisi näitajaid võidakse
etteteatamiseta muuta.

- Seade vastab Euroopa standardile EN 60601-2 (kooskõlas standarditega CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 ja IEC 61000-4-8) ja selle suhtes kohaldatakse spetsiaalseid ettevaatusabinõusid seoses elektromagnetilise ühilduvusega. Palun pidage meeles, et kaasaskantavad ja mobiilsed kõrgsageduslikud kommunikatsioonivahendid võivad seadme tööd häirida.
- Seade vastab ELi meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ, Saksamaa meditsiinitoodete seadusele ja Euroopa standarditele EN 1060-1

(Mitteinvasiivsed vererõhumõõtljad. Osa 1: üldnõuded) ja EN 1060-3 (Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 3: Lisanõuded vererõhu mõõtmiseks ettenähtud elektromehaanilistele süsteemidele) ja IEC 80601-2-30 (Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-30: Erinõuded automaatsete mitteinvasiivsete vererõhumõõtljate ohutusele ja olulistele toimimisinäitajatele).

- Selle vererõhumõõtlja täpsust on hoolikalt kontrollitud ja see on välja töötatud eesmärgiga pikemaajaliseks kasutamiseks. Seadme kasutamisel ärilisel eesmärgil tuleb seadme mõõtmistäpsust asjakohaste vahendite abil regulaarselt kontrollida. Täpsed juhised seadme mõõtmistäpsuse kontrollimiseks saate klienditeenindusest.

11. Garantii / teenindus

Garantiinõude korral pöörduge kohaliku edasimüüja poole või esindusse, mille leiате rahvusvaheliste teeninduste nimekirjast. Seadme tagastamisel lisage selle ostu tõendav dokument ja lühike aruanne defektist.

Garantiitingimused:

1. BEURERI toodete garantiaeg on alates ostukuupäevast 5 aastat või - vastavalt riigile - kauem.
Garantiinõude korral tuleb ostukuupäeva tõendamiseks esitada ostutšekk või ostuarve.
2. Seadme remontimine (tervikuna või üksikud

osad) ei pikenda garantiiperioodi.

3. Garantii ei kehti juhul, kui seadme kahjustused tulenevad:
 - a. seadme sobimatust kasutamisest, näiteks kasutusjuhendi tähelepanuta jätmisest;
 - b. kliendi või selleks volitamata kolmandate poolte remonttöödest;
 - c. seadme transportimisest tootjalt kliendile või klienditeenindusse.
 - d. Garantii ei kehti tarvikute tavapärase kulumise suhtes (korpus, patareid jms).
4. Tootja ei võta endale vastutust seadme kasutusest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, isegi juhul, kui seadme kahjustused kuuluvad garantii alla.

**Hooldustöökoda: Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00**

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com
www.beurer.healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com •
www.beurer-blutdruck.de

